



# BILINGUE®

## SANGLE DE REHAUSSEMENT



# MOBILISATION AU FAUTEUIL

### RÉFÉRENCE :

SI21890



**Elle permet à 2 aidants de rehausser l'aidé en fond d'assise.**

**BILINGUE®** est une sangle de rehaussement au fauteuil en forme de U, qui s'utilise à deux aidants.


Elle est conçue avec de multiples poignées pour faciliter la prise en main.

**BILINGUE®** s'insère sous l'aidé déjà assis au fauteuil, les extrémités croisées dans le dos de l'aidé.

Une fois installée, les aidants saisissent les poignées au niveau des épaules et des ischions pour amener l'aidé en fond d'assise.



VIDÉO

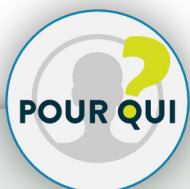

POUR QUI

Elle s'adresse à des **personnes assises au fauteuil ayant glissé en bord d'assise et nécessitant un rehaussement.**



### PRÉVENTION DES TMS

Assure un rehaussement confortable au patient tout en protégeant le dos de l'aidant.




### ASTUCES PRODUIT




Avant d'utiliser la sangle de rehaussement **BILINGUE®**, n'oubliez pas de :

- **Freiner** le fauteuil roulant
- Mettre ses **roues en position marche arrière**
- **Positionner les pieds** du patient **sur les repose-pieds**

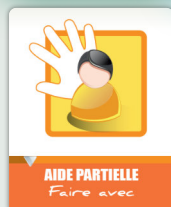

AIDE PARTIELLE  
Faire avec

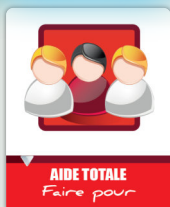

AIDE TOTALE  
Faire pour

CE  
GARANTIE 2 ANS  
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 20/12/2023

Génération de produit : 1

Garantie\* : 2 ans

Fabricant : Alter Eco Santé

Origine : France

Classe de dispositif : Classe 1



\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

# Fiche Technique

## BILINGUE®

SANGLE DE REHAUSSEMENT



### INDICATIONS D'UTILISATION



Mobilisation manuelle par deux tierces personnes, pour le rehaussement d'un sujet présentant une incapacité ou des difficultés de rehaussement autonome au lit ou au fauteuil.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

### CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

**Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne jamais utiliser un produit défectueux.**

Après utilisation, ne pas laisser la sangle BILINGUE® sur le sol.

Ne pas approcher d'une flamme nue ou d'une source de chaleur.

L'aidant ne doit pas utiliser la sangle BILINGUE® seul. Ne pas utiliser un produit décousu. Vérifier les coutures avant utilisation.

**Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.**

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

### CONDITIONNEMENT

1 sachet contenant une sangle BILINGUE® et sa fiche technique.

### COMPOSITION & COULEUR HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

Polypropylène, nylon enduction PVC, polyester, polyester enduction PVC, jersey polyester enduction PVC.

Couleur : Vert, noir

**Charge maximale admissible : 130 kg**

#### LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

**Produits prohibés** : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

**Produit recommandé** : Détergent désinfectant surfaces hautes.

Lavage en machine à une température maximale de 60 °C.

- Trempage en solution hospitalière détergente /désinfectante.
- Séchage en machine à faible température avec programme linge délicat.
- Ne pas repasser.
- Blanchisserie interdite.
- Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS
SI21890	03760311370755	Sangle de rehaussement BILINGUE®	55 x 100 cm	150 g