



MOUSTACHE®

APPUI TIBIAL ANTI ABDUCTION ADDUCTION



TRANSFERT ASSIS-DEBOUT-ASSIS

RÉFÉRENCE :


SI21635

Il facilite et sécurise la verticalisation aidée en face à face !

MOUSTACHE® est un appui tibial en mousse muni d'attaches rapides.

Il se place sur les tibias de l'aidé pour permettre le maintien axial des jambes (anti abduction et adduction) et garantir une stabilité lors du transfert.

L'aidant positionne son tibia dans l'encoche prévu à cet effet, assurant ainsi la gestion du centre de gravité.

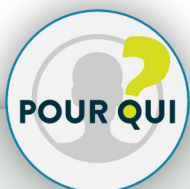

Il s'adresse à des personnes ayant **des tremblements incontrôlables au niveau des membres inférieurs**.

+ PRÉVENTION DES TMS

MOUSTACHE® préserve l'aidant d'un effort grâce à une gestion simplifiée du centre de gravité de l'aidé et réduit le risque de chute avec une stabilité retrouvée.

i ASSOCIATIONS DE PRODUITS

Pour faciliter les transferts ou encore stabiliser une verticalisation, associez l'appui tibial **MOUSTACHE®** avec d'autres aides techniques !



CEINTURE DE TRANSFERT OLIVIA® OU EMMA®

Transfert avec des prises sécuritaires


Réf : SIIM8013013M ou SI21330



DISQUE DE TRANSFERT PEDELETTE®

Rotation facilitée

Réf : SIIM9835GT

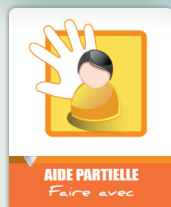

CE
GARANTIE 2 ANS
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 30/11/2023

Génération de produit : 1

Garantie* : 2 ans

Fabricant : Alter Eco Santé

Origine : France (Occitanie)

Classe de dispositif : Classe 1



* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

Fiche Technique MOUSTACHE®

APPUI TIBIAL ANTI ABDUCTION ADDUCTION



INDICATIONS D'UTILISATION



Manutention manuelle par une tierce personne, entre deux positions assises, d'un sujet présentant une incapacité de verticalisation autonome. Indiqué pour les sujets présentant une faiblesse musculaire modérée des membres inférieurs (force des quadriceps supérieure ou égale à 3/5).

Indiqué pour les sujets présentant un déficit de contrôle des mouvements des membres inférieurs lors de la verticalisation (hypertonie en extension des genoux, adduction, abduction de hanche).

Indiqué pour les premiers transferts post opératoire des personnes présentant une prothèse de hanche (en association avec un disque pivotant). Il est recommandé d'utiliser le dispositif en association avec une ceinture OLIVIA ® placée sur l'aidant (pour les patients ayant une capacité de préhension). Il est recommandé d'utiliser le dispositif en association avec un disque pivotant.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

CONDITIONNEMENT

1 carton contenant 1 appui tibial MOUSTACHE® et sa fiche technique.

COMPOSITION & COULEUR

XPE, mousse de polyéthylène certifiée pour un usage médical classe I. Sangle velours et finition par accessoire en polyéthylène.

Couleur : Noir.

PIÈCES D'USURE

Sangles velcro.

Seules les pièces d'origines fournies par le fabricant assurent la conformité du produit, le niveau de service et la sécurité exigé par le concepteur.

Charge maximale admissible : 130 kg

CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

**Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.
Ne jamais utiliser un produit défectueux.**

Contre-indiqué pour les sujets présentant une hypotonie complète ou faiblesse musculaire importante des membres inférieurs ou un syndrome de régression psychomotrice.

Contre-indiqué pour les sujets présentant une interdiction d'appui sur au moins un membre inférieur.

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualite@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.

Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS
SI21635	03760311370953	Appui tibial anti abduction adduction MOUSTACHE®.	200 g	44,5 x 23 x 9 cm