



SPLIT®

PLANCHE DE TRANSFERT



TRANSFERT ASSIS-ASSIS

RÉFÉRENCE :

SIIM403

Elle permet au bénéficiaire de passer d'une assise proche à une autre, de manière autonome ou accompagnée !



SPLIT® est une planche de transfert courbée qui se compose d'une face glissante, de plots antidérapants et d'une poignée.

Placée entre deux plans assis proches, elle permet de faciliter le transfert par glissement.


SPLIT® procure une glisse confortable grâce à une forme courbée permettant d'éviter la roue du fauteuil ou de suivre le mouvement de glisse lors de l'utilisation.



+ ENTRETIEN DE L'AUTONOMIE

Lorsque le transfert est accompagné, **SPLIT®** permet de solliciter les capacités de l'utilisateur et réduire l'effort de l'aidant.

Elle s'adapte à tous types de transfert grâce à sa forme courbée ergonomique.

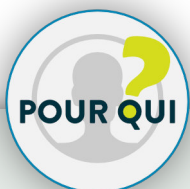

Elle s'adresse à des personnes souhaitant **passer entre deux assises proches et ayant des capacités dans les membres supérieurs et du tonus dans le tronc.**



ASSOCIATIONS DE PRODUITS

Pour sécuriser les transferts ou amplifier l'effet de glisse, associez la planche **SPLIT®** avec d'autres aides techniques !



CEINTURE DE TRANSFERT OLIVIA® OU EMMA®

Transfert sécurisé




Réf : SIIM8013013M ou SI21330



CARRÉ DE GLISSE MULTIGLIDE®

Glissement amplifié ou transfert peau nue

Réf : SIIM60

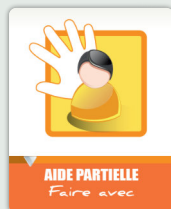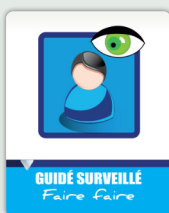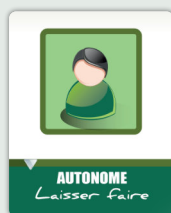

CE
GARANTIE 2 ANS
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 11/12/2023

Génération de produit : 2

Garantie* : 2 ans

Fabricant : Immedia

Origine : Danemark

Classe de dispositif : Classe 1



* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

Fiche Technique

SPLIT®

PLANCHE DE TRANSFERT



INDICATIONS D'UTILISATION

Doit être utilisée entre deux plans assis, pour un sujet présentant des difficultés de verticalisation, pour un transfert seul ou aidé. Pour un transfert assisté, évaluer si l'usage de ce produit est adapté à l'aidé.

Vérifier que la planche est bien en appui stable des deux côtés et que les freins des plans de départ et d'arrivée, s'ils en possèdent, sont verrouillés. En zone humide, vérifier l'adhérence. Les bandes antidérapantes doivent être séchées avant d'être utilisées. Avant le transfert, s'assurer que l'aidé n'a pas la peau pincée par la planche.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.
Ne jamais utiliser un produit défectueux.

Après utilisation, la planche SPLIT® ne doit pas rester sur le sol.
Ne pas utiliser un produit fendu, coupé ou dépourvu de patins antidérapants.
Ne pas exposer de façon durable au rayonnement solaire, risque de brûlure.

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

CONDITIONNEMENT

1 carton contenant 1 planche de transfert SPLIT® et sa fiche technique.

COMPOSITION & COULEUR

Polyéthylène.

Couleur : Blanc.

Charge maximale admissible : 150 kg

HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

Pulvérisation d'une solution de détergeant désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air libre)

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS
SIIM403	05708012451180	Planche de transfert SPLIT®	1,4 kg	77 x 23 x 0,8 cm