



ONE-WAY®

COUSSIN DE REHAUSSEMENT UNIDIRECTIONNEL



MOBILISATION AU FAUTEUIL

RÉFÉRENCES :

SIIM38G : Taille L

SIIM39G : Taille M


Il permet d'installer une personne au fauteuil et de la maintenir en fond d'assise !

ONE-WAY® est un coussin de rehaussement au fauteuil qui glisse à sens unique, mais agit en deux temps.

Lors de l'installation, **ONE-WAY®** coulisse avec la personne vers le fond de l'assise, puis l'empêche de glisser vers l'avant.

Ainsi le maintien en position physiologique est facilité, l'affaissement dans le fauteuil est évité.

Il peut être utilisé sur des coussins de prévention d'escarres.

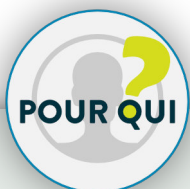

Il s'adresse à des personnes **s'installant en bord d'assise et glissant au cours de la journée, nécessitant d'être rehaussées et maintenues en fond d'assise.**

+ PRÉVENTION DES TMS

ONE-WAY® agit comme un frein antichute en limitant la glisse passive et permet à l'aidant de rehausser sans effort.

Il apporte un confort optimal au patient grâce à ses 6 tissus qui ne plissent pas.




ASTUCES PRODUIT



Avant d'utiliser le coussin de rehaussement **ONE-WAY®**, n'oubliez pas de :

- **Freiner** le fauteuil roulant
- Mettre ses **roues en position marche arrière**
- **Positionner les pieds** du patient **sur les repose-pieds**

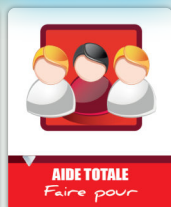



Date de Mise à Jour : 06/12/2023

Génération de produit : 2

Garantie* : 2 ans

Fabricant : Immedia

Origine : Danemark

Classe de dispositif : Classe 1



* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

Fiche Technique

ONE-WAY®

COUSSIN DE REHAUSSEMENT UNIDIRECTIONNEL



INDICATIONS D'UTILISATION

Indiqué pour les sujets présentant des difficultés de rehaussement en position assise et sujet à un affaissement dans le fauteuil. Lors de l'installation sur l'assise, la flèche doit être visible et en direction du dossier.

Considérant que le patient ne s'assoit pas directement au fond de l'assise, placer le coussin ONE-WAY® à 10 cm du bas du dossier de manière à ce qu'une fois le rehaussement effectué, le patient et le coussin ONE-WAY® occupent la totalité de l'assise. Peut-être positionné sur des coussins préventifs mais pas sur des coussins curatifs pour les escarres.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne jamais utiliser un produit défectueux.

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualite@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

CONDITIONNEMENT

1 sachet contenant 1 coussin de rehaussement unidirectionnel ONE-WAY® et sa fiche technique.

COMPOSITION & COULEUR

Nylon contre laqué 160° avec enduction polyuréthane et velours, nylon antidérapant.

Couleur : Noir.

Charge maximale admissible : 150 kg

HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

- Lavage à 80° en machine.
- Séchage à 60° maximum.
- Lavage à la main, trempage et essuyage.
- Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

ÉFÉRENCES	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS
SIIM38G	05708012149254	Coussin de rehaussement au fauteuil unidirectionnel ONE-WAY®. Taille L.	350 g	45 x 45 cm
SIIM39G	05708012126934	Coussin de rehaussement au fauteuil unidirectionnel ONE-WAY®. Taille M.	250 g	37 x 42 cm