



# OLIVIA®

CEINTURE DE TRANSFERT



## AIDE À LA MOBILISATION

### RÉFÉRENCES :

SIIM8010513S : Taille S  
SIIM8013013M : Taille M  
SIIM8015013L : Taille L





**Elle assure des prises sécuritaires lors de la marche, des transferts ou encore lors du redressement d'une personne tombée au sol !**

**OLIVIA®** une ceinture de transfert ajustable composée de 4 à 8 poignées obliques selon la taille (S/M/L).

Elle peut être portée par l'aidant ou l'aidé. Sa face interne antidérapante assure un maintien optimal au niveau de la taille et évite tous risques de glissement.

Ses prises ergonomiques respectent la pince naturelle de la main rassurant l'aidé et protégeant l'aidant des agrippements paradoxaux.

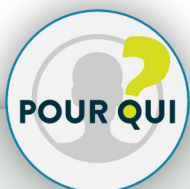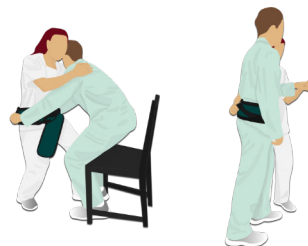

Elle s'adresse à des personnes ayant **un équilibre précaire ou ayant besoin de repères lors des mobilisations.**

### + ENTRETIEN DE L'AUTONOMIE

**OLIVIA®** favorise la participation de la personne lors des mobilisations, réduisant ainsi l'effort de l'aidant.

Elle permet également d'éviter les prises douloureuses et anxiogènes.

### i ASSOCIATIONS DE PRODUITS

Pour faciliter les transferts ou encore stabiliser une verticalisation, associez la ceinture OLIVIA® avec d'autres aides techniques !



**DISQUE PIVOTANT  
PÉDILETTE®**  
Rotation facilitée



**APPUI TIBIAL  
MOUSTACHE®**  
Gestion du centre de gravité

Réf : SIIM9835GT

Réf : SI21635

**CE**  
GARANTIE 2 ANS  
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 29/11/2023

Génération de produit : 2

Garantie\* : 2 ans

Fabricant : Immedia

Origine : Danemark

Classe de dispositif : Classe 1



\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

# Fiche Technique

## OLIVIA®

CEINTURE DE TRANSFERT



### INDICATIONS D'UTILISATION

Peut être positionnée sur le sujet ou sur l'aidant. Manutention manuelle par une tierce personne pour aider et sécuriser les transferts, la marche, le lever ou le redressement d'un sujet tombé au sol. Avant de fermer la boucle, superposer en croisé les extrémités de la sangle. Avant chaque utilisation, le soignant doit contrôler le bon état des poignées, des sangles et de la bouclerie.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.



### CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

**Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne jamais utiliser un produit défectueux.**

Après utilisation, la ceinture OLIVIA® ne doit pas rester sur le sol.  
Ne pas utiliser un produit décousu ou présentant un défaut de la boucle.  
Ne pas porter ou faire porter la ceinture de façon prolongée ou permanente.

**Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.**

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

### CONDITIONNEMENT

1 sachet contenant 1 ceinture de transfert OLIVIA® et sa fiche technique.

### COMPOSITION & COULEUR

Extérieur revêtement nylon.  
Poignées en polyester et polypropylène.  
Boucles de nylon en fixation en nylon acétal.  
Garniture : polyéthylène.  
Intérieur : Anti-dérapant polyester avec une enduction polyuréthane.

Couleur : Vert.

**Charge maximale admissible : 150 kg**

### HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

**LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.**

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

**Produits prohibés :** Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

**Produit recommandé :** Détergent désinfectant surfaces hautes.

- Lavage à 80° en machine.
- Séchage à 60° maximum.
- Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

RÉFÉRENCE	IDENTIFICATION N° UDI	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS	TAILLE	NOMBRE DE POIGNÉES
SIIM8010513S	05708012266647	Ceinture de transfert OLIVIA® Taille S.	250 g	105 x 13 cm	32 à 52	4
SIIM8013013M	05708012266630	Ceinture de transfert OLIVIA® Taille M.	350 g	130 x 13 cm	42 à 64	6
SIIM8015013L	05708012364053	Ceinture de transfert OLIVIA® Taille L.	400 g	150 x 13 cm	60 à 74	8