


L'APPLICATION TABLETTE DÉDIÉE AUX PRÉLEVEURS



Augmentez la productivité et la traçabilité de vos tournées en remplaçant vos feuilles de prélèvement et les ressaisies fastidieuses par une application mobile de dernière génération dédiée aux tablettes tactiles

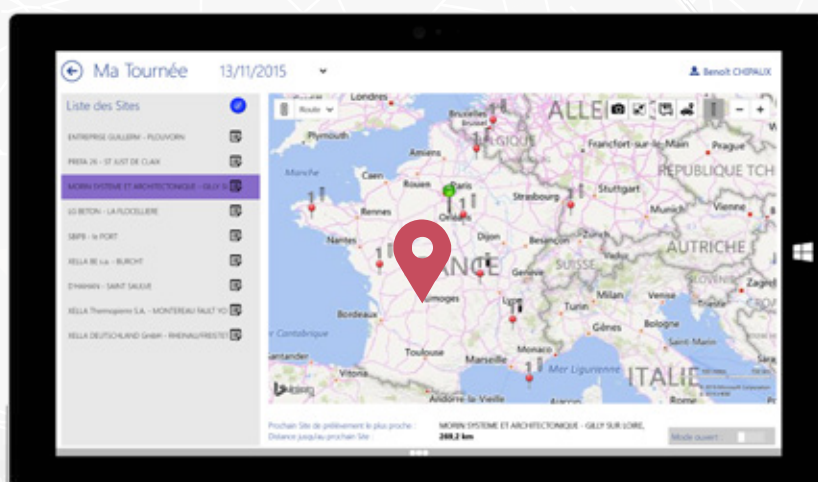

Gagnez jusqu'à 1H30 par préleveur et par jour grâce aux fonctionnalités de SolnGo®

Saisissez vos données quelles que soient les conditions climatiques (pluie, vent, boue...)

Ajustez les demandes en fonction des réalités du terrain et des souhaits de votre interlocuteur

Ajoutez des prélèvements non prévus au départ

Tracez toutes vos opérations sans effort

Gérez vos données en mode déconnecté, l'application embarque toutes vos données

Évitez à vos préleveurs la ressaisie fastidieuse de leurs données à leur départ et à leur retour au laboratoire grâce à la synchronisation avec votre LIMS



Préparation de la tournée

Avant de quitter le laboratoire, chaque préleveur télécharge sur sa tablette les échantillons à prélever sur tous les points de sa tournée.

Un écran récapitulatif lui indique le nombre total d'échantillons par type et lieu, ainsi que les matériels et flacons à emporter. Puis il visualise sa tournée géolocalisée sur une carte interactive. L'écran peut être basculé en mode protégé, afin d'éviter les saisies intempestives lors des manipulations de la tablette.



Saisie des données in-situ

Depuis la carte, le préleveur accède à l'écran de saisie des données de chaque échantillon.

Les formulaires s'adaptent automatiquement au type d'échantillon et aux analyses demandées. L'ergonomie moderne de l'écran permet au préleveur de gagner en efficacité en le guidant dans sa saisie.



Modification des demandes et ajout de prélèvements inopinés

Durant sa tournée, le préleveur peut modifier les données terrain à saisir et les analyses à réaliser sur chaque échantillon.

Il peut également ajouter à la volée des échantillons non prévus ou de dernière minute (inopinés). Il accède directement au catalogue des analyses terrain et des analyses laboratoire configurées dans le LIMS, et filtré en fonction du type d'échantillon à analyser.



Retour au laboratoire

À son retour, le préleveur déverse ses données dans le LIMS grâce au bouton dédié.

Les échantillons passent à l'état reçu, les données terrain et les résultats des mesures in-situ sont transférées automatiquement, le plan d'analyses est modifié le cas échéant, les échantillons inopinés sont créés dans le LIMS. Le préleveur peut alors importer une nouvelle tournée sur sa tablette et préparer ses matériels et ses flacons à emporter.

Données techniques

SolnGo® fonctionne sur des tablettes tactiles Windows 8.1 RT/Pro ou Windows 10.

La synchronisation des données entre le LIMS du laboratoire et l'application SolnGo® s'effectue via un Web-Service, à l'aide d'une connexion au réseau (EDGE/3G/4G ou Wifi).