

Instruction d'utilisation

Ceinture de transducteur fœtal réutilisable

Utilisation conforme:

- Ce produit fonctionne en fonction de la position de la boucle sur la ceinture pour fixer le transducteur fœtal.

Présentation du produit:

- Nom du produit: ceinture de transducteur fœtal réutilisable.
- Structure du produit: Il est composé d'une ceinture élastique et d'une boucle.

Gamme de produits:

- Il est utilisé avec un transducteur fœtal pendant la grossesse en surveillance fœtale, pour fixer le transducteur fœtal.

Condition d'utilisation:


- Température: 0 °C ~ 40 °C
- Humidité relative: 15% ~ 95%
- Pression atmosphérique: 70kpa ~ 106kpa

Emballage et stockage:

- La ceinture fœtale réutilisable doit être emballée individuellement, le produit emballé doit être stocké dans un gaz non corrosif, une bonne pièce de ventilation.
- Environnement de stockage comme ci-dessous:
 - 1, Température: -10 °C ~ + 40 °C
 - 2, Humidité relative: ≤80%
 - 3, Pression atmosphérique: 70kpa ~ 106kpa

Installation / utilisation:

- Fixez une extrémité de la ceinture au transducteur en engageant l'un des trous de la ceinture sur le bouton sur le dessus du transducteur.
- Maintenez le transducteur en position, tendez l'autre extrémité de la ceinture et engagez la ceinture sur le bouton, en veillant à une tension suffisante pour maintenir le transducteur en contact ferme avec l'abdomen.
- Évitez de trop serrer car cela causera un inconfort inutile au patient.

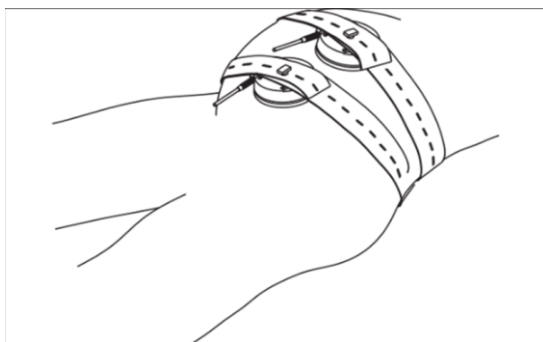

Produit propre:

- Lavez la ceinture à l'eau tiède, ne frottez pas le bord de la ceinture fœtale pour éviter son retrait, ne l'exposez pas.

Garantie / période de validité:

- Période de garantie: N/A.
- Période de validité: 2 ans.


Remplacer et abandonner:

- Remplacer: dans ces situations telles que fracture, dommage élastique, veuillez changer la nouvelle ceinture fœtale à utiliser.
- Abandon: la ceinture abandonnée peut être traitée comme un déchet normal.

Contre-indications, précautions, avertissements et mises en garde:

- Contre-indications: Les ceintures ne doivent pas être fixées sur le site de la blessure.
- Les allergies au spandex à arrêter d'utiliser.
- Mises en garde: veuillez lire les instructions avant utilisation.

Marque:

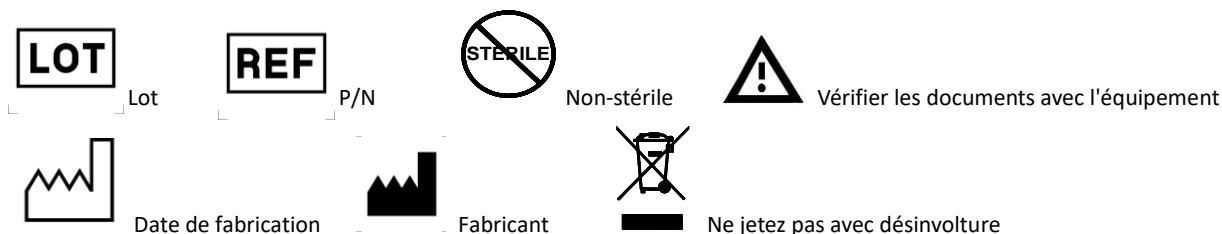

Manufacturer: Shenzhen Belcare Technology Co., Ltd.

Address: 402, 21# Huimin 2nd Road, Guihua community, Longhua District, Shenzhen, China 518110

Web.: www.szelcare.com Email: joe@szbelcare.com