

LNCS®-patientkabler LNC-serien

BRUKSANVISNING

Aerandvårdar  Denna produkt är inte tillverkad av naturligt gummitäts

 Osterl

INDIKATIONER

LNC-patientkablerna har samma indikationer som de tillämpliga sensorerna. Indikationer och ordinationsinformation finns i bruksanvisningen till kompatibla sensorer.

BESKRIVNING

LNC-patientkablerna används med Masimo LNCSP®-sensorer. LNC-patientkabeln och Masimo LNC-sensorena har validerats med en Masimo SET® Rad-5®-pulsoximeter.

VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR OCH MEDDELANEN

- Se till att kabeln är i gott fysiskt skick och att den inte har några trasiga eller fransade ledningar eller skadade delar. Granska kabeln visuellt och kassera om du upptäcker spigbildningar eller misstänkingar.
- Dra patientkabeln försiktigt för att minska risken för att patienten trasslar in sig eller stopps.
- Masimo-sensorer och patientkablar får inte ombearbetas, repareras eller återanvändas eftersom dessa processer kan skapa de elektriska komponenterna, vilket kan leda till patientkada.
- Masimo-sensorer och -kablar är avsedda för användning med instrument som innehåller Masimo SET®-oximetri eller som är licensierade för att använda Masimo-sensorer.
- Alla sensorer och kablar är utformade för att användas med specifika monitorer. Kontrollera monitorerna, kabelns och sensorns kompatibilitet före användning för att undvika försämda funktion och/eller risk för patientkada.
- Underlåtenhet att ansluta sensorerna eller oximetermodulen till kabeln på rätt sätt leder till oregelbunda mätvärden, felaktiga resultat eller inget mätvärde alls.
- Fatta alltid tag i kontakten, inte i kabeln, när du ansluter eller kopplar ur endera änden för att undvika skador på kabeln.
- Oximetermodulens användarhandbok innehåller fullständiga anvisningar.

Sensorer och kablar får inte bliotlaggs eller nedsänkas i någon vätskelösning. Försök inte sterilisera kabeln eller sensorn.

Var försiktig! Byt ut kabeln när ett meddelande om flyte av kabel visas, eller när ett meddelande om låg SIQ fortsätter att visas vid övervakning av flera patienter i följd efter att du har slutfört felkontrollstegen för låg SIQ som finns i övervakningsshetets användarmanual.

- Obs!** Kabeln innehåller X-Cal®-teknik som minimerar risken för felaktiga avläsningar och övåntade kortslut eller patientövervakningar. Kabeln kan användas för patientövervakning i upp till 17,520 timmar. Byt ut kabeln när patientövervakningstiden har överstigit. Vissa äldre övervakningsenheter stöller inte mellan kabel och sensor. I sådana enheter kan ett meddelande om flyte av sensor eller liknande gälla antingen sensor eller kabeln.

INSTRUKTIONER

A) Anslut LNC-patientkabeln till enheten

- Risik i kabelns anslutning så att den möter patientkabelanslutningen på Masimo SET-instrumentet och tryck in den.

B) Ansluta LNC-kabeln till LNC-sensorn

- Sätt in sensoranslutningen fullständigt i patientkabelns anslutning (fig. 1).
- Stäng skyddet helt (fig. 2).

C) Koppla loss LNC-kabeln från LNC-sensorn

- Lift på skyddet för att komma åt sensorns anslutning (fig. 3).
- Ta bort sensorn i sensoranslutningen för att koppla loss den från patientkabeln (fig. 4).

VARNING

Använd inte patientkabel LNC-10 eller LNC-14 tillsammans med förlängningskabel PXC2-30.

RENGÖRING

Rengör LNC-patientkabeln genom att torka av den med en dyna med 70 % isopropylalkohol och låt den torka helt.

KOMPATIBILITET

LNC-patientkablar ska endast användas tillsammans med enheter som innehåller Masimo SET®-teknik samt med kompatibla sensorer. Konsultera enkla tillverkare av oximetersystem för att få information om huruvida specifika enheter och sensormodeller passar ihop. Varje instrumenttillverkare är ansvarig för att fastställa om deras enheter passar ihop med en sensor- och/eller kabelmodell.

Information om kompatibilitet finns på: www.masimo.com

GARANTI

Masimo garanterar endast den ursprungliga köparen att denna produkt, när den används enligt de anvisningar från Masimo som medföljer produkten, är fri från fel i material och utförande i sex (6) månader. Produkter för rengöringsbruk ska (enligt garantin) endast användas med en patient.

DET FÖREGRÄNDE ÄR DEN ENDA GARANTI SOM GÄLLER FÖR PRODUKTER SOM MASIMO SÄLJER TILL KÖPERN. MASIMO FRÅNGÅR SIG UTTRYCKLIGT ALLA ANDRA MUNDTLIGA, UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ALLA GARANTIER OM SJÄLBÄRT ELLER LÅMPLIGHET FÖR ETT VISST ÅNDALE. MASIMOS ENDA ANSVAR OCH KÖPARENS ENDA ERÅTTNING VJ GARANTIROTT ÄR, ENLIGT MASIMOS VAL, REPARATION ELLER ERÅTTNING AV PRODUKTEN.

UNDANTAG FRÅN GARANTI

Denna garanti omfattar inte produkt som använts i strid mot bruksanvisningarna som tillhandahålls med produkten, eller som har utsatts för vårdstofs, vätskespill, olycka eller extert skadad skada. Denna garanti omfattar inte produkter som har kopplats till ike avsedda enheter eller system, har ändrats eller tagits isär eller satts ihop igen. Denna garanti omfattar inte sensorer eller patientkablar som har ombearbetats, reparerats eller återanvänds.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN MASIMO HÅLLA ANSVARIG INFÖR KÖPAREN ELLER ANNAN PERSON FÖR TILLFÄLIGA, INDIVIDUELLA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJSKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UTERIVEN VINST), ÄVEN OM MÖJLIGHETEN DÄROM MEDELAS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA MASIMOS ANSVAR FÖR PRODUKTER SOM SÄLTS TILL KÖPARE (UNDER KONTRAKT, GARANTI, ÅTÅLAR HANDLING ELLER ANDRA FÖRORDNING) ÖVERSKRIDA SUMMAN BETALD AV KÖPAREN FÖR PRODUKTERNA I EN SÅDAN FÖRORDAN. MASIMO ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIG FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV EN PRODUKT SOM HAR OMBEARBETATS, REPARERATS ELLER ÅTERANVÄNTS. BEGRÄNSNINGARNA I DETTA ANSVÄRT SKALL INTE ANSES UTESLUTA VÄRJE ANSVAR SOM, ENLIGT TILLÄMPLIG PRODUKTANSVARSLAG, LAGLIGEN INTE KAN UTESLUTAS GENOM KONTRAKT.

INGET UNDERFÖRSTÅTT TILLSTÄND

Inköp eller innehav av denna LNC-patientkabel ger inte uttrycklig eller underförstådd licens att använda denna kabel med någon enhet som inte är en auktoriserad enhet eller som auktoriserats separat för användning med LNC-patientkablar.

VARNING: ENLIGT FEDERAL LAGSTIFTNING I USA FÅ DENNA ENHET ENDAST SÄLJAS AV LÄKARE ELLER FÅ LÄKARENS ÖRINATION. För professionell användning. Se bruksanvisningen för fullständig förskrivningsinformation, inklusive indikationer, kontraindikationer, varningar, observationer och biverkningar.

Om du råkar ut för en allvarig incident med produkten, meddela behörig myndighet i ditt land och tillverkaren.

Följande symboler kan finnas på produkten eller produktmärkning:

SYMBOL	DEFINITION	SYMBOL	DEFINITION	SYMBOL	DEFINITION
	Följ bruksanvisningen		Separat insamling för elektrisk och elektronisk utslutning (WEEE).	Rx ONLY	Försiktigt: Enligt federal lagstiftning i USA får denna enhet endast säljas av läkare eller tillika licensierad person.
	Se bruksanvisningen	LOT	Partinummer	CE	Europeiska unions konformitetsmärkning
	Tillverkare	REF	Katalognummer (modulnummer)	ECIREP	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Tillverkningsdatum AAA-MM-DD	###	Masimos referensnummer		Kroppsvikt
	Försiktigt		Luftryckslöshetsbegränsning och förvaring		Förvarings temperaturområde
	Kassera inte		Sörösa än		Mindre än
	Österl/bröckig, barresärs väsent		Denna produkt är inte tillverkad av naturligt gummitäts		Amotofästningsbegränsning
	Medicinteknisk utrustning	UDI	Unik enhetsidentifikationsare		Instruktioner/bruksanvisningar/manuall finns i elektroniskt format på http://www.Masimo.com/Technics
	Importör		Distributör		Obs! Den elektroniska bruksanvisningen är inte tillgänglig i alla länder.

Patent: <http://www.masimo.com/patents.htm>

Masimo, SET,  LNCs, X-Cal och Rad-5 är registrerade varumärken som tillhör Masimo Corporation.

LNCS®-patientenkabels LNC-serie

GEbruiksAAnwijzing

HerbruikbAr  Bij de productie is geen latex van natuur rubber gebruikt

 Niet serieel

INDICATIES

De LNC-patientenkabels hebben dezelfde indicaties voor gebruik als de bijbehorende sensoren. Zie de gebruiksaanwijzing van de bijbehorende sensor voor indicaties voor gebruik en beschrijvingen.

BESCHRIJVING

De LNC-patientenkabels worden gebruikt met Masimo LNCSP®-sensoren van Masimo. De LNC-patientenkabeln en de LNC-sensoren van Masimo zijn gevalideerd met de Masimo SET® Rad-5®-pulsoximeter.

WAARSCHUWINGEN, LET OP-MELDINGEN EN OPMERKINGEN

- Controleer of de kabel fysiek intact is, d.w.z. dat er geen draden gebroken of gefaseerd en er geen onderdelen beschadigd zijn. Inspecteer de kabel visueel en goed deze weg als er barsten of verkleuringen zichtbaar zijn.
- Leid de patientenkabel nauwkeurig lang een veilige route om te voorkomen dat de patiënt verstrikt of bekend raakt met kabeln.
- Probeer sensoren of patientenkabeln van Masimo niet opnieuw te reinigen/prepareren of te recylen, aangezien dit de elektrische onderdelen kan beschadigen en bij de patient letsel tot gevolg kan hebben.
- Masimo-sensoren en -kabels zijn ontworpen voor gebruik met apparaten met Masimo SET®-oximetrie of die in licentie zijn gegeven voor gebruik met Masimo-sensoren.
- Alle sensoren en kabels zijn bestemd voor gebruik met specifieke monitoren. Controleer voor gebruik de compatibiliteit van de monitor, de kabel en de sensor, omdat incompatibiliteit tot slechte prestaties en/of letsel bij de patient kan leiden.
- Als de sensor of de oximetermodule niet correct op de kabel wordt aangebracht, heeft dit intermitterende metingen, onnauwkeurige resultaten of een volledige afwezigheid van metingen tot gevolg.
- Houd de kabel altijd vast aan de connector en niet aan de kabel zelf wanneer u een van beide uiteinden aansluit of losloopt alvorens om beschadiging van de kabel te voorkomen.
- Raadpleeg altijd de gebruikershandleiding van de oximetermodule voor complete of aanvullende instructies.
- Weg van doppel de sensor van kabel niet in voeltoetsen om schade te voorkomen. Probeer de kabel of sensor niet te steriliseren.
- Let op:** Vervang de kabel wanneer het bericht 'Kabel vervangen' wordt weergegeven of wanneer tijdens het breukelen van opengeenliddde patiëntten lange een bericht over lage SIQ wordt weergegeven nadat u de stappen voor probleemoplossing voor lage SIQ hebt uitgevoerd volgens de gebruikershandleiding van het bewakingsapparaat.
- Opmerking:** De kabel is voorzien van X-Cal®-technologie om het risico van onnauwkeurige afleeswaarden en onverwachte onderbreking van de bewaking van de patient te beperken. De kabel is geschikt voor een bewakingsduur van maximaal 17.520 uur. Vervang de kabel wanneer de bewakingsduur is verstreken. Bij sommige oudere bewakingsapparaten wordt geen onderscheid gemaakt tussen de kabel en de sensor. Bij deze apparaten kan een bericht over het vervangen van de sensor betrekking hebben op zowel de sensor als de kabel.

INSTRUCITIES

A) Sluit de LNC-patientenkabel op het apparaat aan

- Steek de stekker van de kabel onder de juiste hoes in het patientenkabelcontact op het Masimo SET-instrument en trek in den.

B) De LNC-patientenkabel op de LNC-sensor aansluiten

- Plaats de sensormconnector volledig in de connector van de patientenkabel (afb. 1).

- Sluit het deksel volledig af (afb. 2).

C) De LNC-patientenkabel van de LNC-sensor loskoppelen

- Licht het deksel op om bij de sensormconnector te komen (afb. 3).
- Trek flink aan de sensormconnector om deze uit de patientenkabel te verwijderen (afb. 4).

WAARSCHUWING

Gebruik de LNC-10- of LNC-14-patientenkabel niet met het PXC2-30- Verlengsnoer.

REINIGING

Maak de LNC-patientenkabel schoon door die met een gaasje met 70% isopropanol af te nemen en goed te laten drogen.

KOMPATIBILITEIT

De LNC-patientenkabels zijn uitsluitend bestemd voor gebruik met apparaten met Masimo Rainbow SET®-technologie en met compatibele sensoren. Raadpleeg de fabrikanten van de verschillende oximetersystemen voor de compatibiliteit van specifieke apparaten en sensormodellen. Elke fabrikant van apparaten is verantwoordelijk voor het bepalen of zijn apparaten compatibel zijn met elk sensor- en/ of kabelmodel.

Raadpleeg voor meer informatie over compatibiliteit: www.masimo.com

GARANTIE

Masimo biedt alleen de eerste koper de garantie dat dit product, indien gebruikt volgens de bij de producten van Masimo geleverde aanwijzingen, geen gebreken zal vertonen qua materiaal en uitvoering gedurende een periode van zes (6) maanden. De producten voor eenmalig gebruik hebben slechts een garantie voor gebruik bij één patient.
HET VOORBEELD IS DE ENIGE GARANTIE VAN TOEGANGSIG IS OP DOOR MASIMO AAN DE KOPER VERKOCHTE PRODUCTEN. MASIMO VERWIJZT NIET NAAR ANDERE MONDELINGE, UITGESPREKTE OF GESCHRIJFDE HOOR EEN BEPALD DOD, DE ENIGE VERPLICHTING VAN MASIMO EN HET EXCLUSIEVE VERHAAL VAN DE KOPER VOOR INBREUK OP EEN GARANTIE IS DE REPARATIE OF VERVANGING VAN HET PRODUCT VOLGENS MASIMO'S KEUZE.

UITGESLOTEN VAN GARANTIE

Deze garantie stekht zich niet uit tot producten die niet zijn gebruikt volgens de bij het product geleverde bedieningsinstructies of die zijn misbruikt, aangezien of, door ongelukken of schade van buitenaf zijn beschadigd. Deze garantie stekht niet uit tot producten die zijn vervaardigd op een ongeoorloofd apparaat of systeem, zijn gewijzigd, zijn gedemonteerd of opnieuw zijn gemonteerd. Deze garantie geldt niet voor sensoren of patientenkabels die opnieuw zijn gebruikt/geprepareerd of gereinigd.
MASIMO IS ONDER GEEN BEIDING ANSPRAKELIJK JEGENS DE KOPER OF ANDERE PERSONEN, ANGANGANDE INCIDENTIELE, INDIRECTE, SPECIELE OF BIJKOMENDE SCHADE (INKLUSIEF, EN ZONDER BEPERKING, GEDEERDE WINST), ZELFS INDIEN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID HIERVAN. IN GEEN GEVAL GAAT DE ANSPRAKELIJKHEID VAN MASIMO VOORTKOMENDE UIT AAN DE KOPER VERKOCHTE PRODUCTEN DOOR CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE CLAIMS HET DOOR DE KOPER BETALDE BEIDING VOOR DET PARTI PRODUCTEN DIE EEN DINGELIJE CLAIM BETREFFEN.
DE BOVENAANDE IS IN GEEN GEVAL ANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE WORDT VERORZAKT DOOR EEN PRODUCT DAT OPNIUW IS GEBRUIKT/GEPREPAREERD OF IS GERECELYD. DE BEPERKINGEN IN DEZE SLUITEN GEEN ANSPRAKELIJKHEID UIT DIE, VOLGENS DE UITGESLOTEN WETGEVING ANGANGANDE PRODUCTANSAPKELIJKHEID, NIET WETTELIJK PER CONTRACT KUNNEN WORDEN UGESLOTEN.

GEEN IMPLICIETE VERGUNNING

Aankoop of bezit van deze LNC-patientenkabel verleent niet het uitdrukkelijke of impliciete recht tot gebruik van deze kabel met apparatuur die geen goedgekeurde apparatuur is of met apparatuur waarvan niet afzonderlijk toestemming tot gebruik met LNC-patientenkabels verkregen is.

LET OP: VOLGENS DE AMERIKAANSE FEDERALE WETGEVING MAG DIT INSTRUMENT UITSLUITEND WORDEN VERKOCHT DOOR OF VOOR SCHRIJFTELIJ VAN EEN ARTS.

Uitsluitend voor professioneel gebruik. Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige gebruiksvoorschriftinformatie, inclusief indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en biverkningen.

Als er zich een ernstig voorval met het product heeft voorgedaan, geelieve de bevoegde autoriteit in uw land en de fabrikant te informeren.

De volgende symbolen kunnen op het product of producttekstetn voorkomen:

SYMBOL	DEFINITE	SYMBOL	DEFINITE	SYMBOL	DEFINITE
	Volg de gebruiks-aanwijzing op		Afzonderlijke insamling voor elektrisk en elektroniske apparatuur (WEEE).	Rx ONLY	Let op: Volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit apparaat uitsluitend door of op voorrecht van een arts worden verlost.
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing	LOT	Partijcode	CE	Europees conformiteits-teken
	Fabrikant	REF	Katalognummer (modulnummer)	ECIREP	Erkend vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Productie datum AAA-MM-DD	###	Referentienummer Masimo		Lichaamsgewicht
	Let op		Vochtgeheidsgraadlimiet bij opslag		Opslagtemperatuurbereik
	Niet wegwerpen		Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is en aanwijzingen de gebruiksaanwijzing		Droog bewaren
	Breekbaar, voorzichtig hanteren	>	Groter dan	<	Kleiner dan
	Niet serieel		Bij de productie is geen latex van natuur rubber gebruikt		Atmosferische druklimiet
MD	Medisch hulpmiddel	UDI	Uniek apparatuuridentificatienummer		Instructies/ gebruiksaanwijzingen/handleidingen zijn niet afgeleverd met de apparatuur, maar zijn beschikbaar als elektronische documenten op http://www.Masimo.com/Technics
	Importeur		Distributeur		Opmerking: Er is geen elektronische gebruiksaanwijzing beschikbaar voor alle landen.

ootroelen: <http://www.masimo.com/patents.htm>

Masimo, SET,  LNCs, X-Cal en Rad-5 zijn de Verenigde Staten federale gedeponeerde handelsmerken van Masimo Corporation.

LNCS®-patientledninger LNC-serien

BRUGSANVISNING

Genarvendelig  Ike fremstillet med naturg gummitæts

 Ike serieel

INDIKATIONER

LNC-patientledninger serien har samme indikationer for brug som de relevante sensorer. Se bruksanvisningen til den compatible sensor for indikationer for brug og foreskrevne oplysninger.

BESKRIVELSE

LNC-patientledninger serien bruges med Masimo LNCSP®-sensorer. LNC-patientledningen og Masimo LNCs-sensorerne er blevet valideret med Masimo SET® Rad-5®-pulsoximeteret.

ADVARSEL, FÖRSIGTIGHEDSANVISNINGER OCH BEMÆRKNINGER

- Kontroller, at kabelt er fysisk intakt uden brækkede eller flossede ledninger eller beskadigede dele. Efterse kabeln visuelt og kassér det, hvis det er røvet eller midelvist.
- Før patientledningen omhyggeligt for at reducere risikoen for, at patienten vikles ind i den eller bliver kvalt.
- Forsøg ikke at genbehandle, omarbejde eller genbruge Masimo-sensorer eller -patientledninger, da disse processer kan beskadige de elektriske komponenter og muligvis føre til skade på patienten.
- Masimo-sensorer og -ledninger er beregnet til brug med enheder, der indeholder Masimo SET®-oximetri eller har licens til at bruge Masimo-sensorer.
- Alle sensorer og ledninger er beregnet til brug med bestemte monitoreringsenheder. Kontroller, at monitoreringsenheden, ledningen og sensoren er compatible for brug, da det ellers kan resultere i forringet ydeevne og/eller skade på patienten.
- Hvis sensoren eller oximetermodulet ikke slutes korrekt til kabelt, bliver aflæsningerne intermitterende, resultaterne bliver unøjagtige, eller der vises ingen signal.
- Før at udført beskadigelse af kabelt skal man altid tage fat i stikket i stedet for kabelt, når en af enderne vikses til eller løsnes.
- Se altid brugerhåndbogen til oximetermodulet for fuldstændige og yderligere oplysninger.
- Sensorer eller kabelt må ikke lægges i blød eller nedsenkes i væske, da de kan blive beskadiget. Kabelt eller sensorer må ikke steriliseres.
- Forsigtigt!** Udskift kabelt, når der vises en meddelelse om, at kabelt skal udskiftes, eller hvis der hele tiden vises en meddelelse om lav SIQ ved monitorering af flere på hinanden følgende patienter, selvom trinnene i brugerhåndbogen til monitoreringsenheden i forbindelse med fjernføring for læv SIQ er udført.
- Bemærk!** Kabelt leveres med X-Cal®-teknologi for at minimere risikoen for ukorrekte målinger og uventet tab af patientmonitorering. Kabelt benyttes til patientmonitorering i op til 17.520 timer. Udskift kabelt, når der ikke er mere patientmonitoreringstid tilbage. Vissé tidligere monitoreringsenheder skæner ikke mellem kabel og sensor. Ved disse enheder kan en meddelelse om udsiftning af sensoren eller tilsvarende meddelelse gælde for enten sensoren eller kabelt.

ANVISNINGER

A) Sæt LNC-patientledningen på en enheden

- Vend kabelt skt, så det matcher stikket på Masimo SET-instrumentets patientledningstik, og indsæt det.

B) Tilslutning af LNC-kabelt til LNC-sensoren

- Sæt sensorkonnektoren helt ind i patientledningens stik (figur 1).
- Luk beskyttelseslystret helt (figur 2).

C) Frakobling af LNC-kabelt fra LNC-sensoren

- Lift beskyttelseslystret for at få adgang til sensorkonnektoren (figur 3).
- Trek godt i sensorkonnektoren for at fjerne den fra patientledningen (figur 4).

WAARSCHUWING

Maak de LNC-10- eller LNC-14-patientledninger met PXC2-30-foerlængerledningen.
Rengör LNC-patientledningen ved at tørre den af med en tampon med 70 % isopropylalkohol og lade den tørre grundigt.

KOMPATIBILITET

LNC-patientledninger må kun bruges med enheder, der indeholder Masimo SET®-teknologi, og med compatible sensorer. Kontakt de individuelle producenter af oximetersystemerne for at få oplyst, om bestemte enheder og sensormodeller er compatible. Her henkelt enheds at producent skal bestemme og angive, om deres enheder er compatible med den enkelte sensor- og/eller ledningsmodel.
Der findes oplysninger om kompatibilitet på: www.masimo.com

GARANTI

Masimo garanterer kun over for den første køber, at dette produkt, hvis det anvendes i henhold til anvisning

LNCS®-potilaskaapelit LNC-sarja

KÄYTTÖOHJEET
 Uudelleen käytettävä
 Ei sisällä luonnontuotteita
 Epästeriili

KÄYTTÖAIHEET

LNCS-sarjan potilaskaapelit on tarkoitettu käytettäväksi samoinen käyttötarviketuksiin kuin sen kanssa yhteensopivat anturit. Kaato yhteensopivien anturien käyttöaiheita on kuvattu ohjeen.

KUVAUS

LNCS-sarjan potilaskaapeleita käytetään yhdessä Masimo LNCS® -anturien kanssa. LNC-potilaskaapelit ja Masimo LNCS -anturien toiminta on varmistettu Masimo SET® Rad-5® -puistikoskimerillä.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

- Varmistu, ette kaapella ei ole fyysisiä vikoja, kuten katkennutta tai ripaantunutta johtoja tai vaurioituneita osia. Tarkista kaapeli silmämääräisesti ja hävitä kaapelit, jos siinä on halkemia tai varjauksia.
- Reititä potilaskaapelia huolellisesti, jotta potilas ei sokeudu tai kuristu siihen.
- Älä yritä käsitellä uudestaan, kunnottaa tai kiertääää Masimo-antureita tai -potilaskaapeleita. Tällaiset toimet voivat vahingoittaa sähkökomponentteja, mikä voi aiheuttaa potilaalle vahinkoa.
- Masimon anturit ja kaapelit on tarkoitettu käytettäväksi sellaisten laitteiden kanssa, joissa käytetään Masimo SET® -oksimetria tai joka on lisensoitu käyttämään Masimon antureita.
- Kakki anturit on suunniteltu käyttäväksi tiettyjen monitorien kanssa. Tarkista monitorin, kaapelin ja anturin yhteensopivuus ennen käyttöä, jotta toimintakyky heikkenee ja/tai potilas loukkaannu.
- Mikali anturia tai oksimetria ei kytketä kunnolla kaapelein, lukeumat ovat epäsuunnollisia, tulokset epätarkkoja tai tulokset ei saada lainkaan.
- Kun kytket tai irrotat kaapelia, tulla siihen aina liittimestä kaapelijohdon sijaan, jotta kaapeli ei vahingoitu.

- Koska oksimetrin käyttöoppaasta tarkemmat ohjeet tai lisätiedot.
- Vältä varuot – älä ota anturia tai kaapelia nesteesiin. Älä sterilo kaapelia tai anturia.
- Varoitut:** Vahdta kaapelit, kun kaapelein vaihtamisesta kertova viesti tulee näkyviin, tai kun heikosta signaalilähdystä ilmottava viesti näkyy jatkuvasti peräkkäisiä potilaata vaihdettaessa monitorilaitteiden käyttöoppaassa kuvattujen heikon signaalilähdun väistämättömiä toimenpiteiden tekemisen jälkeen.
- Huomautus:** Kaapellissa käytetään X-Cal®-tekniikkaa, joka pienentää epätarkkojen lukemien ja potilaan valvontalaitteiden odottamattoman kataamisen riskiä. Kaapelia voi käyttää potilaan valvonnassa enintään 17 520 tuntia ajan. Valhda kaapelit, kun potilaan enimmäisvaiktoa-alka on päättynyt, jotta enintään vahingoittaiset eivät tee eroa kaapelin ja anturin välillä. Näissä laitteissa anturin vaihtamisesta kertova tai muu tämän tyyppinen viesti voi koskea joko anturia tai kaapelia.

OHJEET
A) Kytke LNCS-kaapeli laitteeseen
1. Kytke kaapelin liittin Masimo SET-laitteen potilaskaapeliin liittimeen.
B) LNC-kaapelin liittäminen LNCS-anturiin
1. Yhdistä anturin liittin kokonaan potilaskaapeliin liittimeen (kuva 1).
2. Sulje suojus huolellisesti (kuva 2).
C) LNC-kaapelin irtottaminen LNCS-anturista
1. Nosta suojus, jotta pääset käsiksi anturiin liittimeen (kuva 3).
2. Irrota anturi potilaskaapelista vetämällä napakasti anturin liittimestä (kuva 4).

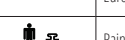
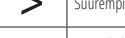
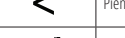
VAROITUS
Älä käytä LNCS- tai LNC-14-potilaskaapeleita PKX2-30-jatkojohdon kanssa.
PUHDISTAMINEN
Puhdistu LNC-potilaskaapeli pyyhkimällä se 70-prosenttisella isopropyylialkoholipyyhkeellä. Anna kuulla kokonaan.
YHTEENSOPIVUUS
MASSIMO SET. LNCS-potilaskaapeli on tarkoitettu käytettäväksi vain sellaisten laitteiden kanssa, joissa käytetään Masimo SET® -tekniikkaa, sekä yhteensopivien anturien kanssa. Saat tietoa oksimetriajärjestelmien valmistajilta yksityistien laitteiden ja anturimallien yhteensopivuudesta. Kunkin laitevalmistajan vastuulla on määrittää, ovatko anturi- ja/tai kaapelimallit yhteensopivia sen valmistamien laitteiden kanssa.
Lisätietoja yhteensopivuudesta: www.masimo.com

TAKUU
Masimo myöntää alkuperäiselle ostajalle kuuden (6) kuukauden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta, kun takuu käytetään Masimon tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Kertakäyttöisten tuotteiden takuu kattaa käytön vain yhdellä potilaalla.
SEURAAVA ON AINOA TAKUU, JONKA MASIMO MYÖNTÄÄ TUOTTEEN OSTAJALLE. MASIMO KIELTÄÄ KAIKKI MUUT, SUULLISET, NIMENOMAISET JA HILJAISET TAKUUT, MUKAMN LUKIEN MM. KAUPPILAISUUTTA JA TIETTYJEN KÄYTTÖTARVIKKEIDEN SOPIMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. MASIMON ANON VELVOITUS JA OSTAJAN ANON KORVAUSVAIMUTUS MINÄÄ TAHANSA TAKUURIKKEEN KOHDALLA ON, MASIMON PÄÄTÖKSESTÄ, KORJATA TAI VAIHTAA TUOTE.
TAKUUN RAJOITUKSET
Tämä takuu ei koske tuotetta, jota on käytetty tuotteen mukana toimitettujen käyttöohjeiden vastaisesti tai jota on käytetty väärin, lähimäilyty tai joka on vahingoittunut tapaturmassa tai jostain ulkopuolelsta syystä. Tämä takuu ei koske tuotetta, joka on käytetty muuhun kuin tarkoituksenmukaiseen liitteeseen tai järjestelmään, eikä tuotetta, jota on muutettu tai joka on purettu tai kotoa uudestaan. Tämä takuu ei koske antureita tai potilaskaapeleita, joita on käsitelty uudeleen, kunnotettu tai josta on kiertäetty.

MASIMO EI VASTAA OSTAJALLE TAI MAULLE HENKILÖLLÄ SATUNNAISIA, EPÄSUORISTA, ESITETTYVÄ TAI VALITTAVISTA VAHINGOISTA (MUKAMN LUKIEN RAJOITUKSETA TULOJEN MENÄTYKSE), VAKKAA TILALASTESTA MAHDOLLISUUDENKÄSITÄMINNISÄKSI, MASIMO EI VASTAA MISSÄÄN TILANTEESSA OSTAJALLE MYÖMYSTÄ JOHTUVISTA (SOPIMUKSEN, TAKUUN, DELKINTÄ TAI MUUN VASTAAN MUKAMN) SUUREMMALLA SUMMALLA KUIN MILLÄ OSTAJA ON OSTANUT TUOTE-ERÄT, JOTTA VAADE KOSKEE. MASIMO EI VASTAA MISSÄN TILANTEESSA VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT TUOTTEESSEEN, JOTA ON KÄSITELTY UUDELEEN, KUNNOTSETTU TAI JOTKA ON KIERÄTTEETTY. TÄSSÄ KOHDASSA ESITETYT RAJOITUKSET EIVÄT ESTÄ SELLAISTA VASTUUTA, JOTA SOSTAJAN TUOTTEIVASTUUTUS MUKAAN EI VOI ESTÄÄ SOPIMUKSELLA.

INGEN UNDERFÖRSTÄTT LSENS
Kypö eller besittelse av denne LNC-pasientkabelen gir ingen uttrykt eller underforstått lisens til å bruke disse kablene med utstyr som ikke er godkjent, eller som ikke er separat godkjent for bruk sammen med LNC-pasientkabeler.
FORSIKTIG: I HENHOLD TIL AMERIKANSK LOVGIVNING (USA) MÅ DETTE UTSYRET KUN SELGES AV ELLER PÅ FÖRSKRIVNING AV EN LEEGE.
For professional bruk. Se bruksanvisningen for fullstendig informasjon om foreskriving, inkludert indikasjonjer, kontraindikasjonjer, advarsler, forholdsregler og birkninger.
Hvis du opplever alvorlige hendelser med produktet, skal du varsle aktuelle myndigheter i bruklandet samt produsenten.

VAROITUS: YHDYSVALTAIN LIKUN MUKAAN TÄTÄ LAITETTA SAA MYYDÄ VAIN LÄÄKÄRI TAI LÄÄKÄRIN MÄÄRÄKSIESTÄ.
Tarkoitettu ammattikäyttöön. Katso käyttöohjeista täydelliset määräystiedot, kuten käyttöaiheet, vasta-aiheet, varoitukset, varoitomet ja haittavaikutukset.
Jos tuotteenleisnä välttyä väärin, ilmoita asiasta maasi toimivaltaiselle viranomaiselle ja valmistajalle.

SYMBOLI	MÄÄRITELMÄ	SYM-BOLI	MÄÄRITELMÄ	SYMBOLI	MÄÄRITELMÄ
 Uudelleen käytettävä		 Sähkö- ja elektronikkalaitteiden erillinen kehyys (WEEE)	Rx ONLY	Huomio: Yhdysvaltain litovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäri tai lääkärimääräyksellä.	
 Lue käyttöohjeet		 Eran tunnus	 CE	ECIREP	ECIREP European unionin vaatimus-tunnuskuksimerkki
 Valmistaja		 Tilausnumero (malli-numero)	 ECIREP	 Paino	
 Valmistusmaa WW-KK-PP		 ECIREP	 Paino	 Säilytysolosuhteet-ajatus	
 Huomio		 Säilytysolosuhteet-ajatus	 Paino	 Paino	
 Älä hävitä		 Älä hävitä, jos pakkaus on vaurioitunut, ja lue käyttöohjeet	 Paino	 Paino	
 Säilytä, kääntele varoen		 Suurempi kuin	 Paino	 Paino	
 Epästeriili		 Ei sisällä luonnontuotteita	 Paino	 Paino	
 Lääkinnöllinen laite		 Yksilöllinen laatusuus	 Paino	 Paino	
 Maahantuoja		 Jälleljä	 Paino	 Paino	

Potentti: http://www.masimo.com/patents.htm

Masimo, SET,  LNCS, X-Cal ja Rad-5 ovat Masimo Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkkejä.

LNCS®-pasientkabler LNC-serien

BRUKSANVISNING
 Gjenbrukaere
 Ei ikke fersnitst med naturgummitaks
 Ikke-steril

INDIKASJONER

LNCS-serien av pasientkabler har samme indikasjonjer for bruk som de aktuelle sensorene. Se i bruksanvisningen for den kompatible sensoren for indikasjonjer for bruk og informasjon om foreskriving.

BESKRIVELSE

LNCS-serien av pasientkabler brukes med Masimo LNCS®-sensorer. LNC-pasientkabelen og Masimo LNCS®-sensorene er blitt validert med Masimo SET® Rad-5®-pulssyskemer.

ADVARSLER, FÖRSIKTIGHETSREGLER OG MERKNADER

- Kontrollør at kabelen er intakt, og at den ikke har ådelagte ledninger eller skadede deler. Inspiser kablene visuelt, og kast den hvis den har sprekker eller er mistetragt.
- Pasientkabelen må plasseres slik at pasienten ikke kan vikle seg inn i eller kveles av den.
- Masimo-sensorene eller pasientkabelene må ikke omvikles, repareres eller resirkuleres, da dette kan skade de elektriske komponentene og potensielt føre til skade på pasienten.
- Masimo-sensorer og -kabler er laget for bruk sammen med enheter som er utstyrt med Masimo SET®-oksimetri, eller som er lisensiert for bruk sammen med Masimo-sensorer.
- Alle sensorer og kabler er laget for bruk sammen med bestemt monitorer. Kontrollør kompatibiliteten til monitor, kabel og sensor før bruk; ellers kan tryksen bli nedsett, og pasienten kan bli skadet.
- Hvis sensoren eller oksymetermodulen ikke kobles riktig til kabelen, vil det føre til avbrudd i målinger, unøyaktige resultater eller ingen måleverdier.
- For å unngå å skade kabelen må du alltid holde i kontaktene, og ikke i selve kabelen, når endene kobles til eller fra.
- Se alltid i bruksanvisningen for oksymetermodulen hvis du trenger mer detaljerte eller ytterligere instruksjoner.
- For å hindre skade på sensorene eller kabelen ikke dypes eller legges i noen form for væske. Sensoren eller kabelen må ikke steriliseres.
- Obs:** Skift ut kabelen når en melding om å skifte kablene vises, eller når det konsekvent vises en melding om lav signalvaktitet (SIQ) under overvåking av pårløpende pasienter etter gjennomføring av problemløsningsrutinene ved lav signalvaktitet som er oppgitt i brukenhåndboken for overvåkingssenheter.
- Merk:** Kabelen leveres med X-Cal®-teknologi for å minimere risikoen for unøyaktige målinger og uventet avbrudd i pasientovervåking. Kabelen gir oppnill 17 520 timer med pasientovervåkingstid. Skift ut kabelen når pasientovervåkingstiden er oppbrukt. Noen eldre overvåkingssenheter skiller ikke mellom kablene og sensoren. For disse enhetene kan en melding om å skifte ut sensor eller lignende gjelde enten sensoren eller kabelen.

BRUKSANVISNING
A) Koble LNC-pasientkabelen til enheten
1. Plasser kabelkontaktene overfor pasientkabelkontaktene på Masimo SET-instrumentet, og sett den inn.
B) Koble LNC-kabelen til LNCS-sensoren
1. Sett sensorkontaktene helt inn i pasientkabelkontaktene (figur 1).
2. Lukk beskyttelsesdekslet helt (figur 2).
C) Koble LNC-kabelen fra LNCS-sensoren
1. Fjern beskyttelsesdekslet for å få tilgang til sensorkontaktene (figur 3).
2. Trekk bestemt i sensorkontaktene for å ta den av pasientkabelen (figur 4).
ADVARSEL
Ikke bruk LNC-10- eller LNC-14-pasientkabler sammen med PKX2-30-skjåte-kabel.
RENGJÖRING
Tørk av LNC-pasientkabelen med en kompres med 70 % isopropylalkohol, og la den tørke godt.
KOMPATIBILITET
MASSIMO SET. LNC-pasientkabler skal bare brukes sammen med enheter utstyrt med Masimo SET®-teknologi og med kompatible sensorer. Kontakt produsenten av oksymetri-systemet for å få vite om bestemte enheter eller sensormodeller er kompatible. Hver enhetsprodusent er ansvarlig for å avgjøre om deres enheter er kompatible med hver sensormodell. Opplysninger om kompatibilitet: www.masimo.com
GARANTI
Masimo garanterer overfor den opprinnelige kjøperen at dette produktet, når det brukes i henhold til instruksjonene som følger med produktet fra Masimo, vil være fritt for material- og produksjonsfeil i en periode på seks (6) måneder. Engangsprodukter er kun garantier for bruk på én pasient.

DET ÖVERNÄMME ER DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE GARANTIEEN SOM GJELDER FOR PRODUKTENE SOM SELGES AV MASIMO TIL KÖPEREN. MASIMO FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE ANDRE MÖNTLIGE, UTTRYKTE ELLER UNDERFÖRSTÄTTE GARANTIER, INKLUDERT, UBTEN BEGRENSNING, ALLE GARANTIER OM SALGARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FÖRMAL. MASIMOS ENESTE FÖRPLIKTELSE OG KÖPERENS ENESTE RETTSMÖDULIG VED ET GARANTIBRUKSKAL VÆRE, ETTER MASIMOS VALG, REPARASJÖN ELLER UTSKIFTING AV PRODUKTET.

UNNTAK FRA GARANTIEEN

Denne garantien gjelder ikke for produkter der bruksanvisningen som følger med produktet, ikke har vært fulgt, eller som har vært gjenstand for misbruk, forsømmelse, uest eller ekstrem påknytning. Denne garantien gjelder ikke for produkter som er blitt koblet til et ikke-tilknetnet eller system, eller er blitt modifisert, demontert eller montert på nytt. Denne garantien gjelder ikke for sensorer eller pasientkabler som er blitt repossesert, kjørt rundt for ny bruk eller resirkulert.

MASIMO KAN IKKE UDEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIG ÖVERFOR KÖPEREN ELLER ANDRE PERSONER FOR EVENTUELLE UTSLIKTDELE, INDIRIKTE ELLER SPEIELLE SKADER ELLER FÖLGSKADER (INKLUDERT ANNET TAPT FÖRTEJENEST, SELV OM SELSKAPET ER BLITT GÖRT ÖPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR DETTE). MASIMOS ANSVAR FOR PRODUKTER SOM ER SÖLT TIL KÖPEREN I HENHOLD TIL KONTRAKT, GARANTI, ERSTÄTNINGSRETTSREGEL FÖRHOLD ELLER ANDRE KRAV SKAL IKKE UDEN OMSTENDIGHETER ÖVERSTIGE BELÖPET SOM ER BETALT AV KÖPEREN FOR PRODUKTET/PRODUKTENE SOM ER INVOLVERT I ET SLIK KRAV. MASIMO SKAL IKKE UDEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER SOM ÖPPSTÄR I FÖRBINDELSE MED ET PRODUKT SOM ER BLITT ÖMGÖRT, REPARERT ELLER RESIRKULERT. BEGRENSENINGENE I DETTE AVSNITTET SKAL IKKE BETRAKTES SOM EN UTTEKUELLESE AV ENEM FORM FOR ANSVAR SOM I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV OM PRODUKTANSVAR KAN JURIDISK KUN UTÖKUELLES I KONTRAKTEN.

INGEN UNDERFÖRSTÄTT LSENS

Kypö eller besittelse av denne LNC-pasientkabelen gir ingen uttrykt eller underforstått lisens til å bruke disse kablene med utstyr som ikke er godkjent, eller som ikke er separat godkjent for bruk sammen med LNC-pasientkabeler.

FORSIKTIG: I HENHOLD TIL AMERIKANSK LOVGIVNING (USA) MÅ DETTE UTSYRET KUN SELGES AV ELLER PÅ FÖRSKRIVNING AV EN LEEGE.

For professional bruk. Se bruksanvisningen for fullstendig informasjon om foreskriving, inkludert indikasjonjer, kontraindikasjonjer, advarsler, forholdsregler og birkninger.

Hvis du opplever alvorlige hendelser med produktet, skal du varsle aktuelle myndigheter i bruklandet samt produsenten.

Følgende symboler kan være angitt på produktet eller produktmerkningen:					
SYMBOL	DEFINISJON	SYM-BOLI	DEFINISJON	SYMBOL	DEFINISJON
	Følg bruksanvisningen		Separat innsamling for elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).	Rx ONLY	Forsiktig: I henhold til federal lovgivning (USA) skal dette utstyret kun selges av eller på foreskriving av en lege.
	Se bruksanvisningen		Lotnummer		EUs samsvarssmerke
	Produsent		Katalognummer (modellnummer)		Autorisert EU-representant
	Produktprosdato AAAA-MM-DD		Massimo-referanse-nummer		Kroppsspek
	Forsiktig		Fuktighetsbegrensning ved lagring		Lagringstemperaturområde
	Må ikke kastes		Må ikke brukes desom emballasje eller deksel i bruksanvisningen.		Må holdes tett
	Objekt, må behandles med forsiktighet		Større enn		Mindre enn
	Ikke-steril		Er ikke fersnitst med naturgummitaks		Begrensning for atmosfærisk trykk
	Medisinsk utstyr		Unik enhetsidentifikator		Instruksjoner/bruksanvisning-ger/håndbøker er tilgjengelige i elektronisk format på http://www.Masimo.com/TechDocs
	Importør		Distributør		Merk: Elektronisk bruksanvisning er ikke tilgjengelig i alle land.

Potentti: http://www.masimo.com/patents.htm

Masimo, SET,  LNCS, X-Cal og Rad-5 er varemærker som er federalt registrert i USA og tilhører Masimo Corporation.

Kabely pacienta LNCS® Rada LNC

POKYNY K POUŽITÍ
 Pro opakované použití
 Nedotýkejte přirozí látky
 Nesterilní

INDIKACE

Kabel pacienta řady LNC má stejné indikace k použití jako použitelné senzory. Účel použití a informace o určení naleznete v návodu k použití kompatibilního senzoru.

POPIS

Kabel pacienta řady LNC se používá se senzory Masimo LNCS®. Kabel pacienta LNC a senzory Masimo LNCs byly testovány pomocí pulzního oxymetra Masimo SET® Rad-5®.

VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ A POZNÁMKY

- Pečlivě zkontrolujte, aby kabel neměl mechanicky poškození a nemá žádnou ani odřené vodiče či poškozené části. Vizualně kabel kontrolujte, a pokud naleznete poškození nebo změny barvy, zlikvidujte jej.
- Kabel pacienta vedle toho tak, abyste maximálně snížili nebezpečí zachycení či uškrcení pacienta.
- Nepokoušejte se upravovat, opravovat či reyklovat senzory Masimo ani kabely pacienta. Mohlo by dojít k poškození elektrických součástí a v důsledku toho i k ohrožení pacienta.
- Senzory a kabely Masimo jsou určeny pro použití se zařízenými vybavenými omyetrickou technologií Masimo SET® nebo s přísluší licencomyými pro použití senzoru Masimo.
- Všechny senzory a kabely pro určení k použití s konkrétní monitoru. Před každým použitím ověřte kompatibilitu monitoru, kabelu a senzoru, aby nedošlo k narušení činnosti přístroje nebo ke zranění pacienta.
- Pokud není senzor nebo modul oxymetru řádně spojen s kabelem, mohou se odečtené zamenatavět přerušované, nesprávné nebo se nemusí zamenatavět vůbec.
- Abyste se kabel nepoškolil, při zapojování a vypojování jej držte za konektor, a ne za samotný kabel.
- Vždy se řiďte kompletními nebo doplňkovými pokyny uvedenými v návodu k použití oxymetru.
- Senzor nebo kabel nemáte najít, aby je neporučíte do kapsy. Mohlo by se poškodit. Kabel nebo senzor můžete najít, aby je neporučíte do kapsy. Mohlo by se poškodit. Kabel nebo senzor můžete najít, aby je neporučíte do kapsy. Mohlo by se poškodit.
- Upozornění:** Senzor vyměňte tehdy, když se zobrazí výzva k jeho výměně nebo když se po dokončení retestu potvrdí s nímým SIQ dle postupu v uživatelské příručce monitorovačova zařízení tvrdě zobrazuje během monitorování po sobě jdoucím pacienti zpráva o nízkém SIQ.
- Poznámka:** Kabel se dodává s technologií X-Cal®, aby se snížilo riziko nepřesných odečtů a neochvěvného ztrátě monitorování pacienta. Kabel zajistí monitorování pacienta po dobu až 17 520 hodin. Kabel vyměňte, až doba monitorování pacienta vyprší. Některé starší zařízení nedokážou pracovat s kabelem a senzorem. Vždy zařízením mohou zobrazovat zprávu pro výměnu senzoru nebo podobnou zprávu pro senzor i kabel.

POKYNY
A) Připojení kabelu pacienta LNC k zařízení
1. Nátáčte konektor kabelu k protikusu s konektorem na konektoru kabelu pacienta na přísluší Masimo SET a zasuněte jej.
B) Připojení kabelu LNC k senzoru LNCs
1. Konektor senzoru zcela zasuněte do konektoru kabelu pacienta (Obr. 1).
2. Zcela uzavřete ochranný kryt (Obr. 2).
C) Odpojení kabelu LNC od senzoru LNCs
1. Odklopte ochranný kryt, abyste získali přístup ke konektoru senzoru (Obr. 3).
2. Silně zatáhněte za konektor senzoru a odpojte jej od kabelu pacienta (Obr. 4).
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte kabely pacienta LNC-10 ani LNC-14 prodlužovacím kabelem PKX2-30.
ČIŠTĚNÍ
Očistěte kabel pacienta LNC hadříkem namočeným v 70 % isopropylalkoholu a nechte jej zcela oschnout.
KOMPATIBILITA
MASSIMO SET. Kabely pacienta LNC jsou určeny výhradně k použití se zařízeními využívajícími technologii kabelu Masimo SET® a s kompatibilními senzory. Informace o kompatibilitě jednotlivých modelů zařízení a senzorů vždy poskybně výrobce osobních oxymetrů. Každý výrobce je povinen stanovit, zda jeho zařízení kompatibilní s konkrétním modelem senzoru a/nebo kabelu. Informace o kompatibilitě naleznete na adrese: www.masimo.com
ZÁRUKA
Společnost Masimo poskytuje záruku pouze původnímu kupujícímu tohoto produktu, a to pouze pokud je produkt používán v souladu s pokyny dodávanými s produkty společnosti Masimo. Společnost zárukuje, že se u produktu po dobu šesti (6) měsíců neprojevily vadby materiálu ani zpracování. Na produkt na jedno použití se vztahuje záruka pouze při použití u jednoho pacienta.

VŠE UVEDENÉ ZÁRUKY JE VÝHRADNĚ A EXKLUZIVNĚ ZÁRUKOU, KTERÁ SE VZTAHUJE NA PRODUKTY PRODÁVANÉ MASIMO ZA JAKÉKOLI MUKU KUPÍJÍCÍMU. SPOLEČNOST MASIMO VYKLADNĚ ODMITÁ JAKÉKOLI JINÉ ÚSTNÍ, VÝHRDNĚ NEBO PŘEDPOKLÁDÁNÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATE

