


Saisir le nom du produit, le numéro de lot, etc.

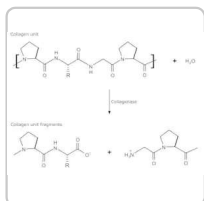

Toutes les
photos (2)

Documents

FDS

COO/COA

 Fiche des
caractéristiques

Plus de
documents »

C9891 ► Sigma-Aldrich.

Collagenase from *Clostridium histolyticum*

★★★★★ (0)

Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid, For general use

Synonyme(s):

Clostridiopeptidase A

Numéro CAS: 9001-12-1

Numéro EC: 232-582-9

NACRES: NA.54

Numéro de classification
(Commission des enzymes):

3.4.24.3 (BRENDA, IUBMB)

Numéro MDL:

MFCD00130830

Référence	Conditionnement	Disponibilité	Prix	Quantité
C9891-25MG	25 MG	Date d'expédition estimée le 10 octobre 2022	Détails... 50,50 €	- +
C9891-100MG	100 MG	Date d'expédition estimée le 10 octobre 2022	Détails... 154,00 €	- +
C9891-500MG	500 MG	Only 3 left in stock (more on the way)	Détails... 471,00 €	- +
C9891-1G	1 G	Date d'expédition estimée le 10 octobre 2022	Détails... 800,00 €	- +
C9891-5G	5 G	Only 2 left in stock (more on the way)	Détails... 3 230,00 €	- +

[Demander une commande en gros](#)

[Ajouter au panier](#)

PRODUITS RECOMMANDÉS




Sigma-Aldrich

C0130

Collagenase from *Clostridium histolyticum*
for general use, Type I, 0.25-1.0 FALGPA units/mg solid,
≥125 CDU/mg solid

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

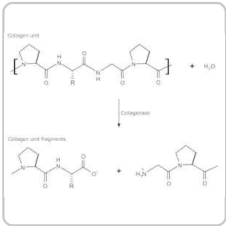

Sigma-Aldrich

C5138

Collagenase from *Clostridium histolyticum*
suitable for release of physiologically active rat
hepatocytes, Type IV, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid,...

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

PROPRIÉTÉS

Niveau de qualité	200
Forme	essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity	≥125 CDU/mg solid 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Poids mol.	68-130 kDa

Solubilité

TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble

application(s)

diagnostic assay manufacturing

Expédié(e)(s) dans

wet ice

Temp. de stockage

-20°C

Vous recherchez des produits similaires ? Visitez [Guide de comparaison des produits](#)

Catégories apparentées[Tissue Dissociation](#)

DESCRIPTION

Application

The enzyme has also been used along with other proteases for the disaggregation of human tumor, mouse kidney, human brain, and lung epithelial tissues. It is also useful in liver and kidney perfusion studies, digestion of pancreas, isolation of nonparenchymal rat liver cells and hepatocytes. The enzyme from Sigma has been used for the digestion of type I collagen from bovine trabecular and cortical bones. It has also been used as a positive control in FALGPA assay on Group B *Streptococci* cells.

Actions biochimiques/physiologiques

Effective release of cells from tissue requires the action of both collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca^{2+}) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa. The pH optimum ranges from 6.3-8.8. The enzyme is typically used to digest the connective components in tissue samples to liberate individual cells. Collagenase treatment can cause some cells to die. Typically, concentrations varying from 0.1 to 5 mg/mL are used for digestion. The duration of reaction varies from 15 minutes to

several hours for a satisfactory efficiency of cell dissociation without causing too much cell death. Krebs Ringer buffer with calcium and BSA is preferred and Zn^{2+} is required for activity. The enzyme recognizes the sequence -R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-, where X is most often a neutral amino acid. Ethylene glycol-bis(β -aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid (EGTA)4; β -mercaptoethanol; glutathione (reduced); thioglycolic acid, sodium; 2,2'-dipyridyl; 8-hydroxyquinoline, cysteine are known to inhibit the enzyme activity.

Collagenase is activated by four gram atom calcium per mole enzyme. It is inhibited by ethylene glycol-bis(beta-aminoethyl ether) - N, N, N',N'-tetraacetic acid, beta-mercaptoethanol, glutathione, thioglycolic acid and 8-hydroxyquinoline.

Attention

As supplied, this product is stable for one year at -20°C. There is no loss in FALGPA or protease activity in 30 days at 37°C, 50°C and -20°C. Solutions of crude collagenase are stable if frozen quickly in aliquots (at 10 mg/mL) and kept frozen at -20°C. Further freeze-thaw cycles will damage the solution. The product retains 100% activity over 7 hours when held on ice.

Définition de l'unité

One collagen digestion unit (CDU) liberates peptides from collagen from bovine achilles tendon equivalent in ninhydrin color to 1.0 μmole of leucine in 5 hours at pH 7.4 at 37 °C in the presence of calcium ions. One FALGPA hydrolysis unit hydrolyzes 1.0 μmole of furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala per min at 25°C. One Neutral Protease unit hydrolyzes casein to produce color equivalent to 1.0 μmole of tyrosine per 5 hr at pH 7.5 at 37°C. One Clostripain Unit hydrolyzes 1.0 μmole of BAEE per min at pH 7.6 at 25°C in the presence of DTT.

Notes préparatoires

This product is equivalent to first 40% ammonium sulfate fraction of Mandl, I., et al., *J. Clin. Invest.*, **32**, 1323 (1953). Solutions are typically prepared at 1-2 mg/mL in TESCA buffer (containing 50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4 at 37°C).

PRODUITS APPARENTÉS

Substrat

F5135

N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala

[View Pricing](#)

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Pictograms



GHS08

Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

H334

Conseils de prudence

P261 - P284 - P501

Classification des risques

Resp. Sens. 1

Code de la classe de stockage

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 1

Flash Point(F)

Not applicable

Point d'éclair C

Not applicable

Équipement de protection individuelle

dust mask type N95 (US),
Eyeshields, Faceshields,
Gloves

DOCUMENTATION

Certificat d'analyse

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'analyse (COA).

Numéro de lot

e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (COA)

Rechercher

Certificat d'origine

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'origine (COO).

Numéro de lot

e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (COO)


Rechercher

Plus De Documents

[Enzyme Explorer](#)

[FDS](#)


LES CLIENTS ONT ÉGALEMENT CONSULTÉ

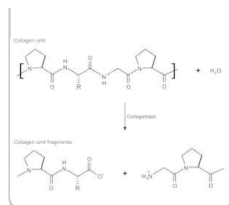

Sigma-Aldrich

C9407**Collagenase from *Clostridium histolyticum***

powder, Suitable for the digestion and isolation of physiologically active pancreatic islet cells, suitable for...

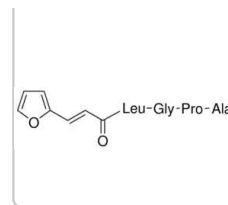[Consulter le prix et la disponibilité](#)


Sigma-Aldrich

F5135**N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala**
[Consulter le prix et la disponibilité](#)

ARTICLES REVUS PAR DES PAIRS

Characterization and population dynamics of germ cells in adult macaque testicular cultures.

Swati Sharma et al.

PloS one, 14(6), e0218194-e0218194 (2019-06-22)

From a biological and clinical perspective, it is imperative to establish primate spermatogonial cultures. Due to limited availability of human testicular tissues, the macaque (*Macaca fascicularis*) was employed as non-human primate model. The aim of this study was to characterize

Characterization of urinary degradation products derived from type I collagen. Identification of a beta-isomerized Asp-Gly sequence within the C-terminal telopeptide (alpha1) region.

C Fledelius et al.

The Journal of biological chemistry, 272(15), 9755-9763 (1997-04-11)

The heterogeneity of urinary degradation products of C-terminal telopeptides derived from the alpha1 chain of human type I collagen was investigated and characterized. The urinary fragments characterized in this study consisted of two cross-linked (X) amino acid sequences derived from

Mammary molecular portraits reveal lineage-specific features and progenitor cell vulnerabilities.

Alison E Casey et al.

The Journal of cell biology, 217(8), 2951-2974 (2018-06-21)

The mammary epithelium depends on specific lineages and their stem and progenitor function to accommodate hormone-triggered physiological demands in the adult female. Perturbations of these lineages underpin breast cancer risk, yet our understanding of normal mammary cell

composition is incomplete.

3T3-L1 cells and perivascular adipocytes are not equivalent in amine transporter expression.

Alex Ismail et al.

FEBS letters, 591(1), 137-144 (2016-12-08)

Rat perivascular adipose tissue (PVAT) stores, takes up, and releases norepinephrine (NE; Ayala-Lopez et al. (2014) Pharmacol Res Perspect 2, e00041). We hypothesized that 3T3-L1 adipocytes would exhibit similar behaviors and, thus, could serve as a model for PVAT adipocytes.

Cell-associated collagenolytic activity by group B streptococci.

R J Jackson et al.

Infection and immunity, 62(12), 5647-5651 (1994-12-01)

Group B streptococci (GBS) are important pathogens in neonatal sepsis, pneumonia, and meningitis. The ability of GBS to invade the collagen-rich amniotic membrane of the placenta has been shown in vitro. In the presence of GBS, the collagen fibrils of

[Afficher tous les articles scientifiques apparentés](#)


PROTOCOLES ET ARTICLES SCIENTIFIQUES

Protocoles

Enzymatic Assay of Collagenase (EC 3.4.24.3) using FALGPA (N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala)

This procedure may be used for Collagenase products.


PRODUITS CONSULTÉS RÉCEMMENT

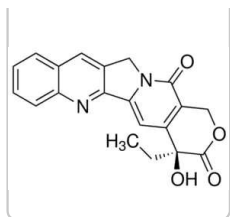

Sigma-Aldrich

C9911**(S)-(+)-Camptothecin**

≥90% (HPLC), powder

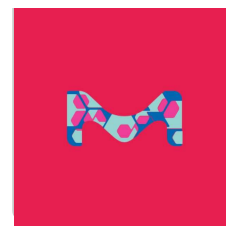[Consulter le prix et la disponibilité](#)

Sigma-Aldrich

C9999**Citrate Buffer, pH 6.0, 10×, Antigen Retriever**[Consulter le prix et la disponibilité](#)

Évaluations

[Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit](#)

Questions

[Soyez le premier à poser une question](#)

SERVICE TECHNIQUE

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

[Contacter notre Service technique](#)

Le contenu de cette page vous a-t-il été utile ?*



Que pouvons-nous faire pour améliorer cette page spécifique de notre site Internet ?

Envoyer

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.

[Conditions d'utilisation du site](#) | [Politique de confidentialité](#) | [Conditions générales de vente](#) | [Consentement relatif au copyright](#) | [Paramètres des cookies](#)