

La gamme complète pour l'hôpital,  
le cabinet médical et le laboratoire





Fermeture métallique haut de gamme avec design moderne


Diminution de la stase séparée et bien dosée

Coton résistant, bien toléré par la peau

Sans latex et autoclavable



**Garrot vert 902**

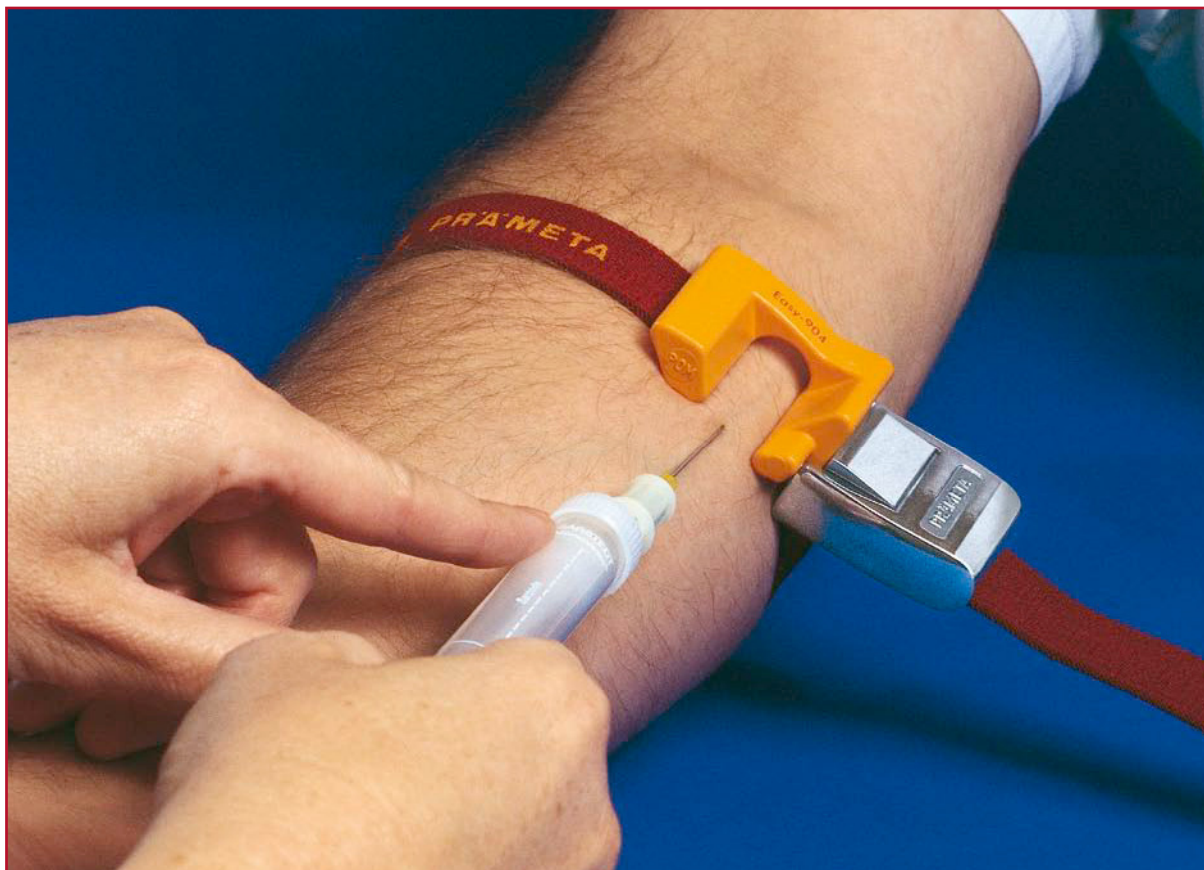

Introduction sûre de l'aiguille grâce à l'immobilisation de la veine

La veine ponctionnée n'est pas comprimée

Prise de sang rapide, sans concession au niveau de la qualité

Remplissage optimal de la veine - ponction simplifiée, y compris avec des aiguilles à grande lumière

Injection de médicaments dans le sang qui circule sans obstacle sans avoir à enlever le garrot

Acidose tissulaire réduite en cas de compression prolongée

Peut aussi être utilisé comme garrot veineux ordinaire.

Il convient donc pour l'équipement de la trousse du médecin et du nécessaire de secours.



## Garrot Easy 904

Le garrot veineux haute performance multifonctionnel





## Garrot gris 901

Utilisation facile, grâce une technique éprouvée

Fermeture métallique haut de gamme pour un desserrage progressif

Bande en coton résistante bien tolérée par la peau

Peut être stérilisé en autoclave



Motif attrayant avec animaux et magicien

Primé IF prix design

Ergonomie parfaite

Diminution de la stase séparée et bien dosée

Pas de pincement de la peau - même en cas de bras très minces

Sans métal et autoclavable

## 906 Magic + Zoo



Hémostase rapide, ciblée et précise sous contrôle visuel

Augmentation ponctuelle de la pression par la plaquette de compression

Réglage de la compression à tout moment

Arrêt des hémorragies traumatiques de la tête et des membres

Compression des sites de ponction artérielle

Indicateur du début de l'hémostase

#### Exemples d'applications

**1** Appliqué en quelques secondes comme bandage compressif. Augmentation de la pression par serrage de la bande. Diminution progressive de la compression par pression du pouce sur le bouton poussoir.

**2** Optimal pour pratiquer une saignée non sanglante en cas d'œdème pulmonaire pour soulager rapidement le cœur.

**3** Employé comme bandage compressif pour éviter les hématomes après une angiographie.

**4** Peut être utilisé comme bandage compressif pour la phlébographie.

**5** Immobilisation ou pose d'attelle en cas de fracture ou de soupçon de fracture du bras ou de la jambe.

**6** Fixation ou immobilisation des bras et des jambes sur le brancard pour le transport du patient.




**7** Le garrot d'urgence peut être utilisé pour la prophylaxie des hématomes des parties molles en cas d'accident de sport ou de travail.

**8** Arrêt d'une hémorragie artérielle dans la région des tempes au moyen de la boucle de serrage.



## Garrot d'urgence 910 A

Un accessoire de professionnel pour les secouristes  
pour le traitement des hémorragies traumatiques de la tête et des membres

Article 901	Article 902	Article 904	Article 906	Article 910
<b>Garrot gris</b> Pour les applications courantes	<b>Garrot vert</b> Optimal pour le praticien exigeant. Il a fait ses preuves des millions de fois	<b>Garrot Easy</b> Le garrot haute performance multifonctionnel	<b>Magic + Zoo</b> L'ami de l'enfant	<b>Garrot d'urgence</b> Le spécialiste des urgences
Fermeture métallique résistante en alliage spécial haut de gamme			Grilon®	Hostaform®
Coton mélangé très bien toléré par la peau – excellente élasticité				
Décompression progressive				
Se détache facilement d'un côté	Se détache facilement d'un côté - par pression sur le bouton		Se détache facilement d'un côté	Se détache facilement par ouverture de la boucle
Enfilage de la bande dans la fermeture	Fermeture facile par pression sur le bouton de verrouillage		Fermeture facile	Enfilage et fermeture faciles
Utilisation à deux mains	Utilisation d'une seule main = pour serrer, tirer sur l'extrémité de la bande			Utilisation à deux mains
Ne coince pas la peau et les poils				
Toutes les pièces peuvent être stérilisées en autoclave – jusqu'à 120 °C et 1,1 bar				
Eprouvé depuis des dizaines d'années	Optimal pour toutes les applications courantes  Ne contient pas de latex  <div>Accessoire: bande de rechange = 902-2</div> <div></div> <div></div> <div>= 902-3</div>	Introduction sûre de l'aiguille grâce à l'immobilisation de la veine  La veine ponctionnée n'est pas compressée  Prise de sang rapide, sans concession au niveau de la qualité  Remplissage optimal de la veine – ponction simplifiée, y compris avec des aiguilles à grande lumière  Injection de médicaments dans le sang qui circule sans obstacle sans avoir à enlever le garrot  Acidose tissulaire réduite en cas de compression prolongée  Pour les applications spéciales : niveau de compression = niveau de ponction  Pour les applications ordinaires : p. ex., peut aussi être posé sur le bras  Accessoire: bande de rechange = 904-4	Convient particulièrement pour les bras minces des enfants  906 Magic 906 Zoo	Hémostase rapide, ciblée et précise sous contrôle visuel  Augmentation ponctuelle de la pression par la plaquette de compression  Réglage de la compression à tout moment  Arrêt des hémorragies traumatiques de la tête et des membres  Compression des sites de ponction artérielle  Indicateur du début de l'hémostase  Accessoires: boucle de serrage spéciale pour la compression des artères = 910-20 Bande de rechange = 910-10