




MSFBN6B10 | MultiScreen_{HTS}-FB, 1,0 / 0,65 µm, opaque, non stérile

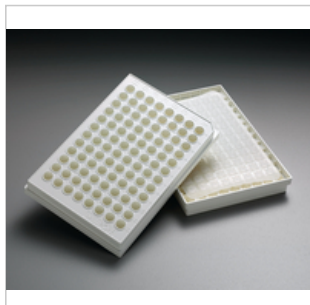

Etudes de fixation récepteurs/ligands,
préparation d'échantillons, dosages
enzymatiques avec précipitation, purification
d'ADN

MSFBN6B10

10

Le prix n'a pas pu être récupéré

La quantité minimale doit être un
multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

[Aperçu](#) [Documentation complémentaire](#) [Produits & Applications associés](#)

Aperçu

Description
Informations produit
Applications
Informations biologiques
Informations physico-chimiques
Dimensions
Informations sur les matériaux
Informations sur l'emballage

Description	
Référence	MSFBN6B10
Nom de marque	MultiScreen
Description	MultiScreen _{HTS} -FB, 1,0 / 0,65 µm, opaque, non stérile
Informations générales	No matter what application you're working with, Millipore has a plate developed to meet your specific needs. MultiScreen plates have a long history as a reliable tool for the advancement of drug discovery and life science research. HTS Filter Plates - MultiScreenHTS plates are specifically developed for high-throughput use with automated work stations. Rigid sidewalls improve handling and ample surfaces are provided for bar code labels. Wells are individually sealed to prevent incubation crosstalk and the underdrain is removable for access to the filters. Filter plates are available in 96- and 384-well platforms with a broad selection of membranes and plastics. - Millipore's new MultiScreen HTS+ Hi flow filter plate design lessens non-specific binding and reduces variability in both background and signal intensities specifically for biochemical screening assays. Classic Filter Plates - The original multiwell design is valuable for many applications which require immersing the filter in an assay tray. The easily removable underdrain and unique plate design are ideal for assays such as Elispot, PAMPA, cell screening (migration, invasion or chemotaxis) or for topcount detection users. Accessory – MultiScreenHTS Vacuum Manifold - The MultiScreenHTS Vacuum manifold was designed specifically to work with MultiScreenHTS filter plates. The combination results in optimal filtration characteristics and seamless automation integration. Millicell Assay Plates - In addition to the traditional assay plate format, filter plates are also available with cell culture trays for growing and assaying suspension and adherent cell lines. Cells grown on filter plates differentiate better than those grown on traditional plastic substrates, resulting in more in vivo-like results. This filter plate/tray combination can be used for a variety of cellular assays, including, transport, toxicity and screening assays.

Informations produit

Compatibles avec
une automatisation

Yes

Informations produit	
Code du filtre	FB
Code couleur	Opaque
Nbre de puits	96

Applications	
Application	Etudes de fixation récepteurs/ligands, préparation d'échantillons, dosages enzymatiques avec précipitation, purification d'ADN
Principales applications	• Tests de fixation ligand/récepteur • Préparation d'échantillons • Essais enzymatiques avec précipitation • Purification d'ADN
Notes opératoires	Maximum 1000 x g

Informations biologiques	
Stérilité	Non stérile

Informations physico-chimiques	
Dimension de pores	1.0 / 0.65 µm

Dimensions	
Hauteur	14.4 mm
Largeur	85.5 mm
Longueur	128 mm
Surface de filtration	0.26 cm²
Volume	50 µL–250 µL

Informations sur les matériaux	
Chimie	• Fibre de verre • PVDF hydrophile
Matériau du dispositif	• Barex®/TiO₂

Informations sur l'emballage	
Quantité	10

[Nous contacter](#)

[Groupe Merck](#) |
 [Mentions légales](#) |
 [Conditions d'utilisation](#) |
 [Respect de la vie privée](#) |
 [Conditions de vente](#)

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.