




PLGC07610 | Disques d'ultrafiltration, PLGC, cellulose régénérée Ultracel, PMNL 10 kD, 76 mm

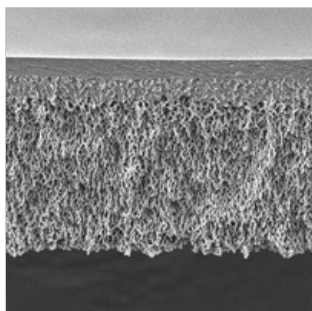

Recherche en biologie

PLGC07610

10

Le prix n'a pas pu être récupéré

La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

[Aperçu](#) [Documentation complémentaire](#) [Produits & Applications associés](#)

Aperçu

[Description](#)
[Informations produit](#)
[Applications](#)
[Informations biologiques](#)
[Dimensions](#)
[Informations sur les matériaux](#)
[Informations sur l'emballage](#)
[Tableau de caractéristiques principal](#)

Tableau de caractéristiques principal

Chimie	Principales applications	Diamètre du filtre (ø)	PMNL
Regenerated Cellulose (RC)	Purification de protéines, Concentration de protéines	76 mm	10 kDa

Description	
Référence	PLGC07610
Replaces	13642
Nom de marque	Ultracel
Description	Disques d'ultrafiltration, PLGC, cellulose régénérée Ultracel, PMNL 10 kD, 76 mm
Informations générales	Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice. Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel® regenerated cellulose and Biomax® polyethersulfone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters. Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules. Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media. Microfiltration Durapore® PVDF cut discs are available 0.1 µm, 0.22 µm, and 0.45 µm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters. Features & Benefits: •Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm •Both Ultracel®, Durapore®, and Biomax® membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements •Compatible with Amicon® Stirred Cells Applications: Concentration, Buffer Exchange, Desalting

Informations produit

Device Configuration	Ultrafiltration Discs
----------------------	-----------------------

Informations produit	
Code du filtre	PLGC
Type de filtre	Ultrafiltration
PMNL	10 kDa
Applications	
Application	Recherche en biologie
Principales applications	• Purification de protéines • Concentration de protéines
Informations biologiques	
Milieux de culture	Ultracel [®]
Dimensions	
Surface de filtration	41.8 cm ²
Diamètre du filtre (ø)	76 mm
Informations sur les matériaux	
Chimie	• Regenerated Cellulose (RC)
Informations sur l'emballage	
Quantité	10

[Nous contacter](#)

[Groupe Merck](#) | [Mentions légales](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Respect de la vie privée](#) | [Conditions de vente](#)

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.