




PLHK06210 | Disques d'ultrafiltration, PLHK, cellulose régénérée Ultracel, PMNL 100 kD, 63,5 mm

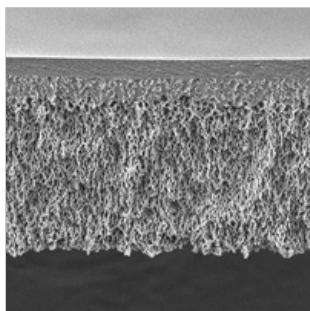

100 kDa NMWL, Ultracel regenerated cellulose,
63.5 mm diameter

PLHK06210

10

Le prix n'a pas pu être récupéré

La quantité minimale doit être un
multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

[Aperçu](#) [Documentation complémentaire](#) [Produits & Applications associés](#)

Aperçu

Description
Informations produit
Applications
Informations biologiques
Dimensions
Informations sur les matériaux
Informations sur l'emballage
Tableau de caractéristiques principal

Tableau de caractéristiques principal

Chimie	Principales applications	Diamètre du filtre (ø)	PMNL
Regenerated Cellulose (RC)	Purification de protéines, Concentration de protéines	63.5 mm	100 kDa

Description	
Référence	PLHK06210
Replaces	14432
Nom de marque	Ultracel
Description	Disques d'ultrafiltration, PLHK, cellulose régénérée Ultracel, PMNL 100 kD, 63,5 mm
Informations générales	Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice. Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel® regenerated cellulose and Biomax® polyethersulfone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters. Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules. Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media. Microfiltration Durapore® PVDF cut discs are available 0.1 µm, 0.22 µm, and 0.45 µm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters. Features & Benefits: •Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm •Both Ultracel®, Durapore®, and Biomax® membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements •Compatible with Amicon® Stirred Cells Applications: Concentration, Buffer Exchange, Desalting

Informations produit

Device Configuration	Ultrafiltration Discs
----------------------	-----------------------

Informations produit	
Code du filtre	PLHK
Type de filtre	Ultrafiltration
PMNL	100 kDa

Applications	
Application	100 kDa NMWL, Ultracel regenerated cellulose, 63.5 mm diameter
Principales applications	- Purification de protéines - Concentration de protéines

Informations biologiques	
Milieux de culture	Ultracel®

Dimensions	
Surface de filtration	28.7 cm²
Diamètre du filtre (ø)	63.5 mm

Informations sur les matériaux	
Chimie	Regenerated Cellulose (RC)

Informations sur l'emballage	
Quantité	10

[Nous contacter](#)

[Groupe Merck](#) |
 [Mentions légales](#) |
 [Conditions d'utilisation](#) |
 [Respect de la vie privée](#) |
 [Conditions de vente](#)

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.