

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
B404435	PINCE DISSECTION MICRO ADSON L:120MM 1X2 GRIFFES MORS STRIES	3661219454977
	MICRO ADSON DISSECTING FORCEPS L:120MM 1X2 TEETH SERRATED JAWS	 3 661219 454977

Catalogues / catalogs

ORL 2021

Chapitre-page

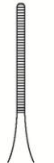
12

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Pinces à dissection délicates - Delicate dissecting forceps - Pinzas para disección delicadas

ADSON				MICRO ADSON				
	B40440	B40445	B404430	12 cm - 4 3/4"	B40447	B40446	B404435	
	B404450	B404451	-	15 cm - 6"	B404470	B404471	-	

Sans griffes Without teeth Sin dientes	1 x 2 griffes 1 x 2 teeth 1 x 2 dientes	1 x 2 griffes 1 x 2 teeth 1 x 2 dientes	Sans griffes Without teeth Sin dientes	1 x 2 griffes 1 x 2 teeth 1 x 2 dientes	1 x 2 griffes 1 x 2 teeth 1 x 2 dientes
					
					
B40440 12 cm - 4 3/4"	B40445 12 cm - 4 3/4"	B404430 12 cm - 4 3/4"	B40447 12 cm - 4 3/4"	B40446 12 cm - 4 3/4"	B404435 12 cm - 4 3/4"

12







LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
B404435	PINCE DISSECTION MICRO ADSON L:120MM 1X2 GRIFFES MORS STRIES	3661219454977
	MICRO ADSON DISSECTING FORCEPS L:120MM 1X2 TEETH SERRATED JAWS	 3 661219 454977

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :

Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions :

Voir désignations produits

ORL 2021

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

12

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).