

|                   |                                                                  |                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | <b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b><br><b>PRODUCT TECHNICAL SHEET</b> | <b>FAQ 026 INFO</b><br><b>Indice :</b> 2<br><b>Date :</b> 01/06/2018 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE     | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                                                                           | CODE EAN                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B80496</b> | ECARTEUR GOSSET GRAND MODELE AVEC 2 BRANCHES MOBILES<br>OUVERTURE MAXIMALE 260MM VALVES P:60MM I:45MM | 3661219012504                                                                       |
|               | GOSSET RETRACTOR BIG MODEL WITH 2 MOBILE ARMS MAXIMAL<br>OPENING 260MM BLADES DEPTH 60MM WIDTH 45MM   |  |

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

07-088


### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

## L A N D A N G E R

Écarteurs - Retractors - Separadores

---

### GOSSET

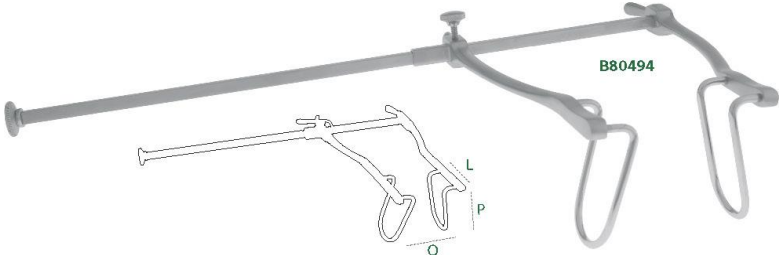

**B80494**

1 branche mobile  
1 mobile arm  
1 brazo móvil

|                | O      | P     | L     |
|----------------|--------|-------|-------|
| <b>B80486</b>  | 75 mm  | 25 mm | 22 mm |
| <b>B80488</b>  | 120 mm | 35 mm | 30 mm |
| <b>B804900</b> | 180 mm | 60 mm | 45 mm |
| <b>B80494</b>  | 280 mm | 60 mm | 45 mm |

2 branches mobiles  
2 mobile arms  
2 brazos móviles

|               | O      | P     | L     |
|---------------|--------|-------|-------|
| <b>B80496</b> | 260 mm | 60 mm | 45 mm |



**B80498**

|  | P     | L     |
|--|-------|-------|
|  | 65 mm | 85 mm |

Valve médiane  
Center blade  
Valva mediana



Curseur  
Cursor  
Cursor

7,3 mm



**B80500**

O : Ouverture - Blades opening - Abertura de las hojas  
P : Profondeur - Depth - Profundidad  
L : Largeur - Width - Anchura

**VII - 88**



1/2

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                                                                    | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B80496    | ECARTEUR GOSSET GRAND MODELE AVEC 2 BRANCHES MOBILES<br>OUVERTURE MAXIMALE 260MM VALVES P:60MM I:45MM | 3661219012504                                                                                          |
|           | GOSSET RETRACTOR BIG MODEL WITH 2 MOBILE ARMS MAXIMAL<br>OPENING 260MM BLADES DEPTH 60MM WIDTH 45MM   | <br>3 661219 012504 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

45182

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X30Cr13(1.4028) + X2CrNi19-11(1.4306)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

Landanger 2015

07-088

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*