

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 1 / 4 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

INFORMATION DU FABRICANT / MANUFACTURER INFORMATION

Document <i>Document</i>	<i>FICHE TECH I05033x-xx</i>	Version <i>Version</i>	2021-02-09
	LANDANGER ZI La Vendue 52000 Chaumont - France		
Classification CE <i>Classification CE</i>	IIa		

PRODUITS / PRODUCTS


REFERENCES / <i>REFERENCES</i>	DESIGNATIONS / DESIGNATIONS	
I050330-25	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 2.0MM LU 250MM	LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 2.0MM WL 250MM
I050330-30	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 2.0MM LU 300MM	LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 2.0MM WL 300MM
I050330-35	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 2.0MM LU 350MM	LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 2.0MM WL 350MM
I050330-45	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 2.0MM LU 450MM	LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 2.0MM WL 450MM
I050330-55	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 2.0MM LU 550MM	LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 2.0MM WL 550MM
I050331-25	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 2.5MM LU 250MM	LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 2.5MM WL 250MM
I050331-30	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 2.5MM LU 300MM	LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 2.5MM WL 300MM
I050331-35	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 2.5MM LU 350MM	LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 2.5MM WL 350MM
I050331-45	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 2.5MM LU 450MM	LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 2.5MM WL 450MM
I050331-55	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE	LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 2.5MM WL 550MM

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 2 / 4 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

	2.5MM LU 550MM	
I050332-25	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 3.0MM LU 250MM	<i>LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 3.0MM WL 250MM</i>
I050332-30	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 3.0MM LU 300MM	<i>LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 3.0MM WL 300MM</i>
I050332-35	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 3.0MM LU 350MM	<i>LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 3.0MM WL 350MM</i>
I050332-45	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 3.0MM LU 450MM	<i>LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 3.0MM WL 450MM</i>
I050332-55	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 3.0MM LU 550MM	<i>LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 3.0MM WL 550MM</i>
I050333-25	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 3.5MM LU 250MM	<i>LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 3.5MM WL 250MM</i>
I050333-30	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 3.5MM LU 300MM	<i>LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 3.5MM WL 300MM</i>
I050333-35	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 3.5MM LU 350MM	<i>LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 3.5MM WL 350MM</i>
I050333-45	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 3.5MM LU 450MM	<i>LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 3.5MM WL 450MM</i>
I050333-55	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 3.5MM LU 550MM	<i>LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 3.5MM WL 550MM</i>
I050334-25	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 4.0MM LU 250MM	<i>LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 4.0MM WL 250MM</i>
I050334-30	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 4.0MM LU 300MM	<i>LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 4.0MM WL 300MM</i>
I050334-35	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 4.0MM LU 350MM	<i>LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 4.0MM WL 350MM</i>
I050334-45	CANULE ASPIRATION LARYNGE BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 4.0MM LU 450MM	<i>LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA LUER-LOCK/TUBE 4.0MM WL 450MM</i>
I050334-55	CANULE ASPIRATION LARYNGE	<i>LARYNGEE BLUNT SUCTION CANNULA</i>

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 Indice : 5 Page : 3 / 4 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	
	BOUTONNEE LUER-LOCK/TUBE 4.0MM LU 550MM	LUER-LOCK/TUBE 4.0MM WL 550MM

PHOTO OU SCHEMA DU PRODUIT / PHOTO OR SCHEMA OF PRODUCT

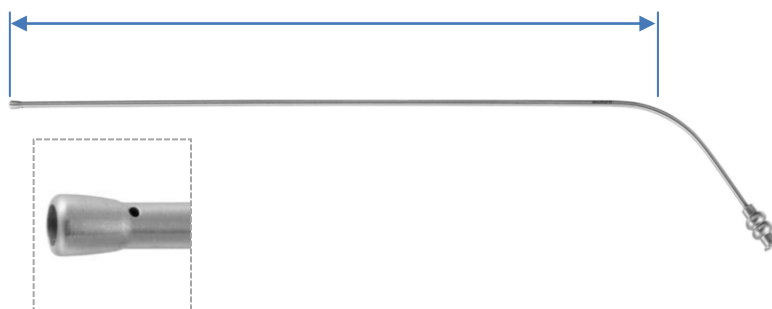

PERFORMANCES REVENDIQUEES / INTENDED USE

instruments chirurgicaux dédiés à la conduite des fluides dans ou hors du corps lors d'interventions chirurgicales

Instrumentation réutilisable pour la chirurgie ouverte. La canule d'aspiration est utilisable pour aspirer du sang, du sérum physiologique, de l'eau stérile et des débris tissulaires en fonction du diamètre de la canule utilisée. Il offre une bonne visibilité au chirurgien. La canule peut être utilisée pour injecter des liquides dans le corps

surgical instruments dedicated to conduct fluids in or out of the body during surgical procedures
Reusable instrumentation for open surgery. The suction cannula is usable to suck up blood, physiological serum, sterile water and tissue debris depending on the diameter of the cannula used. It provides a good visibility to the surgeon. The cannula can be used to inject liquids into the body

CARACTERISTIQUES / FEATURES

➤ Dimensions / Dimensions

Voir libellé / See designation

➤ Matériaux (type et nuance) / Materials (type and grade)

X8CrNiS18-9 (1.4305)

➤ Durée de vie / Life-time

L'espérance de vie estimée des instruments chirurgicaux entièrement métalliques est de 10 ans

The estimated life expectancy for surgical instruments made entirely of metal is 10 years.

➤ Stockage / Storage

Stocker dans un endroit propre et sec.

Store in a clean and dry place.

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 4 / 4 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

➤ Nettoyage, pré-désinfection / Cleaning, pre-disinfection

Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Standard conditions for reusable surgical instruments.

➤ Stérilisation / Sterilization

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

<i>Saturated steam sterilization method</i>	<i>Temperature</i>	<i>Time</i>	<i>Drying time</i>	<i>Absolute pressure</i>
<i>Pre-vacuum</i>	<i>132 °C (270 °F)</i>	<i>4 minutes</i>	<i>30 minutes</i>	<i>2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi</i>
<i>Pre-vacuum</i>	<i>134 °C (273 °F)</i>	<i>3 minutes</i>	<i>35 minutes</i>	<i>3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi</i>
<i>Pre-vacuum</i>	<i>134 °C (273 °F)</i>	<i>5 minutes</i>	<i>35 minutes</i>	<i>3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi</i>
<i>Pre-vacuum</i>	<i>134 °C (273 °F)</i>	<i>18 minutes</i>	<i>35 minutes</i>	<i>3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi</i>

EMBALLAGE / PACKAGING

Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Unité de vente : 1
Polyethylene plastic pouch (PE).
Sales unit:1