

|                   |                                                                  |                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | <b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b><br><b>PRODUCT TECHNICAL SHEET</b> | <b>FAQ 026 INFO</b><br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                                                              | CODE EAN                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I051353   | SPATULE ABAISSE LANGUE 38X100MM AVEC CANAL CENTRAL ET OUVERTURE A GAUCHE DE RUSSEL-DAVIS | 3661219404491                                                                                       |
|           | RUSSEL-DAVIS TONGUE DEPRESSOR 38X100MM WITH CENTRAL CHANNEL AND OPENNING LEFT SIDE       |  3 661219 404491 |

Catalogues / catalogs

ORL 2021

Chapitre-page

293

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

## L A N D A N G E R

Ouvre-bouches - Mouth-gags - Abridor de bocas

**Modèle mince**  
Slim model  
Modelo delgado

N° 1 - 18 x 55 mm **I051345**

N° 2 - 22 x 65 mm **I051346** 

N° 3 - 27 x 70 mm **I051347**

**Sortie côté gauche**  
Left side exit  
Salida del lado izquierdo

N° 1 - 28 x 65 mm **I051350**

N° 2 - 32 x 75 mm **I051351**

N° 3 - 37 x 80 mm **I051352** 

N° 4 - 38 x 100 mm **I051353**

N° 5 - 46 x 108 mm **I051354**

**WUERZBURG**

N° 1 - 28 x 67 mm **I051355**

N° 2 - 32 x 75 mm **I051356**

N° 3 - 34 x 83 mm **I051357** 

N° 4 - 37 x 96 mm **I051358**

N° 5 - 38 x 103 mm **I051359**

**RING**

|                   |                            |                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Droite<br>Right<br>Derecha | Gauche<br>Left<br>Izquierda                                                                        |
| N° 2 - 23 x 58 mm | <b>I051364</b>             | <b>I051360</b>                                                                                     |
| N° 3 - 27 x 72 mm | <b>I051365</b>             | <b>I051361</b>  |
| N° 4 - 34 x 87 mm | <b>I051366</b>             | <b>I051362</b>                                                                                     |
| N° 5 - 37 x 95 mm | <b>I051367</b>             | <b>I051363</b>                                                                                     |

**HERBERHOLD**

N° 1 - 28 x 63 mm **I051370**


N° 2 - 33 x 73 mm **I051371** 

N° 3 - 37 x 82 mm **I051372**

N° 4 - 42 x 91 mm **I051373**



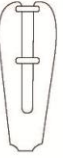

Copyright © LANDANGER - 2018 - 2021

 1/3

**293**

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                                                       | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I051353   | SPATULE ABAISSE LANGUE 38X100MM AVEC CANAL CENTRAL ET OUVERTURE A GAUCHE DE RUSSEL-DAVIS | 3661219404491                                                                                          |
|           | RUSSEL-DAVIS TONGUE DEPRESSOR 38X100MM WITH CENTRAL CHANNEL AND OPENNING LEFT SIDE       | <br>3 661219 404491 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I-MDR

Code GMDN :  
*GMDN code :*

45918

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X20Cr13(1.4021) + X15Cr13(1.4024)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* See products description  
Chapitre-pages

ORL 2021

293

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* Polyethylene plastic pouch (PE).