

GAMME GETINGE CM 320 TUNNEL DE LAVAGE MULTI-CHAMBRES



*Toujours à vos côtés

Always with you*

PRISE EN COMPTE DE L'HYGIÈNE À UN NIVEAU SUPÉRIEUR

Le Getinge CM 320 est un tunnel de lavage multi-chambres fiable et hautement performant qui associe une capacité élevée et un design compact. Modulaire et richement doté en accessoires, il répond facilement aux besoins d'une stérilisation centralisée moderne. Mais plus que tout, le Getinge CM 320 offre un tout nouveau niveau d'hygiène, basé sur notre expérience de l'hygiène et de la maîtrise de la contamination.

Conçu pour l'hygiène

Le tunnel de lavage multi-chambres répond à des exigences très élevées en termes d'hygiène, grâce à une combinaison unique de fonctions spéciales :

- aucune réutilisation de l'eau entre phases
- vidange systématique complète des réservoirs et des canalisations
- surface interne des chambres complètement lisse
- vannes et canalisations en inox
- système de transport très facile à nettoyer

Satisfait aux normes les plus exigeantes

Le tunnel de lavage CM 320 a été conçu conformément aux exigences des normes les plus strictes, avec en particulier l'EN ISO 15883-1. Le Getinge CM 320 a été testé et validé par un organisme indépendant.

Séchage efficace et efficient

Basé sur le principe de la circulation d'air à chaque point de la charge, notre système de séchage à double action permet un résultat optimum et très rapide.

Service simplifié


Le contrôle visuel du process est possible constamment – même en fonctionnement. Le joint de porte gonflable très résistant assure l'étanchéité de la chambre. L'automate vous signale automatiquement les interventions nécessaires, par exemple, le remplacement des bidons de détergent, etc...



Le système de séchage très performant à double action propice à un résultat optimum.



Contrôle à tout instant. La porte vitrée facilite l'inspection des processus de lavage et de désinfection.

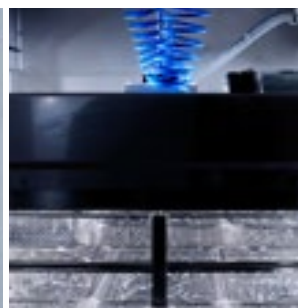

Intégration dans le tunnel d'un module à ultrasons, plateau 15 DIN, en option.



Nettoyage simplifié. Le système de transport à rouleaux facilite l'accès et la maintenance.

Accessibilité d'un seul côté
(droite ou gauche)

Une porte à charnières (en option) donne un accès ergonomique et rapide qui facilite le service et la maintenance, y compris le remplacement des bidons de détergent.

Fonctionnement convivial

Le système de commande intuitif autorise un fonctionnement simple, avec écran tactile personnalisable.

Sélection automatique de programme

Le Getinge CM 320 offre une large sélection de programmes.

Le système de contrôle sélectionne automatiquement le programme approprié aux chariots de lavage.



Capacité élevée

La chambre de lavage permet le traitement simultané de 15 plateaux DIN.

Système de vidange
qui permet l'élimination de tous résidus
d'eau.

La photo représente un tunnel avec en option l'accès à la maintenance à droite

Certificat

Getinge CM320 a été testé et approuvé
par un organisme indépendant.



PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Conçu pour satisfaire aux exigences d'hygiène les plus strictes, le tunnel de lavage Getinge CM 320 traite les articles à une cadence élevée, contribuant ainsi à la performance globale de votre service de stérilisation.

À vous les commandes

Le Getinge CM 320 possède un système de commande convivial et performant. Un scanner lit automatiquement les codes à barres, sélectionne le processus correct et enclenche automatiquement toutes les étapes.

La traçabilité informatique

Le Getinge CM 320 est prévu pour être connecté à T-DOC, le logiciel de système d'assurance qualité de Getinge qui suit et documente votre production. T-DOC enregistre et centralise les informations du processus de tous vos équipements. Vous pouvez étudier un processus à tout moment, sur la base d'un graphique ou des valeurs numériques du journal.

Facilité de chargement et déchargement

Les charges sont automatiquement transférées d'une position à une autre par un système à rouleaux inox rapide, simple et performant.

Haute capacité

La chambre dotée d'une capacité de 15 plateaux DIN associée à des temps de processus les plus rapides apporte une contribution essentielle à la performance générale de votre service de stérilisation.

Système hautement adaptable

Le Getinge CM 320 est compatible avec la gamme complète des accessoires Getinge. Il satisfait à pratiquement toutes les exigences ! C'est pourquoi le tunnel CM 320 est compatible avec les laveurs-déinfecteurs Getinge 8668 et Getinge 88 Turbo.



Traçabilité

Le Getinge CM 320 peut être relié à T-DOC, notre système unique de documentation et traçabilité complète de chaque article, lot ou processus.



Sélection automatique du programme


Le système de commande du Getinge CM 320 lit les codes à barres sur les chariots de lavage, sélectionne et lance automatiquement le processus.



Tunnel CM 320 et laveur-désinfecteur Getinge 88 Turbo.
Vue côté chargement.



Tunnel CM 320 et laveur-désinfecteur Getinge 88 Turbo.
Vue côté déchargement.

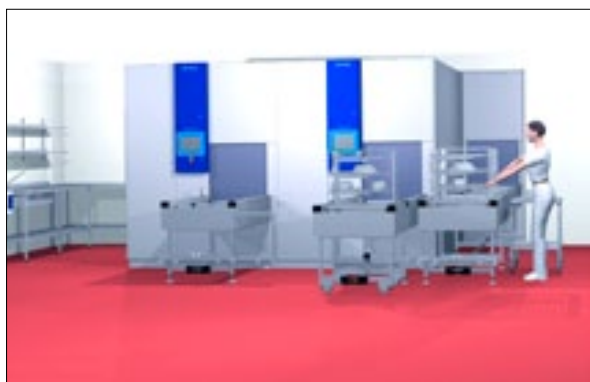

2 Tunnels CM 320 avec convoyeur transversal à mouvement latéral.
Vue côté chargement.



2 Tunnels CM 320 avec convoyeur transversal à mouvement latéral.
Vue côté déchargement.




Chargement haute capacité
La chambre accepte jusqu'à 15 plateaux DIN.



Système d'arrimage et de verrouillage
Système sûr et rapide d'arrimage et de verrouillage pour les chariots de transport.

MODULARITÉ ET FLEXIBILITÉ – AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Modularité – l'équipement peut accueillir de 2 à 5 chambres, en fonction des exigences de capacité et de rendement. En outre, des modules additionnels peuvent être montés après l'installation pour l'adapter à des exigences futures. Inutile d'acheter un nouvel équipement.

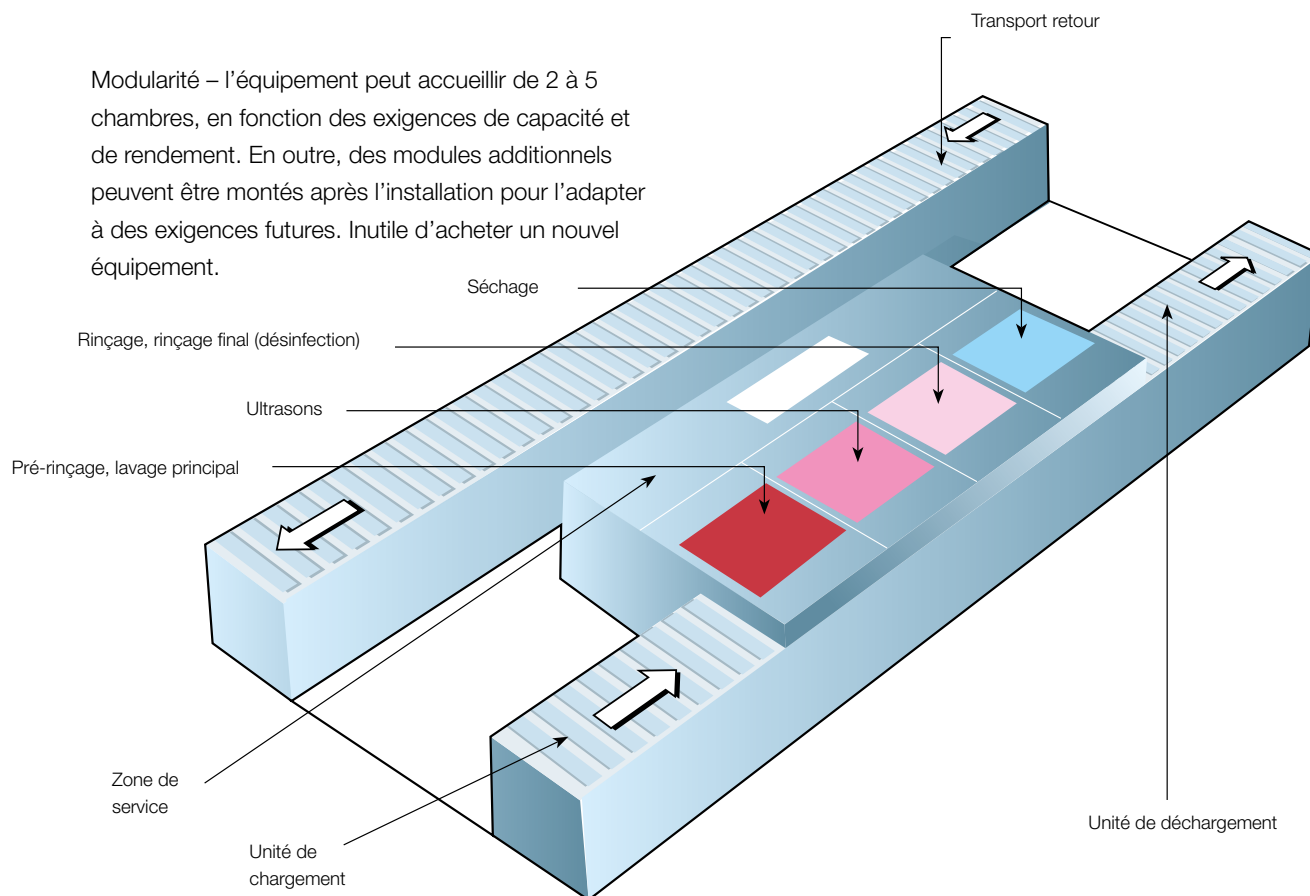

Solution/Chambre	1re chambre	2e chambre	3e chambre	4e chambre	5e chambre
2 chambres	Prérinçage/Lavage principal/Rinçage final (désinfection)	Séchage	-	-	-
3 chambres	Prérinçage/Lavage principal/	Rinçage final (désinfection)	Séchage	-	-
4 chambres	Prérinçage/Lavage principal/	Rinçage final (désinfection)	Séchage	Séchage	-
4 chambres à ultrasons	Prérinçage/Lavage principal/	Ultrasons	Rinçage final (désinfection)	Séchage	-
4 chambres	Prérinçage	Lavage principal	Rinçage final (désinfection)	Séchage	
5 chambres	Prérinçage	Lavage principal	Rinçage final (désinfection)	Séchage	Séchage
5 chambres à ultrasons	Prérinçage	Ultrasons	Lavage principal	Rinçage final (désinfection)	Séchage

Certaines fonctions décrites dans cette brochure sont des options. Pour la configuration de votre tunnel de lavage CM320-series, veuillez vous référer aux Caractéristiques du produit.

DES ACCESSOIRES POUR CHAQUE BESOIN

Getinge offre une gamme complète d'accessoires (voir sélection) qui vous permettent de personnaliser votre Getinge CM 320 en fonction de pratiquement toutes vos exigences.

Demandez notre Catalogue d'accessoires complet !

Rappelons au passage que bon nombre de nos accessoires sont interchangeables avec le laveur-désinfecteur Getinge 8668 et Getinge 88 Turbo.



Chariot de lavage MIS

Capacité : 6-7 sets, 96 emplacements pour leur



Chariot de lavage OP, 5 niveaux

Capacité : 15 plateaux DIN (480x250x50/70 mm)



Chariot flexi

Chariot à hauteur variable électrique



Chariot de transport



Chariot de lavage pour conteneur DIN



Chariot de lavage pour séchage intégré



SOLUTIONS COMPLÈTES POUR LE CONTRÔLE DES INFECTIONS

Geringe est le leader mondial des solutions de nettoyage, désinfection et stérilisation en toute efficacité dans les secteurs des soins de santé et des sciences de la vie. Nous nous engageons à aider nos clients à fournir de meilleurs soins à un coût moindre, et ce grâce à des solutions bien pensées et personnalisées. Nous sommes donc au côté de nos clients dès la conception architecturale et la formation, jusqu'au suivi et au service après-vente, grâce à des solutions complètes, un engagement à long terme et une présence mondiale. Geringe – Always with you.

Geringe Healthcare SAS

7 avenue du Canada B.P. 49.91942 Les Ulis Cedex

Téléphone: (+33) (0)1 64 86 89 00

Fax: (+33) (0)1 64 86 89 89

geringe.france@geringe.fr

GETINGE
GETINGE GROUP

www.geringe.com

GETINGE GROUP est un fournisseur mondial de premier plan en produits et systèmes contribuant à améliorer la qualité et la rentabilité des soins de santé et de la biologie. Nous regroupons nos activités sous les trois marques ArjoHuntleigh, GETINGE et MAQUET. **ArjoHuntleigh** se consacre à la mobilité des patients et au traitement des plaies. **GETINGE** propose des solutions de lutte contre les infections dans les soins de santé et de prévention de la contamination en biologie. **MAQUET** se spécialise dans les traitements et produits destinés aux interventions chirurgicales et aux soins intensifs.