




Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindberg
44110 Chateaubriant – France

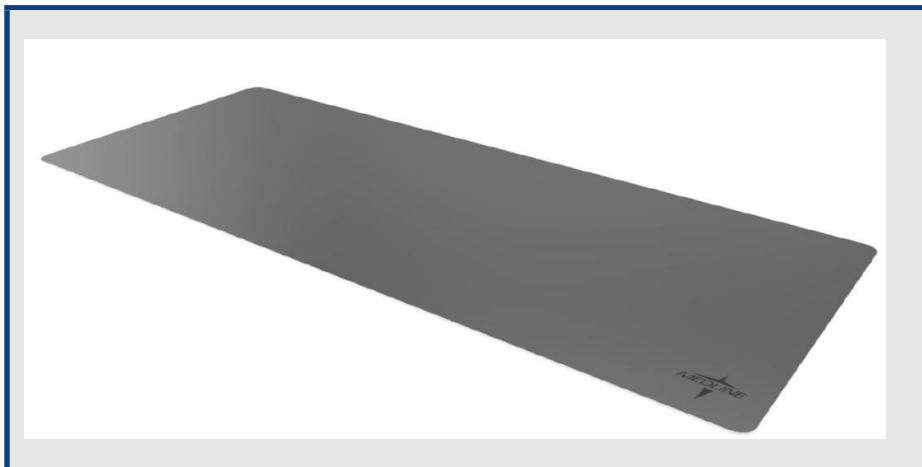

Fiche Technique

Plateau Aluminium

Référence(s)

LCLC1850CE (52 x 24 cm)
LCLC1851CE (48 x 24 cm)

Description

Le plateau Aluminium Medline est une feuille d'aluminium solide réutilisable destinée à être placée sous les plateaux/paniers de stérilisation afin de créer une source de chaleur qui accélère l'évaporation de la vapeur pour évacuer l'eau pendant le processus de stérilisation à la vapeur.

L'objectif est d'éliminer autant que possible la condensation du conteneur et des instruments pendant la stérilisation afin de :

- Fournir une charge raisonnable
- Prévenir les dommages des emballages causés par le poids ou un design inapproprié du plateau
- Réduire le temps de séchage dans les stérilisateurs

Nettoyants recommandés:

Utiliser uniquement des détergents alcalins doux, sans carbonate de sodium, à pH neutre (7) pour nettoyer efficacement et sans endommager la plaque.

Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, de brosses métalliques ou de tampons de nettoyage abrasifs. L'utilisation de produits abrasifs peut endommager la plaque.

Matériaux principaux

Une plaque d'aluminium solide protégée par une couche d'oxyde anodisé

Conditionnement

1 unité par carton

Emballage

carton

Fabricant

Medi S.r.l.

Représentant Europe

Medi S.r.l.

Distributeur

Medline International France SAS



© 2015 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.
All rights reserved. 01.01.INT.12

TDS_OR Sterilizationwrap_ LCLC1850CE_EN01

Stérilisation	Non Stérile
Latex	Sans Latex
Règlementation	Conforme à la directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE Classe MDD : I Non stérile EN 10079CE

