

 ***Fiche technique***
MEDUCORE Standard²

Fournisseur : WEINMANN Emergency France

Référence du produit : WM45300

Descriptif du produit : MEDUCORE Standard² (MS²) est un moniteur ECG, PNI, SpO² qui intègre un défibrillateur de type DSA débrayable en manuel (en option). Cette configuration de MCS² est fournie sans LIFE Base ni sacoche de transport. Elle comprend tous les accessoires nécessaires à l'utilisation de l'appareil excepté le bloc alimentation, soit 1 câble ECG 4 brins de 2 m type ERC (WM45455), séparateurs pour câble ECG (WM 45450), capteur oxymétrie pouls réutilisable (SoftTip®, taille M, WM 45432), câble raccordement oxymétrie de pouls (WM 45430), brassard PNI réutilisable, adulte, 28 à 40 cm (WM 45464), tuyau raccord PNI, 2 m (WM 45481), batterie (WM 45045), carte SD, 32 GB (WM 39510).

Photo du produit :






Fiche technique

MEDUCORE Standard²

Vue d'ensemble :

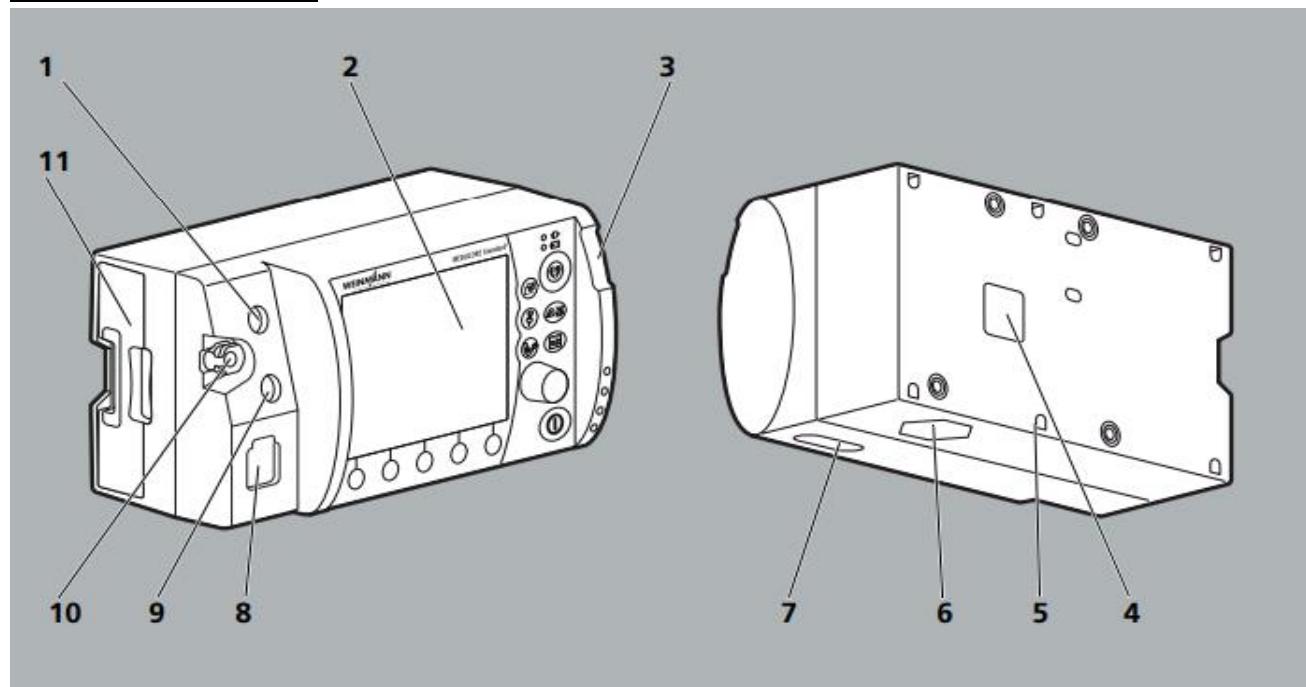

N°	Désignation	Description
1	Raccord pour câble ECG	Permet de relier l'appareil au câble ECG.
2	Écran	Affiche les réglages et les paramètres actuels.
3	Témoin lumineux d'alarme	Signale visuellement les alarmes de priorité élevée.
4	Raccord pour l'alimentation en courant	Permet de relier l'appareil à l'alimentation électrique.
5	Sceau en plomb	Indique si l'appareil a été ouvert sans autorisation.
6	Haut-parleur	Émet des commandes vocales, des alarmes et les tonalités de la fréquence cardiaque/du pouls.
7	Lecteur de carte SD	Permet d'insérer la carte SD.
8	Raccord Pad pour câble source	Permet de relier l'appareil aux électrodes de défibrillation et à la résistance de test fonctionnel au moyen du câble source (en option).
9	Raccord de SpO ₂ pour câble de raccordement oxymétrie de pouls	Permet de relier l'appareil à un capteur oxymétrie de pouls au moyen du câble de raccordement oxymétrie de pouls.
10	Raccord du tuyau de raccordement PNI	Permet de relier l'appareil à un brassard PNI au moyen du tuyau de raccordement PNI.
11	Compartiment de batterie avec batterie	Permet d'insérer la batterie.