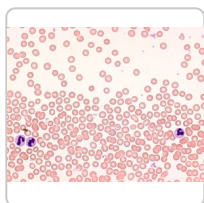


Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.


[GET YOURS HERE](#)

Toutes les
photos (1)

1.11661 ▶ **Sigma-Aldrich**

Hemacolor® Rapid staining of blood smear

★★★★★ (0)

suitable for hematology, staining set for microscopy

Référence	Conditionnement	Disponibilité	Prix	Quantité
1116610001	1 SET	✓ Disponible pour expédition le 05 octobre 2022	163,00 €	- +

Documents



FDS



COA/CoQ




Fiche des
caractéristiques

[Demander une commande en gros](#)

[Ajouter au panier](#)

PRODUITS RECOMMANDÉS

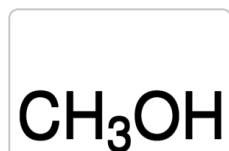


Sigma-Aldrich

1.11955

Hemacolor® Rapid staining of blood smear

Solution 1: fixing solution

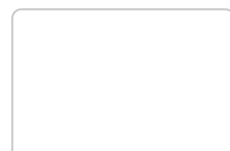

Sigma-Aldrich

1.11957

Hemacolor® Rapid staining of blood smear

Solution 3: colour reagent blue

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



PROPRIÉTÉS

Niveau de qualité	400
IVD	for <i>in vitro</i> diagnostic use
application(s)	clinical testing diagnostic assay manufacturing histology hematology
Temp. de stockage	15-25°C

Catégories apparentées

- Cytology Stains
- Hematology Stains

DESCRIPTION

Description générale

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



The Hemacolor[™] Rapid staining of blood smear staining set combines the brilliance and reproducibility of the Pappenheim staining with the time-advantage of a rapid stain. The Hemacolor[®] Rapid staining of blood smear staining set contains a fixing solution, one red (eosin) and one blue (azur) staining solution and phosphate buffer tablets pH 7.2 according to Weise (Product number 1.09468). The staining solutions are separately applied, which results in a high degree of stability. The conventionally appearing precipitates in the hematological staining solutions, could be avoided in this kit. In addition to blood and bone marrow smears, Hemacolor[®] Rapid staining of blood smear can be used in clinical cytology, e.g. for staining urine, sputum, FNAB, effusions and lavages.

A kit contains safe 500-ml PE-bottles and six buffer tablets. The package is sufficient for 250 - 1000 applications. The buffer tablets according to Weise pH 7.2 (Product number 1.09468) are also available in larger pack sizes, thus, they can be useful for higher demands. The three solutions needed for staining are all available individually as:

Hemacolor[®] Rapid staining of blood smear solution 1, fixing solution (Product number 1.11955)

Hemacolor[®] Rapid staining of blood smear solution 2, colour reagent red (Product number 1.11956)

Hemacolor[®] Rapid staining of blood smear solution 3, colour reagent blue (Product number 1.11957)

This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.

Remarque sur l'analyse

Suitability for microscopy (Blood smear): passes test

Erythrocytes: pink to brownish

Nuclei: red-violet

Eosinophilic granules: red to red-brown

Neutrophilic granules: light violet

Lymphocyte cytoplasm: blue

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.

[GET YOURS HERE](#)

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Pictograms**GHS02,GHS06,GHS08****Mention d'avertissement**

Danger

Mentions de danger**H225 - H301 + H311 + H331 - H370****Conseils de prudence****P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311****Classification des risques**

Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1

Code de la classe de stockage

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 2

DOCUMENTATION

Certificat d'analyse

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'analyse (COA).

Référence

e.g. T1503

Numéro de lot

e.g. 023J5431

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



Certificat de qualité

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat de qualité (CoQ).

Référence

e.g. T1503


Numéro de lot

e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (CoQ)

Rechercher

LES CLIENTS ONT ÉGALEMENT CONSULTÉ

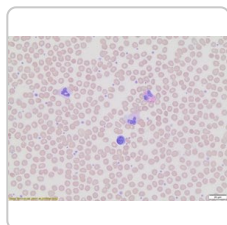


Sigma-Aldrich

WG128

Wright-Giemsa Stain, Modified

Consulter le prix et la disponibilité

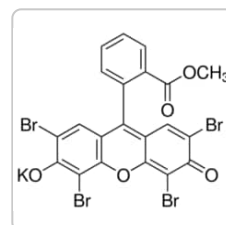

Sigma-Aldrich

63590

May-Grünwald solution

for the staining of blood constituents


Consulter le prix et la disponibilité

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE

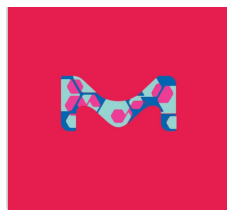


1.11608

Ethidium bromide

(1% solution in water) for electrophoresis

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

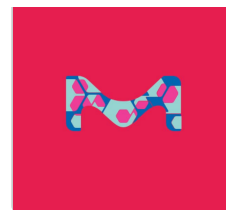

11145

Soy Phospholipids

mixture of phospholipids

[Consulter le prix et la disponibilité](#)



Évaluations



[Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit](#)

Questions

[Soyez le premier à poser une question](#)

SERVICE TECHNIQUE

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



Le contenu de cette page vous a-t-il été utile ?*



Que pouvons-nous faire pour améliorer cette page spécifique de notre site Internet ?

Envoyer

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.

[Conditions d'utilisation du site](#) | [Politique de confidentialité](#) | [Conditions générales de vente](#) | [Consentement relatif au copyright](#) | [Paramètres des cookies](#)