



Toutes les
photos (1)

1.13303  Millipore

Bactident™ *E. coli*

★★★★★ (0)

suitable for detection

Synonyme(s):



Test on *E. Coli*

Documents

 COA/CoQ

 Fiche des
caractéristiques

Plus de
documents »

Référence	Conditionnement	Disponibilité	Prix	Quantité
1133030001	50 TESTS	 Date d'expédition estimée le 03 octobre 2022	266,00 €	<div><div>-</div><div>+</div></div> 

[Demander une commande en gros](#)

[Ajouter au panier](#)

PRODUITS RECOMMANDÉS

Sigma-Aldrich

EC11303

Escherichia coli

Strain B, lyophilized cells

Millipore

1.13301

Bactident™ Aminopeptidase

suitable for detection, pkg of 50 strips

[Consulter le prix et la disponibilité](#)[Consulter le prix et la disponibilité](#)

PROPRIÉTÉS

Caractéristique	ready-to-use
Niveau de qualité	100
manufacturer/tradename	Bactident™
technique(s)	microbe id specific enzyme detection: suitable
input	water sample(s) (environmental)
application(s)	detection environmental food and beverages
Temp. de stockage	2-8°C
Adéquation	<i>Citrobacter</i> spp. <i>Escherichia coli</i> <i>Proteus</i> spp.

Catégories apparentées

Microbial identification tests

DESCRIPTION

Description générale

BACTIDENT™ *E. coli* test strips are impregnated with 4-methylumbelliferyl- β -D-glucuronide (MUG), which is cleaved to form 4-methylumbelliferone in the presence of β -D-Glucuronidase. The light blue fluorescence upon excitation with long-wavelength UV light, indicates the presence of the enzyme. Tryptophanase activity is confirmed if the bacterial suspension turns red upon the addition of KOVACS' reagent due to indole formation.

rapid identification kit for *E. coli*

Application

BACTIDENT™ *E. coli* is used for the bioburden testing in drinking water. This test allows for the rapid detection of coliform organisms (*E. coli*) by testing the bacterial culture for the presence of enzymes β -D-Glucuronidase and Tryptophanase.

Liaison

Replaces: 1133030001

Remarque sur l'analyse

Fluorescence

- *Escherichia coli* ATCC 25922 (WDCM 00013):

+

- *Escherichia coli* 194: +

- *Escherichia coli* ATCC 4351: +

- *Proteus hauseri* ATCC 13315: -

- *Citrobacter freundii* ATCC 8090: -

Indole formation

- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):

+

- Escherichia coli 194: +

- Escherichia coli ATCC 4351: +

- Proteus hauseri ATCC 13315: +

- Citrobacter freundii ATCC 8090: -

Informations légales

BACTIDENT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ**Pictograms**

GHS02,GHS05,GHS07

Mention d'avertissement

Danger

Conseils de prudence

**P210 - P280 - P302 + P352 -
P305 + P351 + P338 - P313**

**Code de la classe de
stockage**

3 - Flammable liquids

DOCUMENTATION**Certificat d'analyse**

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'analyse (COA).

Référence

e.g. T1503

Numéro de lot

Comment saisir un numéro de lot (COA)

Rechercher

Certificat de qualité

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat de qualité (CoQ).

Référence

Numéro de lot


Comment saisir un numéro de lot (CoQ)

Rechercher


Informations Techniques

Bactident E. coli, 113303

PRODUITS CONSULTÉS RÉCEMMENT

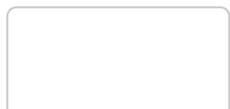

Millipore
1.12422

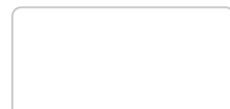

Millipore
1.12233



N-Acetyl-L-cysteine
for biochemistry

et la disponibilité



L-Lysine monohydrate
for biochemistry

et la disponibilité



Évaluations



Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit

Questions

Soyez le premier à poser une question

SERVICE TECHNIQUE

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

[Contacter notre Service technique](#)

Le contenu de cette page vous a-t-il été utile ?*



Que pouvons-nous faire pour améliorer cette page spécifique de notre site Internet ?

Envoyer

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.

[Conditions d'utilisation du site](#) | [Politique de confidentialité](#) | [Conditions générales de vente](#) | [Consentement relatif au copyright](#) | [Paramètres des cookies](#)