



Toutes les
photos (1)

1.31200 Millipore®

HY-RiSE® Color Hygiene Test Strip

★★★★★ (0)

Rapid colorimetric test for visual determination of surface cleanliness and hand hygiene

Synonyme(s):

Colorimetric assay, Paper strip test

Documents



FDS



COA/CoQ



Fiche des
caractéristiques

Référence	Conditionnement	Disponibilité	Prix	Quantité
1312000001	50 STRIPS	Date d'expédition estimée le 03 octobre 2022	229,00 €	- +

[Demander une commande en gros](#)

[Ajouter au panier](#)

PRODUITS RECOMMANDÉS



Millipore

64003BC

MVP ICON® Surface Sampling Device

BioControl, ATP Surface Sampling Swab for HACCP Management

Millipore

63003BC

FLASH® Allergen-Indicator Protein Test

BioControl, Rapid Protein Detection for HACCP Management

[Consulter le prix et la disponibilité](#)[Consulter le prix et la disponibilité](#)

PROPRIÉTÉS

Matériau	paper (Test Strips: individually sealed in aluminum foil)
	plastic (box)
	plastic bottle (Reagent Bottles with colored screw caps)
Forme	liquid
Conditionnement	box of 50 strips (individually sealed)
	pkg of Reagent A (wetting solution, white screw cap, 2.5 ml)
	pkg of Reagent B (substrate solution, yellow screw cap, 2.5 ml)
	pkg of Reagent C (enzyme solution, blue screw cap, 2.0 ml)
Conditions de stockage	protect from light
application(s)	clinical
	cosmetics
	food and beverages
	industrial hygiene (monitoring)
	microbiology
Compatibilité	surface monitoring
	for use with HY-RISE®
detection method	colorimetric

Temp. de stockage

2-8°C

Catégories apparentées

Hygiene Monitoring Instruments, Samplers, Tests & Accessories

DESCRIPTION

Description générale

The HY-RiSE® Color Hygiene Test Strips allow for rapid, qualitative determination of surface cleanliness and hand hygiene. It is also suitable for use in testing C.I.P. (Clean in Place) rinse water for contamination.

Test results are available in 4 - 5 minutes and require no equipment. Results are presented as a color change on the test strip, making it easy to determine clean (Pass) and dirty (Fail) results. Surface cleanliness is determined by measuring product residues, e.g. from food and beverages, left on surfaces after cleaning. Measurements made with this test strip can provide early warning of possible contamination on specific surface areas allowing immediate corrective action. On visibly clean surfaces the test can reveal the presence of product residues invisible to the eye, therefore indicating the hidden potential for microbial growth.

The HY-RiSE® color hygiene test measures the product residues in the form of nicotinamide adenine dinucleotides (NAD, NADH) and their phosphates (NADP, NADPH). Regular use of the HY-RiSE® provides a simple and effective means for monitoring standards of cleaning as part of an integrated hygiene monitoring program.

Application

HY-RiSE® Color Hygiene Test Strips are suitable for assessing surface cleanliness and hand hygiene, as well as C.I.P. (Clean-in-Place) rinse water contamination. Typical applications include assessments of food and hand contact surfaces, e.g. worktops, slicers, cutting boards, fridge handles, microwaves, ovens, etc.

Liaison

Replaces: 1312000007

Remarque sur l'analyse

Reagent A

Appearance

- reagent A:

clear, colourless

Reagent B

- reagent B: clear, yellowish

Colony count

- reagent B:

≤ 10 CFU/ml

Reagent C

Appearance

- reagent C:

clear, yellowish

Colony count

- reagent C:

≤ 10 CFU/ml

performance test

Performance test: conforms

Informations légales

HY-RISE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Pictograms**GHS09****Mentions de danger****H411****Conseils de prudence****P273 - P391 - P501****Classification des risques**

Aquatic Chronic 2

**Code de la classe de
stockage**

10 - Combustible liquids

WGK

WGK 3

DOCUMENTATION

Certificat d'analyse

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'analyse (COA).

Référence

e.g. T1503

Numéro de lot

e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (COA)**Rechercher**

Certificat de qualité

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat de qualité (CoQ).

Référence

Numéro de lot

Comment saisir un numéro de lot (CoQ)[Rechercher](#)

LES CLIENTS ONT ÉGALEMENT CONSULTÉ



Millipore

1.00778**Cult Dip Combi™**

For detection of total bacterial count and yeasts & fungi in liquid samples

[Consulter le prix et la disponibilité](#)**Z699454****Swabs and SwabChecks**

Listeria SwabCheck

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

PROTOCOLES ET ARTICLES SCIENTIFIQUES

Contenu apparenté


Contrôle de l'hygiène et de la désinfection HACCP pour l'agro-alimentaire

Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la...

HACCP Disinfection Control & Hygiene Monitoring for Food & Beverage

HACCP Disinfection control within the food & beverage industry is critical to ensure product safety and meet regulatory compliance. We offer an extensive range of products used in disinfection control and hygiene monitoring processes for food & beverage manufacturing.

PRODUITS CONSULTÉS RÉCEMMENT

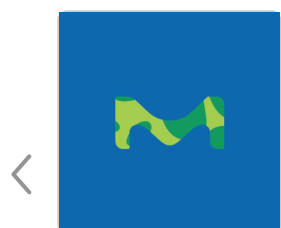

Millipore

1.24839

Pefabloc® SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride) (AEBSF) for biochemistry

[Consulter le prix et la disponibilité](#)



Millipore

1.24511

1,4-Dithioerythritol for biochemistry

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

Évaluations



[Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit](#)

Questions

[Soyez le premier à poser une question](#)

SERVICE TECHNIQUE

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

[Contacter notre Service technique](#)

Le contenu de cette page vous a-t-il été utile ?*



Que pouvons-nous faire pour améliorer cette page spécifique de notre site Internet ?

Envoyer

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.

[Conditions d'utilisation du site](#) | [Politique de confidentialité](#) | [Conditions générales de vente](#) | [Consentement relatif au copyright](#) | [Paramètres des cookies](#)