



Toutes les  
photos (1)

62087  Millipore®

## Levine EMB Agar

★★★★★ (0)

NutriSelect® Plus, suitable for microbiology

Synonyme(s):

Eosin methylene Blue Lactose Agar according to Levine, Levine's Eosin Methylene Blue Agar

### Documents

 [FDS](#)

 [COO/COA](#)

| Référence    | Conditionnement | Disponibilité                                                                                                                  | Prix     | Quantité                                                                                                                |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62087-500G-F | 500 G           |  Date d'expédition estimée le 11 octobre 2022 | 156,00 € | <div><div>-</div><div>+</div></div>  |

[Demander une commande en gros](#)

[Ajouter au panier](#)

## PRODUITS RECOMMANDÉS

Millipore


**70186**  
EMB Agar

suitable for microbiology, NutriSelect® Plus

Millipore

**M7408**  
MacConkey Agar

suitable for microbiology, NutriSelect® Basic

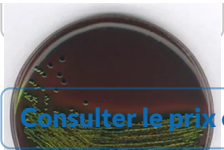

[Consulter le prix et la disponibilité](#)



[Consulter le prix et la disponibilité](#)

## PROPRIÉTÉS

|                        |                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stérilité              | non-sterile                                                                                                                                                       |
| Niveau de qualité      | 200                                                                                                                                                               |
| Forme                  | powder                                                                                                                                                            |
| Durée de conservation  | limited shelf life, expiry date on the label                                                                                                                      |
| Composition            | agar, 15.0 g/L<br>dipotassium hydrogen phosphate, 2.0 g/L<br>eosin yellowish, 0.4 g/L<br>lactose, 10.0 g/L<br>meat peptone, 10.0 g/L<br>methylene blue, 0.065 g/L |
| manufacturer/tradename | NutriSelect® Plus                                                                                                                                                 |
| pH final               | 7.2±0.2 (25 °C)                                                                                                                                                   |

**application(s)**

agriculture  
bioburden testing  
clinical testing  
environmental  
food and beverages  
water monitoring  
microbiology

---

**Adéquation**

selective and differential for *Candida* spp.  
selective and differential for *Enterobacter* spp.  
selective and differential for *Enterococcus* spp.  
selective and differential for *Escherichia coli*  
selective and differential for *Klebsiella* spp.  
selective and differential for *Proteus* spp.  
selective and differential for *Streptococcus* spp.  
selective and differential for coliforms

---

**Catégories apparentées**

**Microbial Culture Media**

---

## DESCRIPTION

### Application

Isolation and differentiation of *E. coli* and *Enterobacter*, and identification of *Candida albicans* according to Levine.

### Notes préparatoires

Dissolve 37.5 g in 1 litre distilled water. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Pour plates.

## Autres remarques

Isolation and identification of coagulase-positive staphylococci; Screening method to isolate E. coli from ground beef

## Note de bas de page

We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.

The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.

## Informations légales

GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

---

## INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

### Pictograms



GHS07

### Mention d'avertissement

Warning

### Mentions de danger

H317

### Conseils de prudence

P261 - P272 - P280 - P302 +  
P352 - P333 + P313 - P362 +  
P364

### Classification des risques

Skin Sens. 1

### Code de la classe de stockage

11 - Combustible Solids

### WGK

WGK 3

### Flash Point(F)

Not applicable

### Point d'éclair C

Not applicable

## DOCUMENTATION

### Certificat d'analyse

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'analyse (COA).

Numéro de lot

e.g. 023J5431

**Comment saisir un numéro de lot (COA)**

**Rechercher**

### Certificat d'origine

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'origine (COO).


Numéro de lot

e.g. 023J5431

**Comment saisir un numéro de lot (COO)**

**Rechercher**


## LES CLIENTS ONT ÉGALEMENT CONSULTÉ

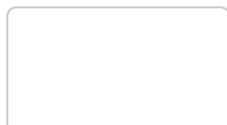

Millipore

**17349**

Lauryl sulfate Broth

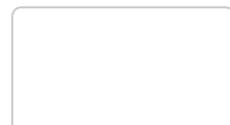

Millipore

**70132**

Azide Blood Agar (Base)



suitable for microbiology, NutriSelect® Plus

et la disponibilité



suitable for microbiology, NutriSelect® Plus

et la disponibilité



## ARTICLES REVUS PAR DES PAIRS

**A.J.G. Okrend et al.***Journal of Food Protection*, 53, 249-249 (1990)

### Occurrence of verocytotoxin-producing *Escherichia coli* O157 on Dutch dairy farms.

**Heuvelink, A. E., et al.***Journal of Clinical Microbiology*, 36 (12), 3480-3487 (1998)

### Isolation and identification of coagulase-positive *Staphylococci* on Levine's eosin-methylene blue agar.

**N J MENOLASINO***The Journal of laboratory and clinical medicine*, 56, 908-910 (1960-12-01)

## PROTOCOLES ET ARTICLES SCIENTIFIQUES

### Articles

#### Microbiological Control of Spices and Herbs

Microbiological assessment of bacteria found in spices, a potent source for food spoilage and pathogens.

#### Yeast

Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.

## PRODUITS CONSULTÉS RÉCEMMENT



Millipore

**613424**

**Tocopherol Set - Calbiochem**

The Tocopherol Set is a convenient four-vial pack containing ~50 mg each of all-rac- $\alpha$ , all-rac- $\beta$ , RRR- $\gamma$ , an...

[Consulter le prix et la disponibilité](#)



Millipore

**61044**

**Tryptone Plus**

for biotechnological purposes

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

## Évaluations



[Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit](#)

## Questions

[Soyez le premier à poser une question](#)

## SERVICE TECHNIQUE

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

[Contacter notre Service technique](#)

Le contenu de cette page vous a-t-il été utile ?\*



Que pouvons-nous faire pour améliorer cette page spécifique de notre site Internet ?

Envoyer

