

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.


[GET YOURS HERE](#)




Toutes les
photos (4)

Documents

[FDS](#)
[COO/COA](#)

Fiche des
caractéristiques

Plus de
documents »

P5380 ▶ **Sigma-Aldrich.**

Protease from *Bacillus licheniformis*

★★★★★ (0)

Type VIII, lyophilized powder, 7-15 units/mg solid

Synonyme(s):

Proteinase from *Bacillus licheniformis*, Subtilisin A

Numéro CAS: **9014-01-1**

Numéro EC: **232-752-2**

NACRES: NA.54

Numéro de classification
(Commission des enzymes):

3.4.21.62 (BRENDA, IUBMB)

Numéro MDL:

MFCD00132092


Référence	Conditionnement	Disponibilité	Prix	Quantité
P5380-25MG	25 MG	✓ Only 2 left in stock (more on the way) Détails...	56,80 €	- +
P5380-100MG	100 MG	✓ Disponible pour expédition le 10 octobre 2022 Détails...	154,00 €	- +
P5380-250MG	250 MG	✓ Only 3 left in stock (more on the way) Détails...	253,00 €	- +
P5380-1G	1 G	✓ Only 3 left in stock (more on the way) Détails...	762,00 €	- +

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.

[GET YOURS HERE](#)

PRODUITS RECOMMANDÉS

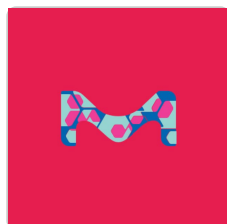

Sigma-Aldrich

P4860Protease from *Bacillus licheniformis*

≥2.4 U/g

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

Sigma-Aldrich

P3910Protease from *Bacillus licheniformis*

lyophilized powder, for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

PROPRIÉTÉS

Source biologique *Bacillus licheniformis*

Niveau de qualité 200

Type Type VIII

Forme lyophilized powder

specific activity 7-15 units/mg solid

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.

[GET YOURS HERE](#)

Solubilité	10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble, clear H ₂ O: soluble, colorless
-------------------	---

Activité étrangère	DNase ≤5.0 Kunitz units/mg solid RNase ≤0.05 Kunitz units/mg solid
---------------------------	---

Temp. de stockage	-20°C
--------------------------	-------

Vous recherchez des produits similaires ? Visitez [Guide de comparaison des produits](#)

Catégories apparentées[Proteases](#)

DESCRIPTION

Description générale

The enzyme is found to be stable at pH 8-10, retaining activity of up to 90% for 24 hours. It shows maximum activity at temperatures between 55-60 °C.

Spécificité

Subtilisin A is a member of the Serine S8 Endoproteinase family. It has broad specificity with a preference for a large uncharged residue in the P1 position. It hydrolyzes native and denatured proteins, and is active under alkaline conditions.

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



The product has been used with other enzymes for *in situ* proteolysis to produce crystals suitable for structure determination. It has also been used in the process of isolation of subsarcolemmal (SS) and intermyofibrillar (IMF) mitochondria that can be used for functional *in vitro* studies.

This is a proteolytic enzyme isolated from the fermentation of *Bacillus licheniformis*. It is a serine endoproteinase with a broad specificity towards native and denatured proteins, and is active under alkaline conditions.

Conditionnement

25 mg in poly bottle

100, 250 mg in glass bottle

1 g in glass bottle

Actions biochimiques/physiologiques

Protease catabolizes proteins by hydrolysis of peptide bonds. Proteases are inactivated by serine active-site inhibitors, such as phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) and diisopropylfluorophosphate. Protease, Product P5380, is a serine endoproteinase with a broad specificity towards native and denatured proteins, and is active under alkaline conditions. It is active in some organic solvents such as dry octane.

Propriétés physiques

Subtilisin is a non-glycosylated single polypeptide chain without disulfide bonds and has a molecular weight of 27 KDa.

Définition de l'unité

One unit will hydrolyze casein to produce color equivalent to 1.0 μ mole (181 μ g) of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



[GET YOURS HERE](#)

**Pictograms**

GHS05,GHS07,GHS08,GHS09

Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

**H302 - H315 - H318 - H334 -
H335 - H410**

Conseils de prudence

**P261 - P273 - P280 - P301 +
P312 - P302 + P352 - P305 +
P351 + P338**

Classification des risques

Acute Tox. 4 Oral - Aquatic
Acute 1 - Aquatic Chronic 2 -
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 -
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

Organes cibles

Respiratory system

**Code de la classe de
stockage**

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 1

Flash Point(F)

Not applicable

Point d'éclair C

Not applicable

**Équipement de protection
individuelle**

dust mask type N95 (US),
Eyeshields, Faceshields,
Gloves

DOCUMENTATION

Certificat d'analyse

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'analyse (COA).

Numéro de lot

e.g. 023J5431

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



Certificat d'origine

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'origine (COO).

Numéro de lot

e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (COO)


Rechercher

Plus De Documents

Enzyme Explorer

FDS

LES CLIENTS ONT ÉGALEMENT CONSULTÉ

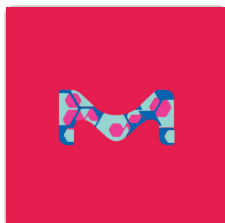


Sigma-Aldrich

P5985

Protease from *Bacillus* sp.

liquid, ≥ 16 U/g

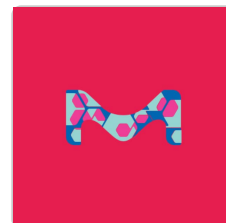

Sigma-Aldrich

P6110

Protease from *Aspergillus oryzae*

≥ 500 U/g



Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



ARTICLES REVUS PAR DES PAIRS

Assessment of DNA Ploidy in the ProMisE molecular subgroups of endometrial cancer.

L Proctor et al.

Gynecologic oncology, 146(3), 596-602 (2017-06-26)

We sought to determine whether DNA ploidy correlates with the four molecular subgroups of endometrial carcinoma (EC) as determined using ProMisE (Proactive Molecular Risk Classifier for Endometrial Cancer). 90 cases of EC previously characterized by clinicopathological parameters, outcomes, and ProMisE

A Single-Cell Atlas of the Human Healthy Airways.

Marie Deprez et al.

American journal of respiratory and critical care medicine, 202(12), 1636-1645 (2020-07-30)

Rationale: The respiratory tract constitutes an elaborate line of defense that is based on a unique cellular ecosystem. Objectives: We aimed to investigate cell population distributions and transcriptional changes along the airways by using single-cell RNA profiling. Methods: We have explored the

Rosiglitazone increases fatty acid oxidation and fatty acid translocase (FAT/CD36) but not carnitine palmitoyltransferase I in rat muscle mitochondria.

Carley R Benton et al.

The Journal of physiology, 586(6), 1755-1766 (2008-02-02)

Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) alter the expression of genes involved in regulating lipid metabolism. Rosiglitazone, a PPARgamma agonist, induces tissue-specific effects on lipid metabolism; however, its mode of action in skeletal muscle remains unclear. Since fatty acid translocase (FAT/CD36) was

Structural basis of actin monomer re-charging by cyclase-associated protein.

Tommi Kotila et al.

Nature communications, 9(1), 1892-1892 (2018-05-16)

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



Short-Term High-Fat Feeding Does Not Alter Mitochondrial Lipid Respiratory Capacity but Triggers Mitophagy Response in Skeletal Muscle of Mice.

Sarah E Ehrlicher et al.

Frontiers in endocrinology, 12, 651211-651211 (2021-04-20)

Lipid overload of the mitochondria is linked to the development of insulin resistance in skeletal muscle which may be a contributing factor to the progression of type 2 diabetes during obesity. The targeted degradation of mitochondria through autophagy, termed mitophagy

[Afficher tous les articles scientifiques apparentés](#)


PROTOCOLES ET ARTICLES SCIENTIFIQUES

Protocoles

Immunohistochemistry Procedure

Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.

PRODUITS CONSULTÉS RÉCEMMENT

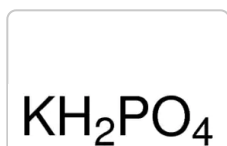


Sigma-Aldrich

P5379

Potassium phosphate monobasic

ReagentPlus®

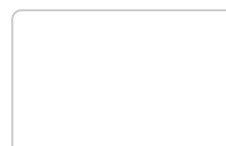

Sigma-Aldrich

P5368

Phosphate buffered saline

BioPerformance Certified. pH 7.4

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.

[GET YOURS HERE](#)

Évaluations

[Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit](#)

Questions

[Soyez le premier à poser une question](#)

SERVICE TECHNIQUE

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

[Contacter notre Service technique](#)

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.

[GET YOURS HERE](#)

Que pouvons-nous faire pour améliorer cette page spécifique de notre site Internet ?

Envoyer

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.

[Conditions d'utilisation du site](#) | [Politique de confidentialité](#) | [Conditions générales de vente](#) | [Consentement relatif au copyright](#) | [Paramètres des cookies](#)