

[Toutes les photos](#) (1)

Documents

[↓ FDS](#)[🔍 COA/CoQ](#)**S-014-M**

Enzyme Free Cell Dissociation Solution PBS Based (1X), liquid, 500ml

★★★★★ (0)

The Enzyme-Free Cell Dissociation Solution is a PBS based formulation of chelating agents & agents to stabilize their activity on cells. This solution is available in a 500ml format.

eCl@ss:

32160801


NACRES:

NA.75

Référence	Conditionnement	Disponibilité	Prix	Quantité
S-014-C	100 ML	✓ Date d'expédition estimée le 13 octobre 2022	28,60 €	— + 
S-014-B	500 ML	✓ Date d'expédition estimée le 11 octobre 2022	66,90 €	— + 

[Demander une commande en gros](#)[Ajouter au panier](#)

PRODUITS RECOMMANDÉS

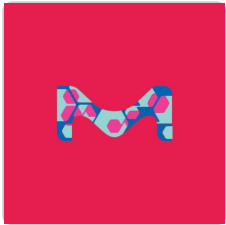

Sigma-Aldrich

C5914

Cell Dissociation Solution Non-enzymatic 1x

Prepared in phosphate buffered saline without calcium and magnesium, sterile-filtered, BioReagent, suitable fo...

Consulter le prix et la disponibilité



Sigma-Aldrich

S-004-M

Enzyme Free Cell Dissociation Solution Hank's Based (1X), liquid, 500ml

The Enzyme-Free Cell Dissociation Solution is a Hank's based formulation of chelating agents & agents to...

Consulter le prix et la disponibilité

PROPRIÉTÉS

Niveau de qualité	200
Forme	liquid
manufacturer/tradename	Specialty Media
input	sample type: human embryonic stem cell(s) sample type: mouse embryonic stem cell(s) sample type epithelial cells sample type hematopoietic stem cell(s) sample type cardiac stem cell(s) sample type mesenchymal stem cell(s) sample type pancreatic stem cell(s) sample type induced pluripotent stem cell(s) sample type neural stem cell(s)

Catégories apparentées

Cell Dissociation Reagents

DESCRIPTION

Description générale

Enzyme-Free Cell Dissociation Solution is a PBS based formulation of chelating agents and agents to stabilize their activity on cells. It works significantly faster than 0.5mM EDTA. In fact, it works as quickly as trypsin on most cells. Most importantly, it preserves the structural and functional integrity of cell surface proteins and does not have the cytotoxic effects sometimes associated with 0.5 mM EDTA. It can be used to dissociate primary cells, tissues, and tumors with an increased plating efficiency.

Enzyme-Free dissociation solution should be used with cells that are sub-confluent (60-80%). If cells are more than 80% confluent, we recommend trypsinizing the cells and replating at 30-40% confluency 24 hours before enzyme-free use (this will allow the cells to be 60-80% confluent for enzyme free dissociation).

Forme physique

Product is supplied as a sterile

liquid.

Stockage et stabilité

Product can be stored at room temperature or at 4°C. Shelf life is 2 years

Clause de non-responsabilité

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

DOCUMENTATION

Certificat d'analyse

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'analyse (COA).

Numéro de lot

e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (COA)

Rechercher

Certificat de qualité

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat de qualité (CoQ).

Référence

e.g. T1503


Numéro de lot

e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (CoQ)

Rechercher

LES CLIENTS ONT ÉGALEMENT CONSULTÉ

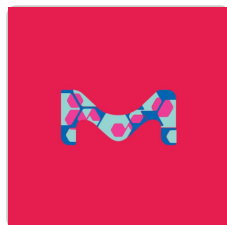

Sigma-Aldrich

D8537

Dulbecco's Phosphate Buffered Saline

Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture

[Consulter le prix et la disponibilité](#)



Sigma-Aldrich


10771

Histopaque®-1077

sterile-filtered, density: 1.077 g/mL

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

PRODUITS CONSULTÉS RÉCEMMENT

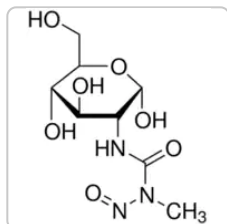


Sigma-Aldrich

S0130

Streptozocin

≥75% α-anomer basis, ≥98% (HPLC), powder

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

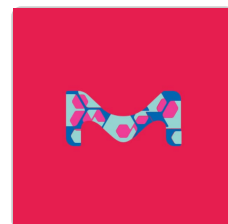

Sigma-Aldrich

S0146

Schneider's Insect Medium

With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

Évaluations



[Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit](#)

Questions

[Soyez le premier à poser une question](#)

SERVICE TECHNIQUE

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

[Contacter notre Service technique](#)

Le contenu de cette page vous a-t-il été utile ?*



Que pouvons-nous faire pour améliorer cette page spécifique de notre site Internet ?

Envoyer

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.

[Conditions d'utilisation du site](#) | [Politique de confidentialité](#) | [Conditions générales de vente](#) | [Consentement relatif au copyright](#) | [Paramètres des cookies](#)