


3M

Fiche technique

20/07/2021

Matelas Néo-nat - pédiatrique 3M™ Bair Hugger™

Référence 55501 - Code commande 55501A

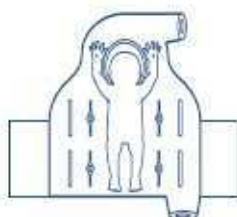

Qté	CONTENU	DIMENSIONS cm x cm	COMPOSITION	TECHNOLOGIE
1	Matelas Néo-nat / pédiatrique 1 Couver-tête 1 Couver-jambes 2 Connectiques tuyau 1 Partie supérieure 1 Partie inférieure	91 x 84 61 x 61 Diam interne : 5,5 Diam total : 9	Couche supérieure : Polypropylène Couche inférieure : Polypropylène Polyéthylène Connectique tuyau en styrène	Couche supérieure micro perforée : Spunbonding Couche inférieure : Spunbonding
Indications		Réchauffement par air chaud pulsé "convection". Accès total chirurgie pédiatrique		

Répartition de l'air chaud

Boudins en périphérie
Matelas au centre

Evacuation des fluides

Sous patient par puits de drainage

Système de fixation

Oui - par adhésif
Ailettes latérales de stabilisation

RADIO TRANSPARENT
SANS LATEX

Lieu de fabrication

USA

Poids

85 grammes

Inflammabilité

Classe I - CFR title 16, part 161.0 / Temps d'inflammabilité : 7 secondes

Conditionnement

10 unités par carton

Produit

Dispositif Médical de classe I non stérile
Marquage CE

Avertissement

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité. Pour les produits 3M dont l'utilisation est réservée aux professionnels de santé, le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.



3M France
Division Solutions Médicales

1 PARVIS DE L'INNOVATION
CS 20203
95006 CERGY-PONTOISE CEDEX
Tél. : 01 30 31 61 61
Fax : 01 30 31 85 65

IPD-000478

Page 1 of 1