


# SOLUSCOPE A

## ANTICORROSIF POUR ENDOSCOPES ET SONDES ETO

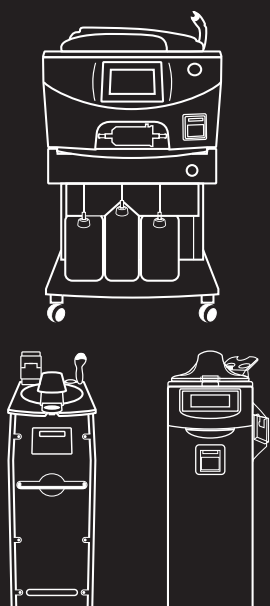

FORMULE  
ANTICORROSIVE  
POUR PROTÉGER LES  
ENDOSCOPES ET LES  
SONDES ETO

VALIDÉ SELON LA  
NORME EN ISO 15883-4

COMPATIBLE AVEC TOUT  
TYPE D'ENDOSCOPES  
FLEXIBLES DISPONIBLES  
À CE JOUR SUR LE  
MARCHÉ

CONNEXION  
SPÉCIFIQUE ÉVITANT  
LES INVERSIONS AVEC  
LE DÉSINFECTANT  
ET LE DÉTERGENT  
DES LAVEURS-  
DÉSINFECTEURS

### INDICATIONS

- Protection des endoscopes en *Soluscope Serie 3 version PA* et *Serie ENT*.
- Protection des sondes ETO en *Soluscope Serie TEE*.
- *Soluscope A* s'utilise en combinaison avec le désinfectant *Soluscope P*.

### COMPOSITION

- Stabilisants
- Anticorrosifs
- Excipients

### CARACTÉRISTIQUES

- Solution limpide incolore
- Densité : entre 0,98 et 1,01
- pH (produit pur) : entre 5,5 et 7,0
- Stabilité : 36 mois (fermé), 2 mois (ouvert)

### MODE D'EMPLOI

- Visser le plongeur équipé du bouchon noir sur le bidon.
- S'assurer que l'évent n'est pas bouché.
- Mettre le bidon en place.
- Solution concentrée pour usage professionnel.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI


- Dangereux : respectez les précautions d'emploi (établies selon le *Règlement européen 1272/2008*).
- Stockage entre 5°C et 25°C.
- Dispositif médical de *Classe IIb* (*Directive 93/42/CEE amendée*).

### CONDITIONNEMENT

- 2 bidons de 5L



SERIE 3 version PA

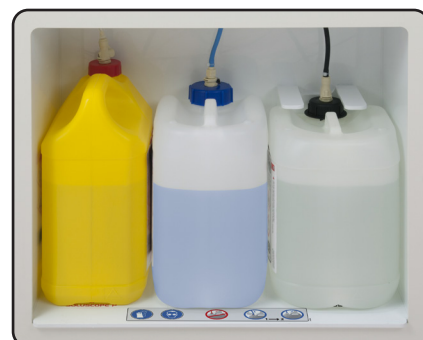

SERIE ENT / SERIE TEE

CE  
1434

**Soluscope**

100, rue du Fauge - Z.I. Les Paluds - 13400 Aubagne - France

☎ +33 (0)4 91 83 21 22 📠 +33 (0)4 91 83 21 10

✉ info@soluscope.com