

## MATELAS DE TRANSFERT AVEC HOUSSE DE PROTECTION


RÉFÉRENCES :

SIPM1010W / SIPM1210W

**L**es matelas de transfert TUBALPHA® permettent à un ou deux soignants de déplacer un patient à l'horizontale.

Insérés en hémicorps, ils facilitent les transferts latéraux entre deux plans de même niveau et sans espacement entre eux, en le faisant glisser dessus.

Souples et pliables au pied du brancard, ils sont fournis avec une housse en tissu imperméable ■

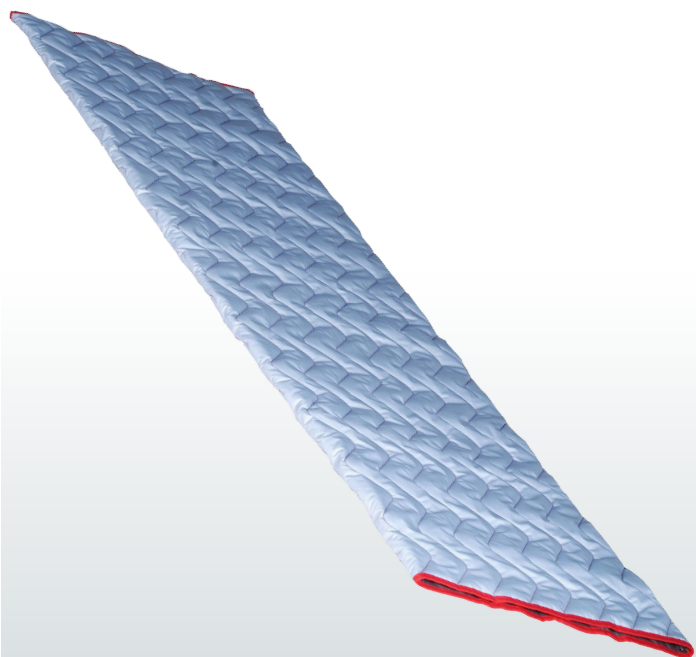

### LES PRODUIT

Permet de **réduire les TMS.**

**Léger** et facilement transportable.

**Compatible avec les normes de désinfection hospitalière.**



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

### OPTION


#### MEDITRANS



TUBALPHA® peut être associé à la planche de transfert MEDITRANS® qui sert alors de passerelle entre deux plans.



VOTRE CONSEILLER



#### ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE


TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

## FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Taille	Poids
SIPM1010W Composé de 1 x SIPM1010 N° Identification UDI : 04250355310101 1 x SIPM1051.2 N° Identification UDI : 04250355310590	Set TUBALPHA® molletonné (SIPM1010) + une housse imperméable de protection (SIPM1051.2)	60 x 190 cm	950 g
SIPM1210W Composé de 1 x SIPM1210 N° Identification UDI : 04250355312105 1 x SIPM1051.2 N° Identification UDI : 04250355312594	Set TUBALPHA® molletonné XS (SIPM1210) + une housse imperméable de protection XS (SIPM1251.2)	70 x 100 cm	580 g

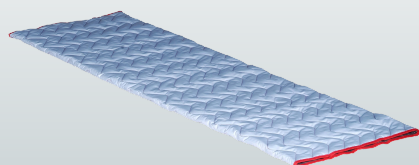

PRODUIT :	TUBALPHA®
DESCRIPTION COURTE :	MATELAS DE TRANSFERT ET HOUSSE DE PROTECTION
RÉFÉRENCE :	SIPM1010W / SIPM1210W
DATE DE MISE À JOUR :	22/11/2021
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	VOIR TABLEAU REF
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	200 KG
FABRICANT :	PETERMANN GMBH
ORIGINE :	ALLEMAGNE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Manutention manuelle par une tierce personne d'un sujet présentant une incapacité de bouger, sur plan horizontal sans écart de niveau ni espace. La housse de protection permet de protéger le matelas de transfert.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b> <b>Après utilisation TUBALPHA® ne doit pas rester ni sur le sol, ni dans le lit.</b>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. <b>Produits interdits :</b> Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. <b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes. • Lavage à 90° en machine, séchage à basse température 45-50° maximum. • Lavage à la main, trempage et essuyage. • Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+5°C / +40°C).
COMPOSITION :	Matelas de transfert : Polyester, fibre de carbone, sans latex. Housse de protection : Polyester, polyuréthane.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant 1 TUBALPHA®, sa housse de protection et sa fiche technique.
COULEUR :	Matelas de transfert : Gris et rouge. Housse de protection : Blanc.