



FICHE TECHNIQUE
COUVRE THERMOMETRE



Couvre Thermomètre « Tempasept »

Distribué par :



9 impasse Lou Haou
33610 CESTAS

Tel : 05-57-26-40-50

@ : infos@santelec.com

Couvre thermomètre « Tempasept » :

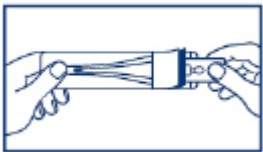

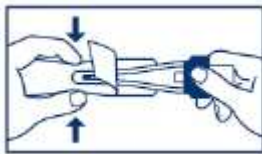
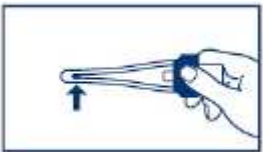
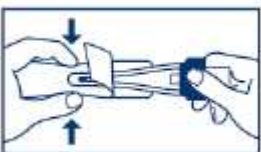
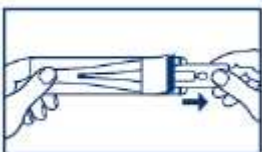


- **Etui jetable, double protection**, pour l'hygiène lors de la prise de température.
 - L'étui intérieur évite le contact du thermomètre avec la muqueuse.
 - La partie en couleur facilite l'ouverture de l'étui intérieur pour placer le thermomètre.
 - Le film mince et résistant garantit des résultats de mesures exacts.
 - Disponible en version lubrifié ou non lubrifié :
 Le **lubrifiant sur l'étui intérieur** facilite l'introduction rectale du thermomètre.
 - Le **modèle sans lubrifiant**, s'utilise pour la prise de température orale et axillaire.
 - A usage unique, l'étui **extérieur protège de la contamination** le personnel soignant et les plans de travail.
 - **Boîte de 1 000 pièces.**
 - Durée de conservation de l'étui : 3 ans.
 - Dispositif médical Classe I.
 - Non stérile
- Certifié CE.**



REFERENCE		DESIGNATION
SANTELEC	MINITUBE	
TH40251	403623	Couvre thermomètre « Tempasept » lubrifié – Boîte de 1 000
TH40252	403624	Couvre thermomètre « Tempasept » non lubrifié – Boîte de 1 000

Notice d'utilisation « Tempaset » :

		
Introduire le thermomètre entre la languette bleue et la languette blanche.	Rabattre la languette imprimée.	Séparer de l'emballage extérieur le thermomètre enveloppé dans la poche intérieure.
		
Prendre la température.	Après la prise de température, replacer le thermomètre toujours enveloppé de l'étui intérieur dans l'emballage extérieur.	Retirer le thermomètre propre et jeter les deux emballages.

Conditionnement « Tempaset » :

Référence Santelec	Conditionnement	Dimensions (cm)
TH40251	Boîte carton	21 x 15,5 x 8
TH40252	Boîte carton	21 x 15,5 x 8



Boîte carton



Étiquette

To whom it may concern,

Declaration of conformity

We herewith declare that our products, as listed below, are in conformity with the provisions of the Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council ("MDR") which applies to the products.

Manufacturer: Minitube AB

Basic UDI-DI: ++B9764000006K

Products: 403623, Tempasept Selabo Digital with Ointment
403624, Tempasept Selabo Digital without Ointment

Classification: Class 1, according to Annex VIII in Regulation (EU) 2017/745

This declaration is based on Annex IV in Regulation (EU) 2017/745. Full responsibility for the conformance of these products to the specification is assumed by Minitube.

Trångsviken 2021-05-17



Alexander Elmgren
Administrator