



CORBEN

# Ceinture Pelvienne T-POD

## Immobilisation standard

Grâce à sa mise en place facile et rapide, la ceinture pelvienne T-POD est le moyen le plus sûr et le plus efficace pour fermer l'anneau pelvien après un traumatisme, pour réduire le volume du bassin et pour le maintenir fermé en toute sécurité pendant le transport d'urgence.

Doté d'un système de compression circonférentielle simultanée, la T-POD est aussi efficace mécaniquement qu'une fixation définitive.




CONFORME aux  
Recommandations de  
Premiers Secours de la  
DGSCGC de Juin 2018



T-Pod Responder  
orange

### Caractéristiques techniques :


- **Taille unique** : s'ajuste rapidement et facilement pour convenir à tous.
- **Application pédiatrique** : par ajustement ou découpe de la T-POD, de manière à toujours conserver l'écart adéquat au moment de la pose.
- **Application bariatrique** par démultiplication des ceintures T-Pod jointes de sorte qu'elles s'adaptent à la plupart des personnes obèses
- **Serrage sécurisé par application symétrique** : rapport de compression entre le côté mobile et le côté fixe est de 1,28:1 (Tests Stork Labs)  
**Et par compression simultanée** : largeur du système de poulies, égale à la largeur de la ceinture, ce qui répartit la compression sur toute la ceinture
- **Totalement radio transparente**, rayons X et IRM
- **Compression modulée** : ajustable à chaque patient et à chaque application, à l'infini et immédiatement.

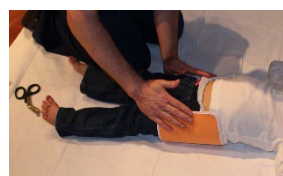

Usage pédiatrique



T-Pod Combat noire

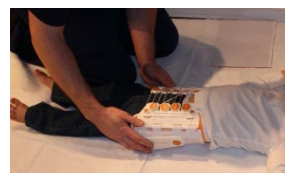

### Références :

IM06.07.311 : T-Pod Responder orange

IM06.07.312 : T-Pod Combat noire

*Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable.*

**CORBEN**  
59 rue Stendhal  
76620 Le Havre  
Tel +33 235 300 185  
Fax +33 235 300 186  
[corben@corben.fr](mailto:corben@corben.fr)  
[www.corben.fr](http://www.corben.fr)

