

TENA FLEX PROSKIN PLUS TAILLE EXTRA LARGE

Dénomination

Change complet adulte
avec ceinture

Taille	T4 / Extra Large
Référence	724950
Code ACL/EAN	7322541404646
Référence Echantillon unitaire TENA	100639
Marquage CE	36932
Poids total (+/- 7%)	120 g
Dimension produit (+/- 7%)	1030 x 520 mm
Dimension matelas (+/- 7%)	763 x 344 mm
Tour de taille du patient	105 à 153 cm

Données Laboratoire

Absorption : Méthode Rothwell	2337 ml
Vitesse d'acquisition (s) 1ère Dose de 200 ml	18 s

Respirabilité

Entrejambe	Respirant
Voile extérieur (Backsheet)	Respirant

Côtés

Côtés	Respirant
-------	-----------

Respect Cutané

Protection absorbante	à usage unique
Testé dermatologiquement communément appelé Hypoallergénique / Sans Latex	Matières Testées sous contrôle dermatologique * Accrédité par la Skin Health Alliance
Garde au sec rapide	Voile d'acquisition sur le matelas

Informations logistiques

Nbre de pièces / sachet	30
Nbre de sachets / carton	3
Nbre cartons / palette	20
Compactage	Oui
Poids du carton	11,490 kg
Volume carton m3	0,07488
Volume m3 / 100 pièces	0,0832
Site de production	Gennep (Hollande)
Provenance des matières premières	Majoritairement Union Européenne

Empreinte environnementale TENA Protects

Réduction de 18% d'empreinte carbone (2008-2019)

Fabrication 100% énergie renouvelable dans nos usines

TENA en Europe



Labelisé Nordic Swan Ecolabel




Emballages


Emballage primaire: sachet	Sachet en Plastique 40% recyclé Présence logo consigne de TRI TRIMAN conformément à la réglementation
Emballage secondaire: carton	Carton 100% recyclables composés à 85% de fibres recyclées
FACILE A IDENTIFIER	Sachet et carton : Indication du modèle produit, de la taille et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Sachet : ouverture facile, poignées de transport Protection : techniques simples de pose en position debout ou allongé
FACILE A UTILISER	Absorbe, encapsule le liquide et limite la diffusion des odeurs et le développement de bactéries

SPECIFICATIONS ET MATERIAUX CONSTITUTIFS DU PRODUIT

Composant	Composition	Poids (g)	Bénéfices
Double Matelas GARDE AU SEC Technologie Feeddry Advanced	2 matelas composés en mélange intime des composants ci-dessous:	76	ABSORPTION CONFORT ET SECURITE FACILITE LE MOUVEMENT ERGONOMIE FACILE A POSER SANS ODEUR
	Voile d'acquisition (Film PE perforé)		Absorbe le liquide très rapidement et permet la garde au sec
	Pulpe de cellulose		Absorbe et repart le liquide dans la protection
	Polyacrylate de Sodium - superabsorbant (SAP) ODOUR NEUTRALIZER™ =15% du poids de la protection		Absorbe, encapsule le liquide et limite la diffusion des odeurs et le développement de bactéries
Film Extérieur	Polyéthylène et Polypropylène	44	CONFORT SECURITE RESISTANCE
	100% Respirant		RESPECT CUTANE
	Blanc avec deux bandes couleur BLEU en pointillés		IDENTIFIABLE ET FACILE A UTILISER
voile intérieur	Non tissé 17 g/m² toucher Textile Feel	44	DOUX
Une ceinture repositionnable avec languette FINGERLIFT et ses 2 velcro	Ceinture: Film SBS+non tissé doux et résistant Velcro: Polypropylène, adhésif		PRACTICITE CONFORT ET SECURITE
Barrières anti-fuites latérales	composées d'élastiques sans latex Spandex synthétiques et de non tissé hydrophobe		MAINTIEN et SECURITE
Elastique sans latex -Taille - arrière	CD Film Elastique sans latex		FIABLE ET LISIBLE
Témoin de miction/saturation	colle - 1 témoin jaune longitudinal qui ne s'efface pas		Présent sur la face extérieure du change - 1 témoin jaune longitudinal qui devient bleu à la détection d'urine
TOTAL		120	

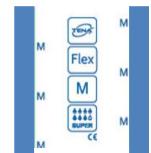

exemple ci-dessus de l'identification du voile extérieur

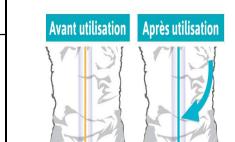

témoin de miction avant/après

*Matières premières et produits finis évalués conformément à l'évaluation biologique norme ISO 10993-1

Tests effectués dans des laboratoires indépendants externes. En plus des tests toxicologiques, sont requises et évaluées les informations fournisseurs sur la caractérisation chimique, les additifs, la teneur potentielle en allergènes etc. Réévaluation du matériel à une certaine fréquence.

Les produits sont exempts de latex de caoutchouc naturel, de colophonium, de PVC et de phthalates. Ils ne contiennent aucune substance généralement reconnue comme allergène. Ces produits ne contiennent pas non plus de substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au sens de la directive européenne 1999/45/CE (CLP) et du règlement (UE) 453/2010 (REACH). Les investigations cliniques selon la norme ISO 14155 ne sont généralement pas effectuées sur ce type de produit. L'évaluation clinique est toujours effectuée et, avec une très longue histoire d'utilisation sûre, montre que le système d'inspection pour assurer la sécurité des produits est suffisant.

MISE EN PLACE ET RETRAIT PAR LES EQUIPES SOIGNANTES

- Facilement déplié, reste déplié
- Mise en place et retrait rapides, retrait facile du change au patient (jusqu'à l'évacuation)
- Repositionnement facile avec le système de fixations décrit ci-dessus
- Résistance au déchirement, sec ou saturé

REFERENCES DISPONIBLES DANS LA GAMME

TENA FLEX PLUS S/M/L/XL - TENA FLEX SUPER S/M/L/XL - TENAFLEX MAXI S/M/L/XL - TENA FLEX ULTIMA S/M/L/XL

NORMES ET REGLEMENTATION UTILISEES POUR CE PRODUIT

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux de classe I selon l'annexe 8 respectant les obligations de la Medical Device Regulation (EU) 2017/745. Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Cette classification de TENA Slip n'a pas été modifiée par rapport à la classification selon l'ancienne législation, la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux. **Le code GMDN, Global Medical Device Nomenclature, est 11239, un sous-vêtement jetable composé de matériel absorbant utilisé pour recueillir l'urine et les fèces d'un patient adulte incontinent.** Chaque emballage de consommation est étiqueté avec l'indication d'être un dispositif médical, par texte dans chaque langue du marché.

Essity Hygiene and Health AB est certifié selon le système de gestion de la qualité ISO 13485 actuel pour les dispositifs médicaux. Les unités de production de TENA Flex sont certifiées ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et OHSSAS 18001 (santé et sécurité au travail).

Développement et fabrication par Essity ainsi conforme à : - la norme ISO 17025 pour la compétence laboratoire essais et étalonnage - la NORME ISO 14971 (ou équivalent) : 2013 Dispositifs médicaux « Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux - la NORME NF EN 15223-1 et 980 (ou équivalent) » Symboles graphiques utilisés pour l'étiquetage des dispositifs »

Mesure de la Capacité d'absorption: la norme ISO 11948-1:1996 Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit. Suit la norme ISO 15621 (ou équivalent) : 2017 « Aides pour l'absorption d'urine – Directives générales d'évaluation

DUREE DE VIE : Les produits d'hygiène absorbants en général n'ont pas de durée de conservation spécifique en matière de sécurité.

La date conseillée d'usage est de 3 mois après la production. Trois mois n'est pas une date de péremption, mais une durée conseillée d'usage. Les données de surveillance post-commercialisation nous ont montré que la sécurité et les fonctions principales des produits resteront beaucoup plus longtemps que cela. Ceci est valable dans des conditions normales de stockage et de manipulation et dans des emballages non-ouverts. Nous recommandons également que les produits TENA soient pas stockés avec des produits chimiques ou des substances à forte odeur pour éviter la propagation de l'odeur.

Essity Hygiene and Health AB, S-405 03 Göteborg, Suède est le fabricant légal tel que défini dans le règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux pour TENA Flex placé sur le marché de l'EEE.

Essity Internal