

ABENA Slip Premium Junior XS2

INCONTINENCE

ABENA Slip
JUNIOR
XS2



40 – 60 cm














5 gouttes

6 gouttes

7 gouttes

8 gouttes

9 gouttes

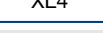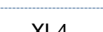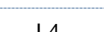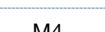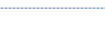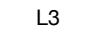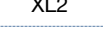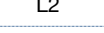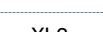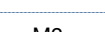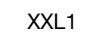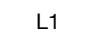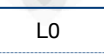

UTILISATEURS

UNISEXE

ENFANTS

INCONTINENCE SÉVÈRE

JOUR / NUIT

Description

ABENA Slip Junior XS2 est le change complet premium et écolabellisé, développé pour les enfants souffrant de mictions rapides et incontrôlées. Avec ses dimensions adaptées à l'entrejambe, il est destiné aux enfants trop grands pour utiliser des couches bébés et trop petits pour les protections adultes. Il est conçu pour ressembler davantage à un sous-vêtement ordinaire avec son enveloppe externe textile imprimée.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Attaches extensibles

Les attaches offrent un ajustement sur-mesure et un repositionnement facile lorsque l'adhésif bleu est retiré.



Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.



Barrières anti-fuites

Les différentes barrières (latérales et arrière) et élastiques anatomiques offrent un ajustement parfait et une sécurité à 360°.



Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.



Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.



ABENA Slip Premium Junior XS2

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	590 mm – 440 mm
Poids (+/-10%) :	57,5 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1500 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi



Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745



ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485



La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.



Le produit ne contient pas de latex



30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.



Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.



Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO² de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydratante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.



ABENA Slip Premium Junior XS2

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
32	5713571000007	1 860	38 x 17 x 24	128	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	Code GTIN carton	Poids brut carton (g)	Dimensions carton Long x larg x haut (cm)	Cartons / palette (gerbée)	Hauteur palette (cm)
4	5713571000014	8 155	60 x 39,6 x 36,2	12 (24)	124



GUIDE D'UTILISATION

Conçue pour les enfants souffrants de mictions rapides et incontrôlées, trop grands pour porter des couches bébés et trop petits pour utiliser des changes pour adultes. Tour de hanches: 40-60 cm

POSITION COUCHÉE

- Former une gouttière en pliant le change sur sa longueur. Ne pas toucher l'intérieur de la protection.
- Placer le résident sur son côté.
 - A - Positionner la protection, « gouttière » en main, entre les jambes.
 - B - Ajuster la face arrière du change.
- Utilisateur sur le dos. Ajuster la face avant du change. Rabattre les flaps arrière sur la partie avant et fixer les attaches du bas. S'assurer que le change soit maintenu étroitement sur le corps.
- A - Fixer les attaches hautes en les orientant vers le bas.
 - B - Ajuster les bords autour de l'aine.

POSITION DEBOUT

- Toujours veiller à faire la gouttière. S'assurer que le résident soit bien en appui. Glisser la protection, « gouttière » en main, entre les jambes.
- Maintenir la partie arrière de la protection avec la jambe. Tirer la face avant du change. Fixer les attaches basses sur la face avant.
- Fixer les attaches hautes en les orientant vers le bas. Ajuster les bords du change autour de l'aine.

PRODUITS ASSOCIÉS

Le choix et la combinaison adéquats des protections d'incontinence

Approche globale des soins de continence

Une approche structurée de l'hygiène

Toilette & soins de la peau adaptés

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

