

ABENA Pants Premium XS1

INCONTINENCE

ABENA Pants

XS1



45 – 70 cm

5 gouttes

6 gouttes

7 gouttes

8 gouttes

9 gouttes

			Light M	Light L		
	XS1	S1	M1	L1	XL1	XXL1
JUNIOR XS2		S2	M2	L2	XL2	
			M3	L3		
					XL3	

UTILISATEURS

UNISEXE

AUTONOME / SEMI-AUTONOME

INCONTINENCE SÉVÈRE

JOUR / NUIT

Description

ABENA Pants est la gamme premium et écolabellisée de culottes absorbantes, développée pour les personnes souffrant d'incontinence sévère. ABENA Pants s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne, faite à partir d'une matière très douce, assure le confort, la sécurité et la discrétion adaptés à la personne mobile.



Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1


La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Elasticité incomparable

Le grand nombre de fils élastiques présents sur la ceinture apporte un ajustement sur-mesure, sécurisé et confortable.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

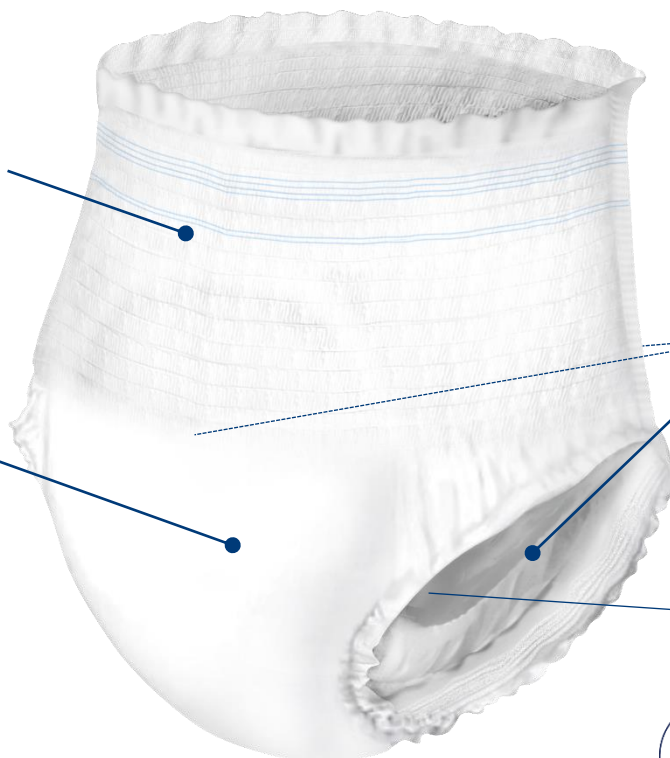

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité à 360°, même en position allongée.



Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.



ABENA Pants Premium XS1

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	730 mm – 500 mm
Poids (+/-10%) :	62 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1400 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi



Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745



ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485



La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.



Le produit ne contient pas de latex

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Japon


Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
24	5703538457876	1 508	28 x 16 x 29	96	3 couches de 3 cartons
Sachets / carton	Code GTIN carton	Poids brut carton (g)	Dimensions carton Long x larg x haut (cm)	Cartons / palette (gerbée)	Hauteur palette (cm)
4	5703538457869	6 519	63 x 35,5 x 30,5	9 (18)	107




ABENA Pants Premium XS1

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants XS1 est à utiliser lorsque le déplacement aux toilettes reste possible mais difficile à atteindre à temps. Tour de hanches: 45-70 cm. Après utilisation, déchirer les prédécoupes latérales de la ceinture, enrouler le produit et le fixer à l'aide de la languette arrière et jeter la protection.

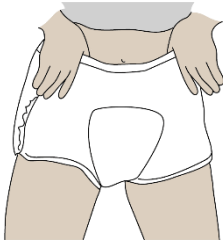

1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

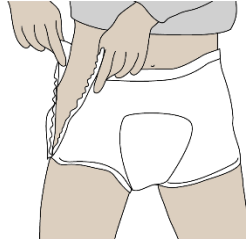

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.



3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

PRODUITS ASSOCIÉS



Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

 www.abena-frantex.fr

