

Chariot porte-bouteille



Déplacement
des bouteilles B5
de gaz médicaux
auprès des patients
dans les services



Chariot compact et léger

Administration du gaz à usage
médical avec la bouteille
dans le chariot

Sécurité et hygiène optimisées

Conçu et testé en collaboration
avec les utilisateurs

Chariot porte-bouteille

Pour une utilisation pratique et immédiate

• FACILITÉ D'UTILISATION :

Chariot de faible encombrement et **léger**.

Mise en place et retrait de la bouteille **aisés**.

Roulettes équipées d'une bande de roulement caoutchoutée assurant ainsi un déplacement silencieux.

Hauteur du chariot testée pour un **déplacement confortable**.

Equippé d'un **panier** de transport permettant d'y glisser protocole d'administration et kits d'administration du gaz.

Position haute du panier permettant le franchissement d'une marche.

• SÉCURITÉ :

Très stable, il permet l'utilisation de la bouteille dans le chariot (Angle de basculement de 28° pour une très bonne stabilité latérale et antéro-postérieure).

Sangles pour le maintien de la bouteille, qui fait corps avec le chariot évitant ainsi les entrechoquements.

• HYGIÈNE :

Formes tout en courbes pour faciliter le nettoyage, évitant ainsi la présence de saletés persistantes.


Panier amovible et ajouré pour éviter la stagnation de liquide ou l'accumulation de poussières.

Sangles en silicone permettant un nettoyage plus aisé et efficace.



CARACTERISTIQUES :

- > Dimensions :
Hauteur 1,00 m x largeur 0,34 m x profondeur 0,33 m
 - > Poids : 3,8 kgs
 - > Diamètre maximum de la bouteille : 15 cm
 - > Couleur : laqué blanc
 - > Désignation : chariot **B2/B5**
- Référence : 132512**

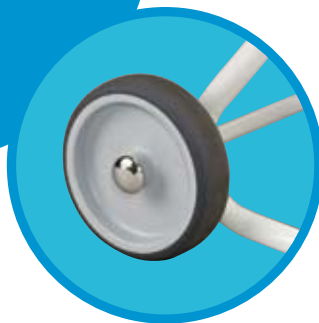

AIR LIQUIDE Santé FRANCE
est certifié ISO 9001 : 2000
et ISO 13485 : 2004

