



Acculan 4

Acculan 4



LA DIFFÉRENCE EST DANS LE DÉTAIL

B. BRAUN AESCULAP a été l'un des pionniers dans l'introduction des batteries non stériles.

Ce concept évite la stérilisation des cellules et de l'électronique de contrôle du moteur, deux composants présents dans l'accumulateur. Ces éléments étant sensibles à la température, cela a un effet positif sur la durée de vie des batteries et par conséquent, sur les coûts d'exploitation du système.

SOLUTIONS D'ENTRETIEN

Grâce à son revêtement en titane et sa solution de nettoyage et stockage ECCOS, Acculan 4 est compatible avec les cycles automatisés de nettoyage et les détergents alcalins.

Des adaptateurs de rinçage peuvent être intégrés au processus de nettoyage pour optimiser le nettoyage des canulations et des différents encliquetages d'outil.

SERVICE APRÈS VENTE

L'entretien régulier et une maintenance préventive sont essentiels pour assurer la fiabilité des moteurs sur une longue durée de vie.

B. BRAUN AESCULAP offre des solutions SAV adaptées aux besoins des établissements de santé.

Un indicateur de maintenance est gravé sur chaque Acculan 4 pour aider à la gestion SAV du parc de moteurs.



MONTEZ EN PUISSANCE

La philosophie B. Braun Aesculap est de développer des systèmes conçus de manière à simplifier le quotidien des équipes des établissements de santé, de l'utilisateur au bloc opératoire jusqu'aux agents en service de stérilisation.

Acculan 4

Acculan 4

MONTEZ EN PUISSANCE

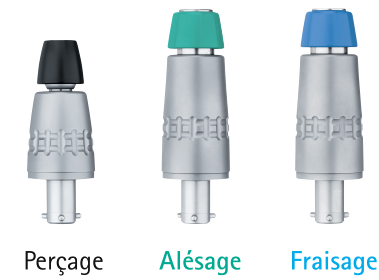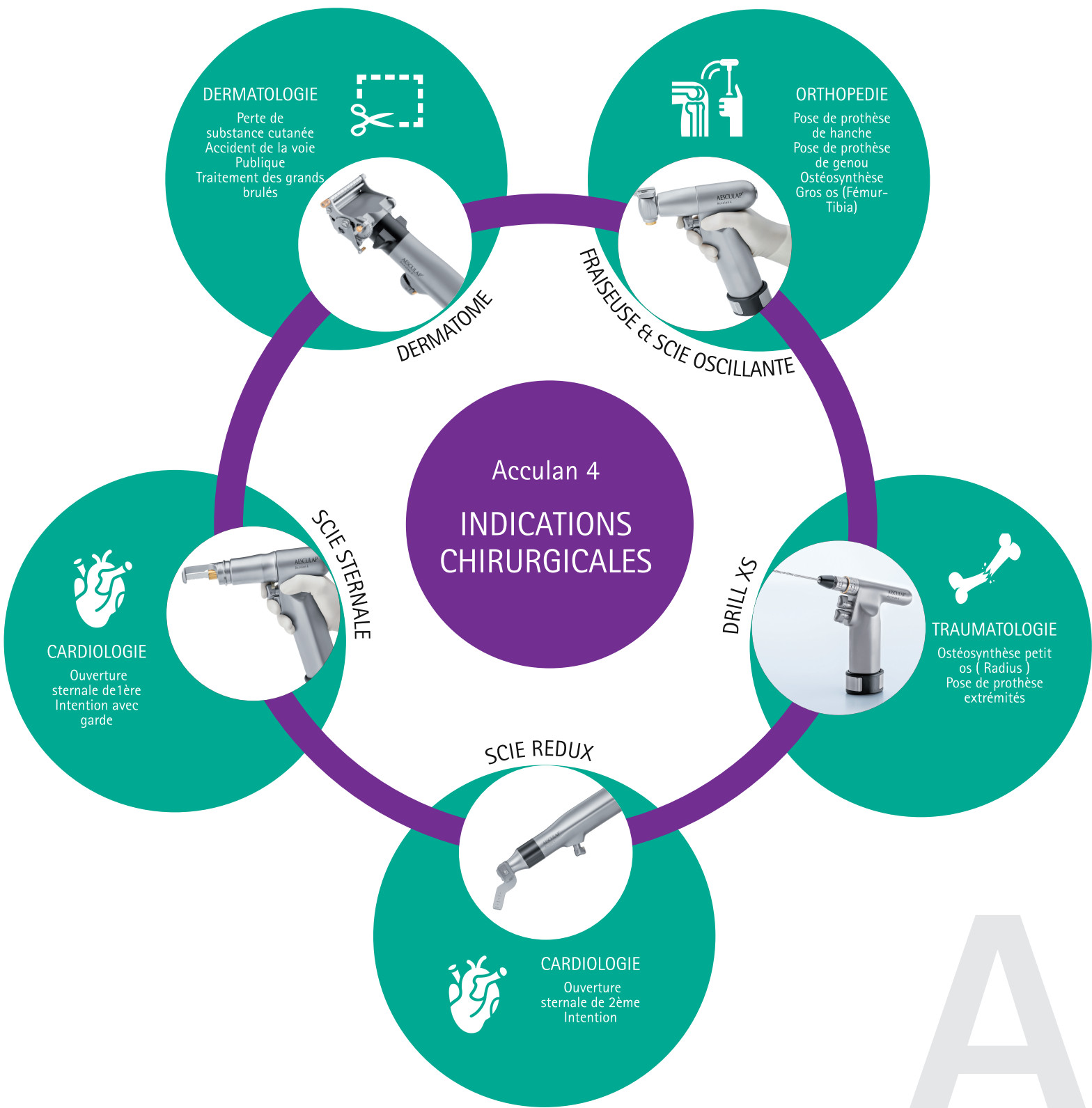

MANDRINS

Acculan 4 possède une large gamme de mandrins qui s'adapte à toutes les applications. Les mandrins sont dotés d'un code couleur, l'encliquetage est rapide et sécurisé, ce qui rend leur utilisation simple et intuitive. La gamme de mandrins XS est spécifiquement adaptée aux extrémités et garantit une grande visibilité du site opératoire.



CONFORT D'UTILISATION

Un marquage doré indique les éléments manipulables tels que les zones d'encliquetage des lames de scie ou de déverrouillage des mandrins pour une utilisation intuitive. La batterie est située dans le manche du moteur de forme arrondie, pour une répartition équilibrée du poids du moteur et un confort de prise en main.



CHARGEUR

Le chargeur effectue un court auto-test lors de chaque connexion de batteries. Il informe, via des indicateurs visuels, de la progression de la charge ou de la nécessité d'une maintenance. L'utilisateur est assuré du bon fonctionnement de la batterie.



CONSOMMABLES


B. Braun Aesculap propose plus de 100 références de lames de scie, tarauds et fraises. Les consommables Aesculap sont réutilisables et compatibles avec Acculan 3Ti.

Acculan 4

Acculan 4

ORTHOPÉDIE

PERCEUSE ET FRAISEUSE

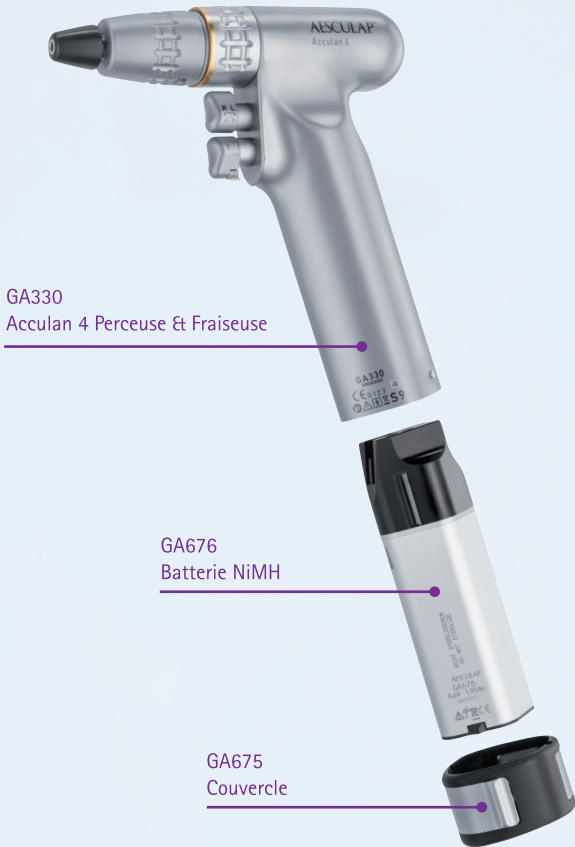

SCIE OSCILLANTE



La perceuse fraiseuse Acculan 4 a été conçue pour une utilisation optimale en orthopédie. Les quinze mandrins dédiés possèdent la vitesse et le couple nécessaire pour des applications tels que le fraisage du cotyle ou l'alésage du fémur.

L'utilisateur peut basculer aisément de la rotation horaire à anti-horaire mais aussi au mode taraudage grâce à la combinaison des deux gachettes.

La scie oscillante Acculan 4 est dotée d'une nouvelle boîte de vitesse qui permet de réduire le bruit et les vibrations pour un confort d'utilisation et une précision optimisée.


L'extrémité de la scie sagittale GA331 est rotative et peut être actionnée sans outil par incrémentation de 45° pour offrir une flexibilité en terme d'ergonomie.

Fraiseuse-Scie



Acculan 4


TRAUMATOLOGIE

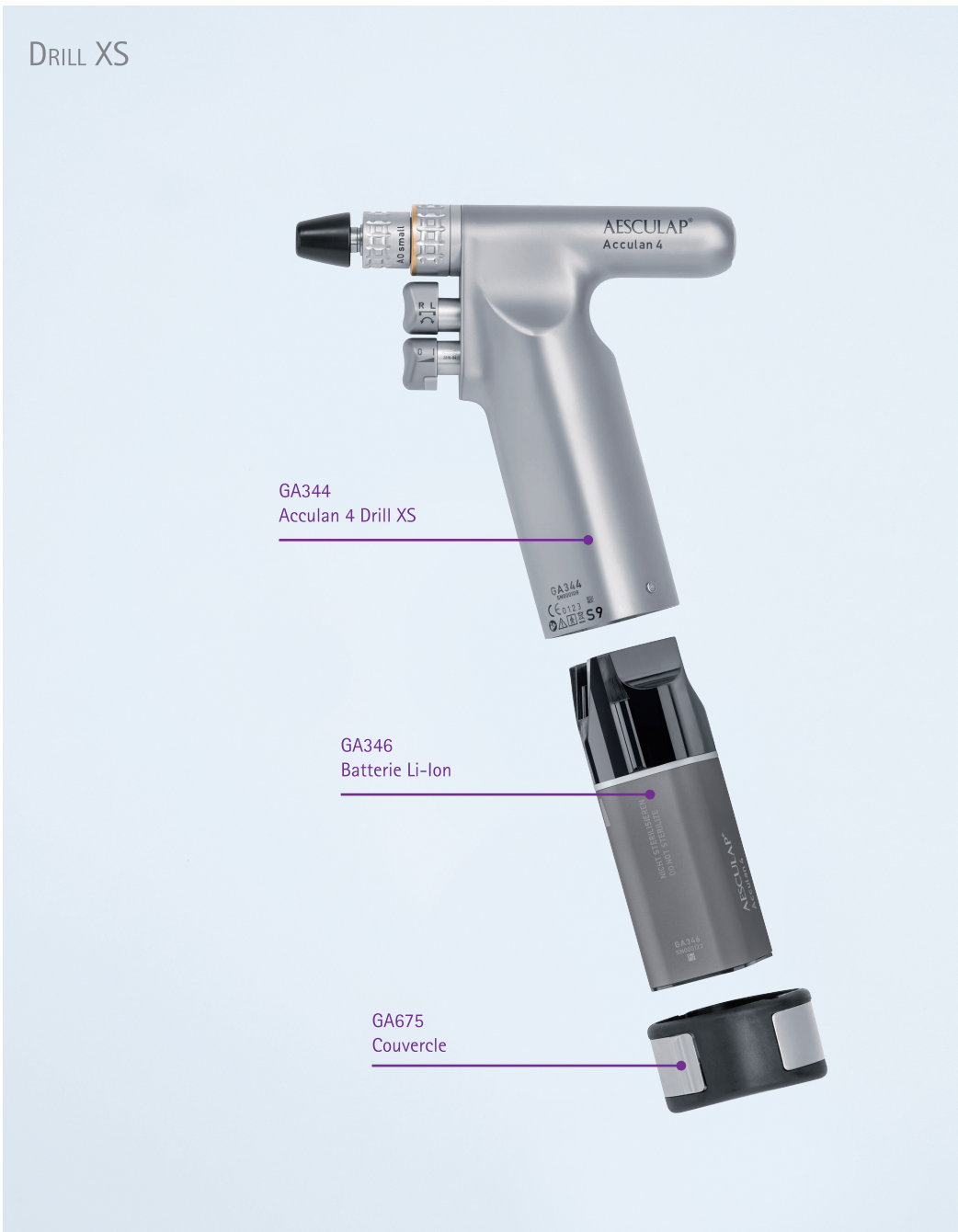

Le Drill XS est la nouveauté de la gamme Acculan 4. Ce moteur allie ergonomie et puissance pour une utilisation optimale en traumatologie.

Les mandrins de la gamme XS ont été spécialement conçus pour améliorer la visibilité du site opératoire tout en proposant une vitesse et un couple qui couvrent un grand nombre d'applications: Ostéosynthèse des extrémités (main et pied), arthroplastie de cheville ou alésage du radius par exemple.

Il existe un mandrin de scie sagittale pouvant accueillir des lames de scies de longueur de 50 mm maximum ainsi qu'un mandrin de scie réciproquante pouvant accueillir des lames de scies de 30 mm maximum.

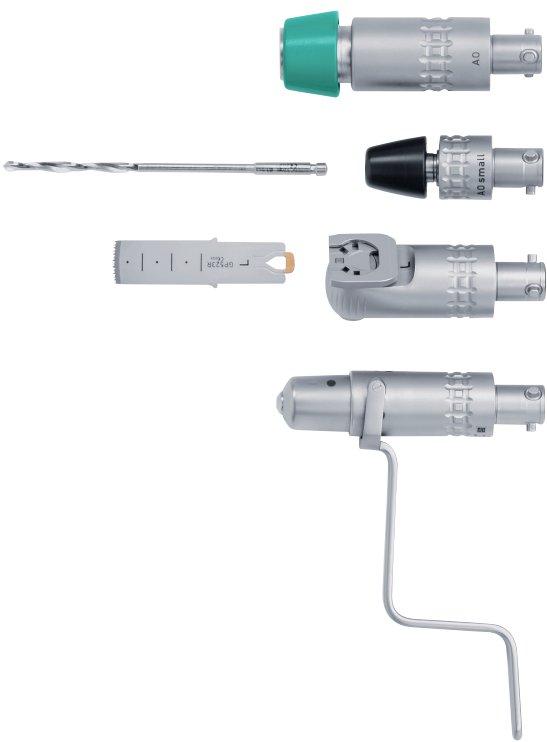

Drill XS



Acculan 4

CARDIOLOGIE




Scies

Acculan 4 propose une gamme de scies spécialement adaptée à la chirurgie cardiaque ouverte.


La scie sternale réciprocante avec garde permet de réaliser des sternotomies de première intention.

La scie Redux, scie oscillante droite avec encliquetage vertical, propose une alternative pour des chirurgies cardiaques de seconde intention. Combinée à l'utilisation de lames de scie au design spécifique, l'utilisateur a la possibilité de réaliser des sternotomies tout en bénéficiant d'une prise en main différente.

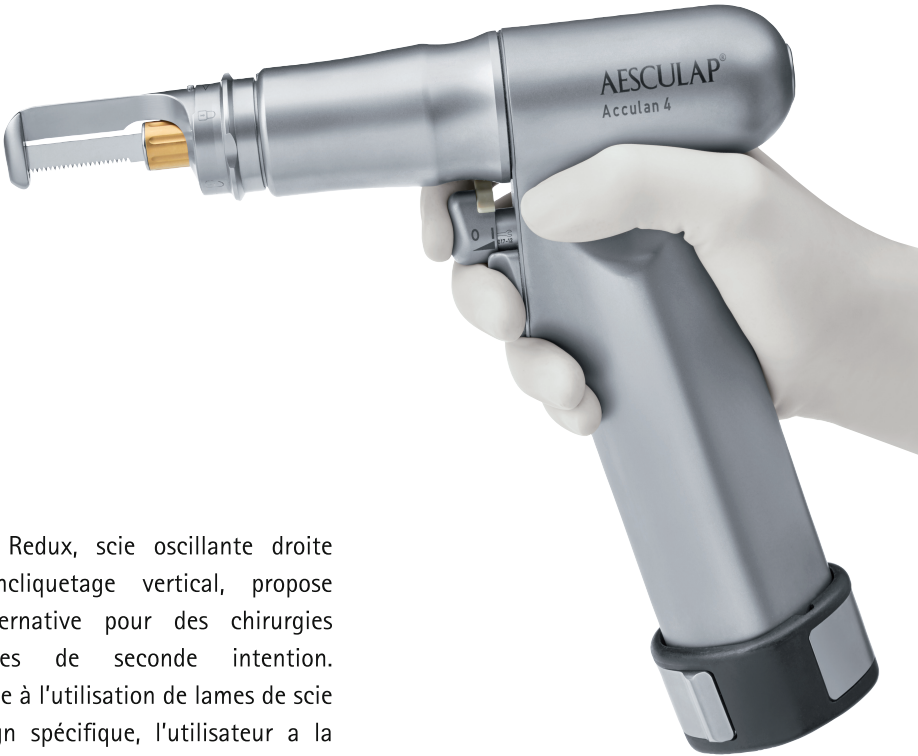

Acculan 4


DERMATOLOGIE

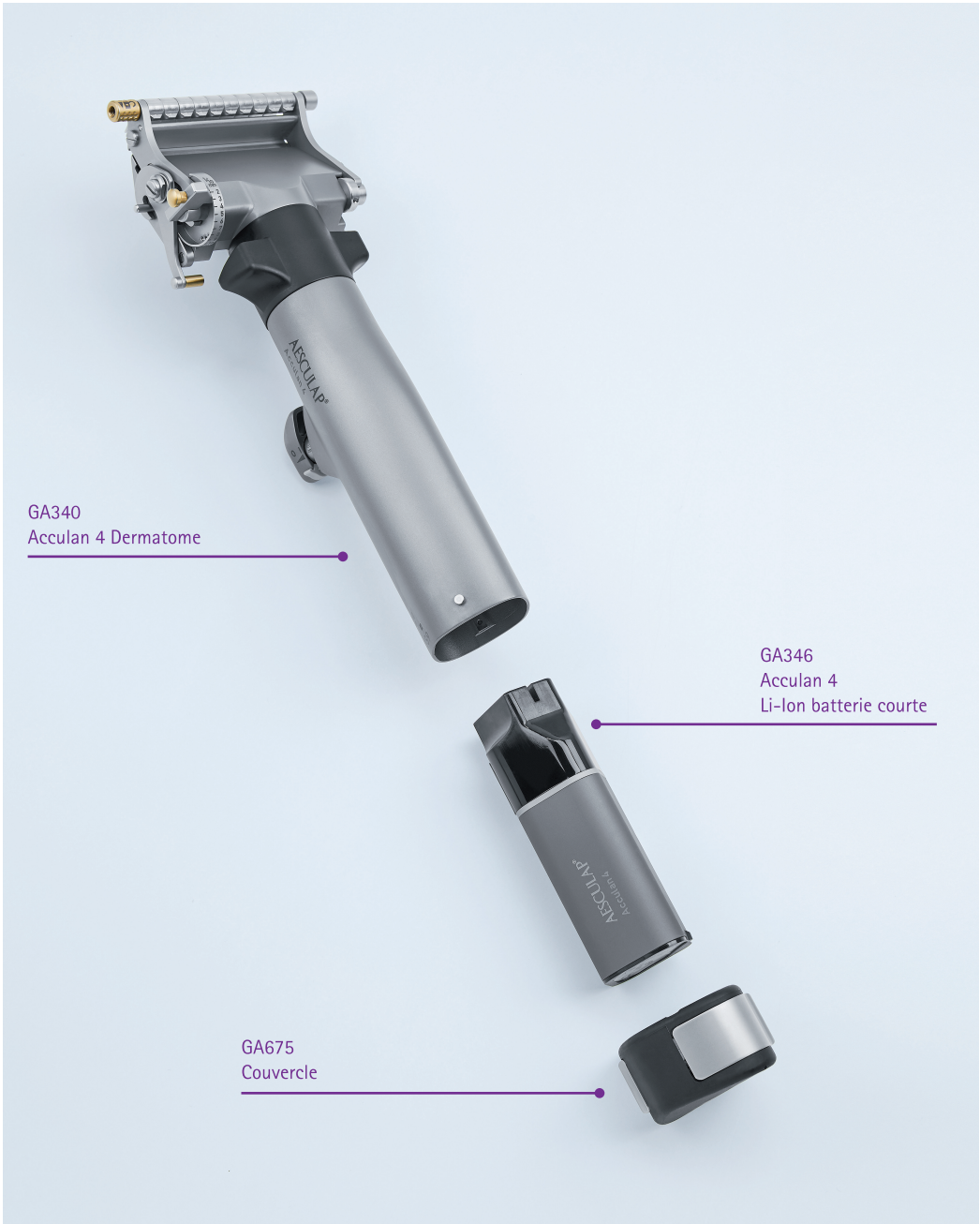

Le dermatome Acculan 4 possède une grande flexibilité en terme de réglage et permet d'effectuer des greffons cutanés de 0,1 à 1,2 mm d'épaisseur et allant jusqu'à 78 mm de largeur. Le marquage doré guide les utilisateurs vers les éléments manipulables pour un montage/démontage facilité.

L'expansateur de greffons BA720R est associé au dermatome pour augmenter la surface des greffons cutanés selon 3 facteurs d'agrandissement.

Les plaques de support de greffes sont disponibles avec des facteurs de 1:1,5 1:3 et 1:6

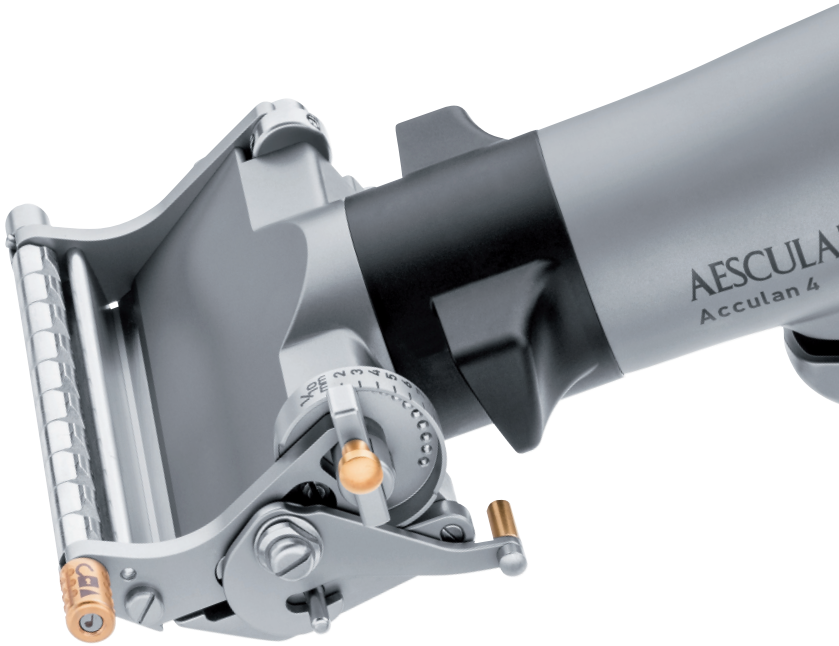

Dermatome



Acculan 4

RÉFÉRENCES

CHARGEUR, BATTERIES ET COUVERCLE	
GA320	Chargeur (sans cordon d'alimentation)
GA346	Batterie Li-Ion (courte)
GA676	Batterie NiMH (longue)
GA666	Batterie NiMH (courte)
GA675	Couvercle

Acculan 4	DRILL XS ET ACCESSOIRES
GA344	Drill XS
GB870R	Mandrin XS Alésage -grand Jacobs (0,5 – 7,4 mm)
GB871R	Mandrin XS Alésage – grand AO
GB872R	Mandrin XS Alésage – Hudson Zimmer
GB878R	Mandrin XS visée radio-transparent Synthes (511.300)
GB881R	Mandrin XS perçage – grand Jacobs (0,5 – 7,4 mm)
GB882R	Mandrin XS perçage – petit Jacobs (0,5 – 4,0 mm)
GB884R	Mandrin XS perçage – petit AO
GB886R	Mandrin XS perçage – AESCULAP® hexagonale
GB887R	Mandrin XS perçage – dentaire
GB891R	Mandrin XS scie sagittale
GB894R	Mandrin XS passe broche (0,6 – 3,2 mm)



Acculan 4	GRANDE PIECE A MAIN ET ACCESSOIRES
GA330	Fraiseuse et perceuse
GA331	Scie oscillante
GA334	Scie réciproquante
GA337	Scie oscillante redux
GB620R	Mandrin perçage – Jacobs sans clé (0,5 – 7,4 mm)
GB621R	Mandrin perçage – grand Jacobs (0,5 – 7,4 mm)
GB623R	Mandrin perçage – petit AO
GB639R	Mandrin perçage – petit Jacobs (0,5 – 4,0 mm)
GB641R	Mandrin passe broche (0,6 – 4,0 mm)
GB645R	Mandrin visée radio-transparent Synthes (511.300)
GB657R	Mandrin Alésage – grand AO
GB660R	Mandrin scie sagittale
GB663R	Mandrin perçage – Trinkle
GB664R	Mandrin perçage – AESCULAP® hexagonale
GB665R	Mandrin perçage – Hudson Zimmer
GB667R	Mandrin fraisage – Jacobs
GB668R	Mandrin fraisage – grand AO
GB669R	Mandrin fraisage – Hudson Zimmer
GB670R	Mandrin fraisage – Harris



Acculan 4

RÉFÉRENCES

Acculan 4	DERMATOME ET ACCESSOIRES
GA340	Dermatome
GA341	Dermatome 0,1mm
BA720R	Expanseur de greffon

Acculan 4	SYSTEMES ECCOS
GB243R	Set ECCOS pour 2 grandes pièces à main (panier inclu)
GB495R	Fixation ECCOS pour 1 grande pièce à main
GB496R	Fixation ECCOS pour 3 mandrins
GB497R	Fixation ECCOS pour 1 mandrin
GB256R	Set ECCOS pour dermatome (panier inclu)
GB257R	Set ECCOS pour Drill XS (panier inclu)
GB715R	Fixation ECCOS pour 1 mandrin XS
GB716R	Fixation ECCOS pour 3 mandrins XS

Acculan 4	ACCESSOIRES D'ENTRETIEN
GB600	Sterilit Spray de lubrification
GB600840	Adaptateur Sterilit (Grands moteurs)
GB600880	Adaptateur Sterilit (Moteurs XS)



Distribué par: B. Braun Medical | 26, rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud - France | Tél : 01 41 10 53 00 | Fax: 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr | Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Fabriqué par: Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Allemagne | Tél : + 49 (0) 74 61 95-0 | Fax +49 (0) 74 61 95-26 00 | www.aesculap.com

Edition 01/2019

Dispositifs médicaux de classe IIa et I (chargeur et accumulateurs). non pris en charge à titre individuel sur la LPPR. Certificat CE 0123. Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé. Document et photo non contractuels. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l'étiquetage avant utilisation.

301616P_20190118_20240118